



GC EUROPE



KATALÓGUS

2013-2014



./GC./



GC EUROPE

MINIMÁLINVAZÍV FOGÁSZAT		
Felismerés	Bevezetés	12
	Plakk teszt	12
	Nyál teszt	13
Megelőzés	Bevezetés	14
	Krém helyi alkalmazásra	14
	Hagyományos üvegionomer cement	16
Helyreállítás	Bevezetés	17
Visszahívás	Bevezetés	17

HELYREÁLLÍTÓ FOGÁSZAT		
Direkt helyreállítás - kompozit	Üvegszállal megerősített kompozit	20
	Anterior kompozit	22
	Poszterior Kompozit	23
	Helyreállítási kalauz	23
	Univerzális kompozit	24
	Anterior és poszterior kompozit	26
	Folyékony kompozit	27
	Ragasztás	28
Csonkfelépítés	Kompozit	30
	Üvegszálás csap	31
Direkt, üvegszállal megerősített helyreállítás	Üvegszálás megerősítés	32
	Tartozékok	35
Direkt helyreállítás - üvegionomer	Továbbfejlesztett üvegionomer cement	36
	Hagyományos üvegionomer cement	38
	Kondicionálás	39
Alábélelés	Kondicionálás	40
	Kondicionálás	41
Direkt helyreállítás - eszközök	Ideiglenes	41
	Lakkozás	42
	Finírozás és polírozás	42

PROTETIKA A FOGORVOS SZÁMÁRA		
Ragasztás	Kompozit	46
	Műgyantával megerősített üvegionomer cement	48
	Hagyományos üvegionomer cement	49
	Ideiglenes	50
Ideiglenes koronák és hidak	Kiegészítő eszközök	50
Ragasztás	Alkalmazási útmutató	51
Ortodonciai ragasztás	Műgyantával megerősített üvegionomer cement	52
Lenyomatvétel	VPES	56
	Szilikon	58
	Alginát	59
	Kanalak	60
	Kiegészítő eszközök	61
	Termoplasztikus anyagok	62
Ideiglenes koronák és hidak	Kiegészítő eszközök	62
	Akril rezin	63
Harapásellenőrzés	Kompozit rezin	64
	Szilikon	65
Alábélelés és kondicionálás	Resin	66
	Szilikon	67
	Parodontális pakolás	67

PROTETIKA A FOGTECHNIKUS SZÁMÁRA		
Modellkészítés	IV. osztályú gipsz	70
Mintázás	Rezin & Viasz	72
Lenyomatvétel	Egyéni kanalak	72
Beágyazás	Ötvözetekhez	73
	Kiegészítő eszközök	77
	Kerámiákhoz	78
Korona és híd	Kerámia	79
	Kerámia bond	83
	Kerámia	84
	3D kerámia festékek	87
	Kerámia - One-Body	88
	Kompozit	90
	Kompozit íny színek	91
	Lakkozás	91
	Üvegszálás megerősítés	92
	Primer fém - kompozit	93
	Primer kompozit - kerámia	93
	Primer kompozit - kompozit	93
	Fénypolimerizáló készülék	94

OKTATÁS		
GC Europe Campus	Bevezetés	95

A katalógusban szereplő fogszínek Vita® színek vagy GC színek.
A Vita® a Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, Germany bejegyzett névjegye.
A RECALDENT™ engedéllyel használt márkanév.



Bevezetés



ÁLTALÁNOS TENNIVALÓK EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A világ minden táján az emberek azért küzdenek, hogy javítsák az életminőségüket, egészségesek, fiatalok és vonzóak maradjanak. Hogyan tud egy fogászati cég a globális egészség fejlesztéséhez hozzájárulni? Nekünk a GC-nél ez egyértelmű!

A GC 1921-es megalapítása óta elköteleztettek vagyunk a fogászat iránt és jelentős eredményeket értünk el eddigi utunk során. Az évtizedes termékfejlesztés, kutatás, újítások és világszínvonalú gyártás a GC-t biztosította abban, hogy fogászat szakembereivel karöltve az orális egészséget segítse mindenhol.

Az orális egészség és általános egészség közötti összefüggés tudományosan igazolt, így meggyőződésünk, hogy termékeink emelik az orális egészség standardját, így lehetővé téve az emberek számára, hogy egészségesebb és általánosságban boldogabb életet éljenek. 2011 februárjában, a cég fennállása 90. évfordulójának ünneplésekor a vezetőség az új, Vision 2021 direktívát jelentette be. Kihívásunknak tekintjük, hogy a világ elsőszámú fogászati cégévé váljunk, tovább közreműködve az egészséges és hosszú életű társadalomért. Továbbra is megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy támogassuk a világ embereinek egészségét, és ez elkísér minket a 100. évfordulónkig.

MINŐSÉG

A minőségbiztosítás a GC tevékenységeinek fémjelzése lett, a vállalat minden tevékenységi területén. Büszkéek vagyunk, hogy ezt a legmagasabb szintű szabályozó szervek is számtalanszor elismerték már, és mi továbbra is küzdünk céljaink eléréséért. Legnagyobb elismerésünk az összes közül a Japán Minőségi Medál (2004), a legjelentősebb elismerés minőségért, amit egy vállalat kaphat a világon. Továbbá, az összes GC munkatárs nevében megkaptam a Deming Prize-t az elmúlt 34 év GQM promóciós aktivitásáért.

Alapvető célunk, hogy olyan termékeket fejlesszünk ki, melyek nem csak felülmúlják a világon létező minőségi előírásokat, de biztosítják, hogy a globális környezet, és ebből következően a világ populációja jobban védett legyen.

A GC-nél nagy figyelmet fordítunk vásárlóinkkal és kutatóinkkal való kommunikációs kötelékre, mely szerint szabadon véleményt és információt cserélhetünk, valamint az inspiráció forrásai lehetünk egymás számára. Nem kérdéses, hogy a kulcs a sikerhez vásárlóink igényeinek és érdeklődésének pontos megértésén alapul.

VÁLLALATI FILOZÓFIA

Ahogy hangsúlyoztuk, a jövőképünk, mint vállalat sokkal tovább mutat, mint az innovatív fogászati termékek gyártása. Ennek a megközelítésnek az essenciája a „Semui” elvében foglaltatik, melyet minden GC dolgozó nap mint nap követ. Mint vállalati filozófia reprezentálja az önfeláldozást, őszinte objektivitást, jóságot és hatalmas bölcsességet. Fő szempontjaink fenntartják termékeink állandó magas minőségét és vevőink legnagyobb megelégedettségét. Mindezek alapján úgy látjuk, hogy kulcsszerepünk van az orális egészség szakembereinek globális közösségének kiszolgálásban.

Köszönjük, hogy csatlakozik hozzánk ezen az utazáson!

Makoto Nakao
Elnök és Vezérigazgató
GC Corporation



A KIVÁLÓSÁG KÖZÉPPONTJA EURÓPÁBAN

A GC Europe régóta a kiválóság központja a GC számára. Az elmúlt pár évtizedben a kontinenst átszövő regionális piaccá való fejlődéstől a korszerű logisztika- és prémium fogászati oktatás kiépítéséig örömmel folytatjuk a legmagasabb minőségű kiszolgálást vevőink számára. A GC Europe VÍZIÓJA, hogy Európa mércét adó fogászati cégévé váljon, ennek érdekében pedig folytatjuk az innovatív rendszerekbe és termékekbe való befektetést, melyek jelentős hozzáadott értéket képviselnek vevőink felé. Ezen keresztül valósítjuk meg a MISSZIÓNKAT, miszerint a GC-t a világ vezető orális egészséggel foglalkozó vállalatainak egyikévé tesszük. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan cég lehetünk, amely világszínvonalú minőséget nyújt mind a termékekben és szolgáltatásokban minden fogászati szakembernek Európában.



FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÍTÉS

A kiválósághoz való elköteleződésünk még nagyobb célokat állít fel, még nagyobb álmokat ad, még magasabb csúcsoakat tesz elérhetővé, miközben a legújabb tudományos ismereteket birtokunkba juttatja. Példa erre régóta fennálló kapcsolatunk a Leuveni Katolikus Egyetem (Belgium) méltán híres Fogorvosi Karával, ahogy emellett számos más kiváló kutató központtal. A Toshio Nakao Tanszéken keresztül együttműködünk a karral, támogatjuk a fogászati anyagok adhéziójának kutatását. Az így szerzett tudás segít jobban megérteni a zománc-dentin adhézióját, és ezáltal hozzájárul az új, innovatív anyagok kifejlesztéséhez.

KAPCSOLAT A VÁSÁRLÓKKAL

Egyik legfontosabb célunk, hogy elkötelezzük magunkat vásárlóinkkal szemben, így biztosítsuk igényeiknek megfelelő kielégítését. A GC Europe magába foglalja a regionális piac változatosságát, képviseletet létrehozva minden főbb európai országban, valamint az erős háttér csapatot, amelybe bele tartoznak a helyi fogászati kereskedelemben dolgozó szakemberek is. Köszönhetően az egész Európára kiterjedő hálózatunknak és a központi adatbázisnak biztosítani tudjuk, hogy minden termékünk pontosan kiszállításra kerüljön, és folyamatosan elérhetőek legyenek partnereinken keresztül. Partnereink elégedettségét kérdőívvel rendszeresen mérjük, ezzel ellenőrizhetjük teljesítményünket és megtervezhetjük a további fejlesztési területeket.

Helyi képviselőink célja hogy ápolják ezeket a kulcsfontosságú kapcsolatokat a helyi nyelvtudás és az adott országra vonatkozó egyedi ismeretek segítségével. Központilag ezt csúcstechnológiával felszerelt továbbképzési központunk, a GC Campus támogatja, amely kurzusoknak és workshop-oknak ad helyet a legjobb előadókkal.

Eckhard Maedel
Elnök
GC Europe





GLOBÁLIS CÉG, HELYI ELKÖTELEZETTSÉG

Ön hisz a barátságos beszélgetésben egy multinacionális vállalattal? A GC-nél ez lehetséges! Annak ellenére, hogy vezetése globális, a GC megtartotta a lokális-orientáltságú megközelítést, amely partnereit személyes beszélgetések folyamán, saját nyelvükön szolgálja ki. A regionális GC Europe irodák elkötelezettek abban, hogy kiváló ajánlatokat és terméktámogatást adjanak, így Ön a munkájára koncentrálhat: gyönyörű mosolyokat létrehozva.

ÖRÖMMEL VÁRJUK A TALÁLKOZÁST

Annak érdekében, hogy elérjük partnereinket és kiszolgálhassuk igényeiket, rendszeresen részt veszünk kiállításokon és konferenciákon, ahol találkozhat csapatunk barátságos képviselőivel. Szintén rendszeresen szervezünk nyílt napokat és továbbképzéseket, ezekkel a termékismeret bővítését és a szakmai fejlődést támogatva. Így garantálhatjuk Önnek, hogy mindig segítségére áll egy barátságos GC partner, aki kész választ adni kérdéseire és ellátni minden további információval.

Keresse GC logónkat és csomagolásainkat a következő fogászati eseményen, melyen részt vesz...
örömmel várjuk a találkozást!



LÉPJEN BE A GC EUROPE-BA...

Már több mint 25 éve a GC Europe a fogorvosok és fogtechnikusok körében egyaránt elismert, mint a következetesen magas minőségű és könnyen kezelhető termékek gyártója, és mint a legmagasabb színvonalú szolgáltatások biztosítója vásárlói részére. Fogászat iránti odaadásunk eredménye az állandó termékfejlesztés, amely értéket ad partnereinknek. Vezető szerepet töltünk be az üvegionomer technológiában és jól ismertek vagyunk több mint 20 éves gyakorlatunk és fejlesztésünk által a gipsz-, lenyomat-, és beágyazó termékek terén. Az elmúlt években további stratégiai területeket adtunk portfóliónkhoz az innovatív rendszerek és esztétikai fogászat, valamint minimál invazív területen.



Bármilyen formában lép velünk kapcsolatba, kiválóságra való törekvésünk egyértelmű lesz:

MINŐSÉG

Tevékenységeink az állandó magas minőség nyújtására fókuszálnak, ezzel elfogadott és megbízható partnerévé téve minket fogászati praxisának vagy laboratóriumának

1

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Mindig igyekszünk folyamatosan fejleszteni szolgáltatásainkat, erősíteni kompetenciánkat és tökéletesíteni a piacra- és vásárlókra való érzékenységünket, ahogy az udvarias és barátságos üzleti megközelítést is

2

KISZOLGÁLÁS

Büszkék vagyunk rendszerünkre és működésünkre, mely lehetővé teszi, hogy termékeinket gyorsan és kényelmesen juttassuk el Önnek, így fókuszálhat a gyönyörű mosolyok megalkotására

3

TECHNOLÓGIA

Hiszünk a fejlesztések hasznosításában a továbbhaladás érdekében, mivel ez különböztet meg és motivál a növekedésre és fejlődésre minden területen

4



GC G-ænial Anterior



A GC G-ænial Anterior közepes konzisztenciájú kompozit, amely nem tapad vagy csúszik meg, ezért ideális a szabad kézi alakításra esztétikus helyreállításoknál. A GC G-ænial Anterior könnyen használható, természetes vitalitást és kivételes színegyezést biztosít a kiváló esztétikai eredmény érdekében, egy mindennapi használatra alkalmas kompozittá téve ezzel. Ld. 22. oldal.

GC G-ænial Posterior



A GC G-ænial Posterior konzisztenciája tömörebb, mint a G-ænial Anterior-é, biztosítva ezzel a jobb tömöríthetőség érzését, megfelelő viszkozitást a kavitás falaihoz való teljes tapadás érdekében. A GC G-ænial Posterior könnyen formázható és optimális színű a tökéletes poszterior helyreállítás érdekében. Ld. 23. oldal.

GC G-ænial Universal Flo



GC G-ænial Universal Flo a folyékonyág és viszkozitás egy exkluzív kombinációját nyújtja, ami egyszerű és kényelmes behelyezést biztosít, kimagasló fizikai tulajdonságokkal vegyítve, melyek biztonságos és tartós helyreállításokat garantálnak, választ adva ezzel sok nehéz esetre, ahol nem akar kompromisszumot kötni a tökéletes behelyezés, esztétika és erő között. Ld. 24. oldal.

GC G-ænial Bond



A G-ænial Bond a legnagyobb és legbiztonságosabb kötést kínálja zománchoz és dentinhez egyaránt, függetlenül a használt technikától. A G-ænial Bond használatával az önsavazó ragasztó egyszerűségét és csökkentett posztoperatív érzékenységet kap megnövelt kötési erővel, amennyiben a 10 másodperces önsavazást választ a zománcon. Ld. 28. oldal.

GC EQUIA® Fil & GC EQUIA® Coat



Az GC EQUIA kiváló esztétikát kínál kivételes transzlucenciájával és színilleszkedéssel*, hogy páciense esztétikai igényeit kielégítse. Magas nedvességtűrő képességgel, zsugorodási stressz és jelentett posztoperatív érzékenység nélkül, a GC EQUIA megadja a lehetőséget, hogy hosszú távú helyreállítást készítsen mindössze 3 perc és 25 másodperc alatt! Ld. 36-37. oldal.
*az adatok elérhetők

GC everX Posterior



A GC everX Posterior egy üvegszállal megerősített kompozit a dentin helyettesítésére. A GC everX Posteriorban lévő rövid üvegszálak tökéletesé teszik bármilyen nagy kiterjedésű kavitás kompozit tömésének megerősítő alapjaként. Köszönhetően egyedülálló tulajdonságainak, a GC everXPosterior új lehetőségeket ad a nagy kiterjedésű kavitások helyreállítására a rendelőben, alternatívát adva a nagyméretű kavitások gazdaságos helyreállítása iránt felmerülő növekvő igényre. Ld. 20. oldal.

GC Tri Plaque ID Gel



A GC Tri Plaque Gel nagyszerű eszköz, hogy motiválja és tanítsa pácienseit. Három egyszerű lépésben a GC Tri Plaque ID Gel nem csak az érett és friss közötti különbséget mutatja meg, hanem felfedve a savas pH-t kiemeli azokat a részeket, ahol a baktériumok leginkább aktívak. Ld. 12. oldal.

GC Saliva-Check Mutans



Javítsa a megelőzés hatásfokát és motiválja pácienseit a Saliva-Check Mutans segítségével, egy egyszerű és pontos rendelőben végezhető teszt, amely mindössze 15 perc alatt kimutatja a páciens S. mutans szintjét. Ld. 13. oldal.

GC G-CEM LinkAce



A GC G-CEM Automix már megmutatta a legmagasabb minőséget önragasztó rezin cementként, kiváló ragasztással, esztétikával, magas erősséggel és tartóssággal. A GC G-CEM LinkAce tovább megy, és a legmagasabb polimerizációs rátát kínálja önkötő módban. A GC G-CEM LinkAce tökéletes eredményt mutat, függetlenül a cementezendő protetikai munka anyagától. Ld. 46. oldal.

GC FujiCEM 2



A GC FujiCEM 2 egy évtizednyi folyamatos fejlesztés eredménye, maga mögött tudva több mint 150 millió beragasztott koronát világszerte. Az innovatív Force & Fusion technológia által hajtva a GC FujiCEM 2 megkétszerezi az eredeti GC FujiCEM* nyírószilárdságát, megjutalmazva Önt a sikeres kezelés biztonságával. Ld. 48. oldal.

*az adatok elérhető

GC Fuji TEMP LT



A GC Fuji TEMP LT az első hosszú távú ideiglenes üvegionomer cement paszta-paszta formában különböző felhasználásra, mint például hosszú távú ideiglenes ragasztásra implantált csomkokon, próbaragasztáshoz komplex orális rehabilitáció és hosszú távú ideiglenes pótlás esetén. A GC Fuji TEMP LT kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy biztosítsa a tökéletes egyensúlyt a retenció és visszaállíthatóság között. Ld. 50. oldal.

GC Fuji IX GP EXTRA por/folyadék (P/F)



A jól ismert Fuji IX GP Extra a GC-től már elérhető por-folyadék formában is. A magas erősségű üvegionomer cement új generációs üveg töltőanyaggal nagyon magas transzlucenciát kölcsönöz a helyreállításnak. Az eredmény természetes esztétika, melyet korábban nem érhetett el a hagyományos üvegionomerekkel. Ld. 38. oldal.

GC everStick® termékcsalád



A GC everStick termékcsaláddal a különböző típusú parodontális sínek, gyökércsapok és hidak könnyen és gyorsan elkészíthetők. Az everStick üvegszálak használata minimál invazív kezelést foglal magában; ez azt jelenti, több különböző ellátási alternatíva nyílik meg a jövőben. A legfontosabb előny a páciensek számára a költséghatékonyság, szövetek megmentése és rövidebb kezelési idő összehasonlítva a fémkerámiákkal, kerámiákkal és implantológiai megoldásokkal. Ld. 31-34. oldal.

GC Fujivest® Platinum II



Az új GC Fujivest Platinum II-vel a GC újabb mérőföldkőhöz érkezett a koronák és hidak öntését illetően. Hosszú és kényelmes munkaidejével és továbbfejlesztett folyékonyságával a komplikált esetek öntése könnyebbé vált, mint valaha. A megnövelt expanziós tartományával ez az elsőrangú termék még sokoldalúbbá vált. A GC Fujivest Platinum II nemesfém-, fél-nemesfém-, és palládium alapú ötvözetekhez lett kifejlesztve. Ld. 74. oldal.

GC Fit Checker Advanced (Blue)



A Fit Checker sokéves tapasztalatára alapozva a GC most bemutatja a Fit Checker Advanced és Fit Checker Advanced Blue termékeket. A GC EXA'lence esetében is használt VPES technológián alapuló illeszkedés ellenőrző anyagok megtartják ugyanazokat a kedvelt tulajdonságokat, mint elődjük. Új jellegzetességei, mint a megnövelt keménység a könnyebb trimmelés és eltávolítás érdekében, speciális kék szín a kerámia anyagokon való könnyebb ellenőrzésre, olyan eszközzé teszi, melyet mindig szeretett volna a fiókjában tudni. Ld. 65. oldal.

GC Initial



10 éves piaci múltjára tekintve a GC Initial kerámia termékcsalád talán az egyik legváltozatosabb rendszernek nevezhető. Függetlenül a kihívásoktól, mellyel szembe kell néznie, az Initial a GC-től megoldást kínál mindenkinek - tanulóktól a mesterig, anélkül, hogy márkák vagy kerámia típusok között kellene váltogatnia. Ha nagyon gyorsan és gazdaságosan szeretne dolgozni, az Initial IQ, vagy Initial Classic termékcsaládot ajánljuk, az Initial Expert termékcsaláddal az élethű rétegezési séma alapján pedig mesterműveket alkothat végtelen számú lehetőségekkel. Ld. 79-89. oldal.

MINIMÁLINVAZÍV KEZELÉSI TERV

A kariológia fejlődésének következtében mára jobban megértettük a kariesz kialakulásának folyamatát. A GC magához ragadta a kezdeményezést, hogy ezt a filozófiát ültesse a mindennapi fogászati gyakorlatba. A GC szemlélete a Minimális Beavatkozás (MI) koncepcióján alapul, különös figyelmet fordítva a fogszerkezet természetes biológiai funkcióinak: a demineralizációnak és remineralizációnak kiegyensúlyozására.

MI Kezelési Tervével a GC a gyakorló fogorvosokat kívánja segíteni, hogy az MI alapelveit a mindennapi fogászati rutin során alkalmazhassák. A szisztematikus módszer, mely a kariológiát a mindennapi klinikai gyakorlatba bevezeti, az „Evidence Based Dentistry” legújabb elveivel is összhangban van. A GC célja, hogy a diagnosztizálás, megelőzés, valamint kezelés vagy ellenőrzés lépéseiből álló folyamatot a fogászat szerves részévé tegye, ezáltal javítsa a páciensei életminőségét.


Az MI kezelési tervvel a GC tömör és világos iránymutatást ad a gyakorló fogorvosoknak a minimálinvazív kezeléseket és tervezést illetően, számos klinikai példaeseten keresztül:

- Diagnózis
- Kezelési és visszahívási tervek
- A páciens eszközei és teendői
- Preventív és beavatkozást nem igénylő kezelések
- Atraumatikus és minimálinvazív helyreállító kezelések
- Kísérleti modellezés a pénzügyi és gyakorlati megvalósítás érdekében



TARTALOMJEGYZÉK			
Minimálinvazív fogászat			
Felismerés		Bevezetés	12
	Plakk teszt	GC Tri Plaque ID Gel	12
	Nyál teszt	GC Saliva-Check Buffer	13
		GC Saliva-Check Mutans	13
Megelőzés		Bevezetés	14
	Helyileg alkalmazható krém	GC Tooth Mousse	14
		GC MI Paste Plus	15
	Helyileg alkalmazható krém	GC Dry Mouth Gel	16
	Üvegionomer cement - hagyományos	GC Fuji Triage	16
Helyreállítás		Bevezetés	17
Visszahívás		Bevezetés	17

KEZELÉSI TERV - A KÖR FÁZISAI

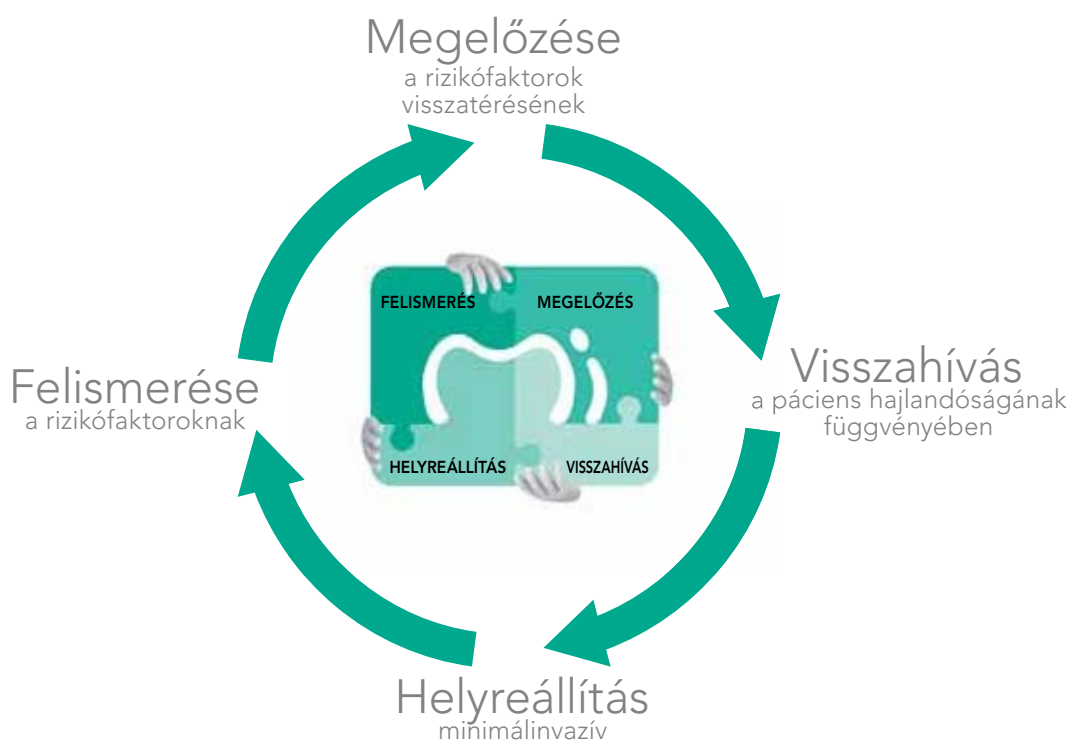

GC EUROPE

MI Felismerés

A páciens vizsgálatának nem csupán a fogakra, hanem a karieszrizikó tényezőire - mint pl. étrend, fogmosási szokások, a nyál mennyisége és pufferoló képessége, a nyálban található kariogén baktériumok mennyisége (pl. streptococcus mutans), vagy a plakk kariogenitása - is ki kell terjednie. A kariesz diagnosztizálásához és nyomon követéséhez a diagnózis felállításakor a zománcra észrevehető első klinikai jelekre kell szorítkozni. Ezek a korai jelek a barázdákban és a sima felszíneken klinikailag, interproximálisan pedig röntgen által azonosíthatók. Az olyan diagnosztikai eszközök alkalmazása, mint a GC Saliva-Check Mutans tesztkészlet, GC Tri Plaque ID Gel, GC Saliva-Check Buffer, nem csak a karieszrizikó felméréséhez alapvető információkhoz való hozzájutást segíti, hanem a páciens motiválásában is fontos szerepet játszik.



GC Tri Plaque ID Gel



Kariesz kockázatértékelés

Egy innovatív plakkfestő gél, mely azonosítja a friss, érett és savtermelő biofilmet.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Eszköz a páciens motiválására és oktatására, segít megérteni, hogyan alakulnak ki a léziók, és hogy lehet fenntartani egy egészséges orális környezetet
- Egy különleges gél, mely nem csak a plakk korát képes meghatározni, hanem a savképzését is
- A kariesz kockázatértékelés néhány percen belül leképezhető

HASZNÁLAT

Applikálja a GC Tri Plaque ID Gel-t a fogfelszínre egy arra alkalmas eszközzel (mikrokefe, vattacsomó vagy fogkefe)

Azonosítsa a plakkot és figyelje meg a gél színét.

- rózsaszín vagy piros: friss plakk
- kék vagy lila: érett plakk (legalább 48 órás)
- világoskék: érett és erősen savtermelő plakk

KISZERELÉS

GC Tri Plaque ID Gel	
004273	Tubus (40 g, 36 ml, körülbelül 130 applikációra elegendő)

GC Saliva-Check Buffer



Rendelőben alkalmazható teszt a nyál mennyiségének és minőségének kiértékelésére

A teszt a stimulálatlan és a stimulált nyál vizsgálatára egyaránt képes. A nyál e két formájának kiértékelésével kapható eredmények diagnosztikailag nagyon hasznosak, és segítik az orvos és páciens közötti kommunikációt.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Vizsgálja a nyugalmi nyál mennyiségét, viszkozitását és konzisztenciáját, ezzel információt szolgáltat páciense életviteléről
- Vizsgálja páciense nyugalmi nyálának pH-értékét, és felhívja a figyelmet a veszélyesen magas savszintre
- Vizsgálja a páciense által termelt stimulált nyál mennyiségét, mely segíthet a nyálmirigy-problémák felismerésében

- Vizsgálja a stimulált nyál pufferoló kapacitását (minőségét), mely megmutatja, hogy a nyál mennyire hatékony a savak közömbösítésében

HASZNÁLAT

A teszt a szokásos rutinvizsgálat részeként végezhető, az eredmények a megelőzés és a kezelés megbeszélésekor bemutatathatók.

KISZERELÉS

GC Saliva-Check Buffer	
720000	20 db teszt/doboz

GC Saliva-Check Mutans



Rendelőben alkalmazható teszt a magas Streptococcus Mutans-szint gyors kimutatására

A GC Saliva-Check Mutans egy speciális immunkromatografikus módszert használ, így nincs szükség inkubátorra vagy más berendezésekre. Mindössze 15 perc alatt pontos eredményt ad.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Rendelőben alkalmazható teszt, speciális felszerelés nem szükséges hozzá, csak egy stopperóra
- Eredmény mindössze 15 perc alatt
- 2 monoklonális antitest csak a S. mutans baktériumokra érzékeny, más baktériumfajokra nem
- Segít az alacsony nyáltermelésű, savas étrendet követő vagy alacsony szájjüregi pH-val rendelkező páciensek motiválásában, akik gyakran fogyasztanak szénhidrátot

KISZERELÉS

GC Saliva-Check Mutans	
004504	10 db teszt/doboz

MI Megelőzés

A kariesz továbbfejlődésének megelőzése lehetséges, amennyiben a páciens kész változtatni bizonyos szokásain. Szükség van az étrend és a fogmosási szokások optimalizálására, hogy a karieszprevenció hatékony legyen. A gyakorlatban az aktív megelőző kezelések célja a karieszrizikó minimalizálása és a remineralizáció előmozdítása. A professzionális, mechanikus fogtisztítás, az egészséges étrend és a remineralizációt elősegítő és a szájüregi flórát normalizáló termékek (Tooth Mousse vagy MI Paste Plus) alkalmazásának kombinációja nagyon hatékony módszer.



GC Tooth Mousse



Biológiailag hozzáférhető kalcium és foszfát

Cukormentes RECALDENT™ CPP-ACP tartalmú krém helyi alkalmazásra.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- RECALDENT™ Kazein-foszfopeptid - amorf kalcium-foszfát tartalmú
- Megakadályozza a zománc demineralizációját és elősegíti a remineralizációt
- A nyitott dentintubulusok eltömítésével csökkenti a túlérzékenységet
- Antikariogén tulajdonságainak köszönhetően megelőzi a kariesz kialakulását
- Visszafordítja a fehér folt léziókat
- Alacsony vagy közepes karieszrizikójú páciensek számára
- Fogszabályozó kezelés alatt és/vagy után
- Az érzékenység csökkentésére fogfehérítés előtt és után, valamint tisztítás vagy gyökérsimítás után
- Várandós kismamák és 6 év alatti gyermekek is alkalmazhatják

HASZNÁLAT

Először tisztítsa meg a fogakat. Ezután tiszta ujjával vagy vattapálcikával dörzsöljön szét egy kis mennyiségű anyagot a fogak felszínén, majd hagyja hatni 3-5 percig.

INDIKÁCIÓK

- Extra védelem biztosítása a fogak számára és segítség a savas támadások elleni küzdelemben

KISZERELÉSEK

GC Tooth Mousse (10 darabos csomag, 40 g, 35 ml tubusonként)	
003299	Vegyes, 2 darab ízenként (Dinnye, Eper, Tutti Frutti, Menta és Vanília)
003301	Eper
003300	Vanília
003304	Tutti Frutti
003303	Menta
003302	Dinnye

GC MI Paste Plus

Biológiaihoz hozzáférhető kalcium, foszfát és fluorid

Cukormentes, RECALDENT™ CPP-ACP és fluorid tartalmú remineralizáló krém helyi alkalmazásra.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- A GC Tooth Mousse minden előnye, 900 ppm egyedülálló, szabadalmaztatott formájú fluoriddal kiegészítve
- Pufferolja a plakk pH-jának változásait
- Gyengíti a Streptococcus mutans és Streptococcus sorbinus baktériumok szaporodóképességét és tapadását a fogfelszínhez
- Remineralizálja a zománclezíókat és ellenállóbbá teszi a remineralizált zománcot
- Optimalizálja a fluorid zománchoz történő eljutását és a zománc fluoridfelvételét

INDIKÁCIÓK

- Fogszabályozó kezelés alatt és/vagy után, különösen a fehér foltokra
- Közepes vagy magas karieszrizikóval rendelkező, vagy olyan pácienseknek, akiknek segítségére van szükségük a plakk-képződés kontrollálásában
- Savas szájüregi környezettel rendelkező, eróziótól vagy refluxtól szenvedő pácienseknek

KISZERELÉSEK

GC MI Paste Plus (10 darabos csomag, 40 g, 35 ml tubusonként)	
003310	Vegyes, 2 db ízenként (Dinnye, Eper, Tutti Frutti, Menta és Vanília)
003312	Eper,
003313	Dinnye
003314	Vanília
003315	Tutti Frutti
003311	Menta

A CPP-ACP az ausztráliai Melbourne-i Egyetem Fogorvostudományi Iskolájának fejlesztése. A RECALDENT™ engedéllyel használt védjegy. A RECALDENT™ (CPP-ACP) egy tejfehérje származék. Tejfehérjére és/vagy hidroxibenzoátra allergiás pácienseknél ne alkalmazza.

GC Dry Mouth Gel



Extra komfortérzet a szájszárazságban szenvedőknek

Semleges pH-jú zselé, melyet a szájszárazság tüneteinek csillapítására fejlesztettek ki. Hosszan tartó komfortérzetet biztosít és enyhülést hoz a szájszárazságban szenvedőknek.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Segít a szájszárazság enyhítésében és hosszú távú komfortérzetet biztosít
- Semleges pH-jú, a biztonságos zónában tartja a szájüregi pH-t a demineralizáció megelőzésére
- Hatása mintegy 4 órán át tart
- A tubus kis helyen is elfér, így szükség esetén bármikor azonnal használható
- 4 finom ízben kapható
- A fogsorviselők körében tapasztalható szájszárazság enyhítésére is ajánlott

HASZNÁLAT

Nyomjon ki a tubusból egy jókora adag zselét a tiszta ujjára. Dörzsölje be vele a fogak bukkális és lingvális felszíneit, valamint a nyálkahártyát.

KISZERELÉSEK

GC Dry Mouth Gel	
003222	Vegyes csomag 10 db, 4 Menta, 2 Málna, 2 Narancs, 2 Citrom
004618	GC Dry Mouth Gel csomag, 10 db, Málna

GC Fuji TRIAGE™



Radiopak üvegonomer felszíni védőanyag

GC Fuji TRIAGE egy magas fluoridleadású üvegonomer anyag barázdazárásra és a gyökérfelszín védelmére, a túlérzékenység megelőzésére, illetve használható ideiglenes tömésként például gyökérkezelés estén.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Nyálas felszín esetén is alkalmazható, akár nyálkahártyával (részben) fedett, frissen előtört molárisok kezelésére is
- Fehér és rózsaszín színekben kapható
- Kémiai kötés a fogszövethez, nincs szükség savazásra, bondozásra
- Könnyen applikálható, alacsony viszkozitású
- Önkötő, hagyományos üvegonomer rezintartalom nélkül
- A rózsaszín árnyalat kötése felgyorsítható fénypolimerizáló készülékkel, ezzel védhető a korai dehidráció ellen
- Az áttetsző rózsaszín árnyalat könnyen ellenőrizhető visszahívásnál
- Nagyon magas szintű fluoridleadás

INDIKÁCIÓK

- Barázdarendszer védelme
- Túlérzékenység megelőzése és kontrollálása
- Fognyaki védelem
- Ideiglenes tömés gyökérkezeléskor

HASZNÁLAT


Vékony rétegben vigye fel a fokozott kockázatnak kitett fogfelszínekre. A saválló ioncserélt réteg hozzáadott védelmet biztosít a fog számára.

KISZERELÉSEK

GC Fuji TRIAGE P/F (1-1 csomag, 15 g por, 10 g folyadék, 6 g Dentin Conditioner, tartozékok)	
003295	Rózsaszín
003296	Fehér
GC Fuji TRIAGE kapszula (50 kapszula/doboz, megkevert térfogat kapszulánként: 0.13 ml)	
003297	Rózsaszín
003298	Fehér
GC Fuji TRIAGE Tartozékok	
002559	Capsule Applier IV pisztoly, 1 db

MI Helyreállítás

A modern helyreállító anyagok, mint a GC EQUIA, a hagyományos helyreállító anyagokhoz (pl. amalgám vagy arany) képest kevesebb foganyag eltávolítását igénylik. A fog szerkezetéhez kötnek hozzá és kielégítik a páciens magas esztétikai igényeit. Az atraumatikus és minimálinvazív helyreállító kezelések megtartják a fogszerkezetet és meghosszabbítják a helyreállítások élettartamát. Az MI filozófia szerint más termékek, pl. a különböző magas viszkozitású GC Fuji IX GP üvegionomerek, GC Fuji II LC, GC Fuji Triage és a helyreállító kompozit anyagaink, mint a GC G-ænial, GC GRADIA Direct és GC Kalore is használhatók. Üvegionomer cementekről és helyreállító kompozitokról további információkat a Helyreállító Fogászat pontnál talál.

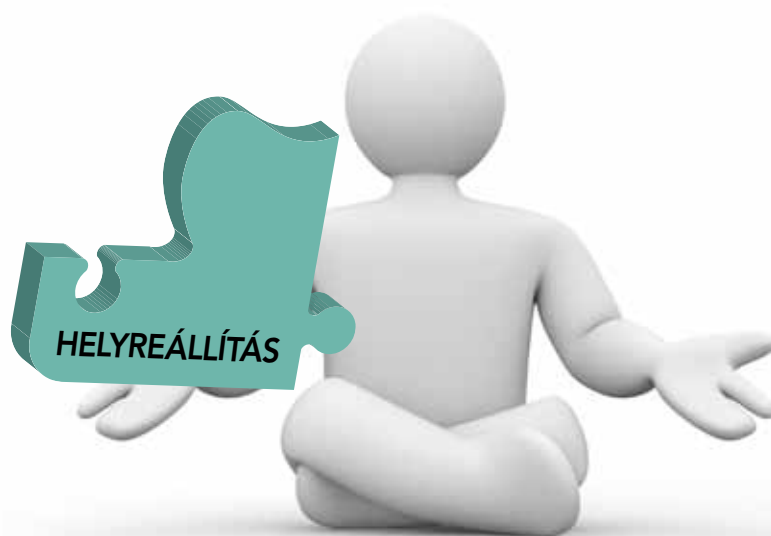

MI Visszahívás

A kariológiában a normál visszahívásos gyakorlatot (félévenkénti látogatás) már régóta alkalmazzák. A magas karieszrizikóval rendelkező páciensek számára ez túl ritka, az alacsony karieszrizikójúak számára pedig talán túlságosan gyakori. Most az MI kezelési terv révén személyre szabott visszahívási rendszert dolgozhat ki, az adott páciens karieszrizikójának leginkább megfelelő gyakorisággal.



A MEGFELELŐ TERMÉKEK AZ ÖN HELYREÁLLÍTÓ KEZELÉSEIHEZ...

A kisebb tökéletlenségek javításától a csúcsmínőségű többretegű helyreállításokig, a GC helyreállító kompozitjai gyönyörű eredményeket nyújtanak. Egy anterior vagy poszterior kompozitot keres, esetleg egy univerzális helyreállító anyagot? Jobban szeret folyékony anyaggal dolgozni, vagy esetleg a sűrűn folyó kompozitokat kedveli? A GC mindezeket biztosítja: a már bizonyított, könnyen kezelhető **GC GRADIA Direct** termékektől a csúcsmínőségű, felhasználóbarát, radiopak kompoziton, a **GC G-ænial**-on keresztül, a csúcstechnológiájú, alacsony zsugorodású, Du Pont monomer technológiával rendelkező univerzális kompozitig, a **GC Kalore**-ig. Mindegyik anyag természetes, életszerű színnel és tulajdonságokkal rendelkezik.

A helyreállító fogászat területén, az állandó fejlődés és innováció érdekében végzett kutatás eredményeként a GC büszkén mutatja be a **GC everX Posterior**-t. Az anyagban lévő üvegszálak jelenléte egyedi tulajdonságokat ad a helyreállításnak. Az üvegszálak elősegítik az anyagban/fog-struktúrában történő repedések megakadályozását, ezzel új lehetőségeket megnyitva a direkt fogászatban. A dentinéhez hasonló, más kompozitokhoz képest kétszeres repedésekkel szembeni keménységgel ez az anyag a tökéletes megerősítő szubstruktúra, különösen hasznos azokban az esetekben, ahol legnagyobb szükség van rá - a nagy kiterjedésű kavitások helyreállításánál.

Kompozitjaink tökéletes kiegészítői a hetedik generációs bondjaink, a **GC G-ænial Bond** és a **GC G-BOND**. Mindkét bond egykomponensű, egy rétegben felvihető kiváló bond-rendszer, mely erős, hosszan tartó kötést eredményez a fénypolimerizált kompozitok és a zománc vagy a dentin között.

Az everStick termékcsalád azért lett kifejlesztve, hogy megoldást adjon a modern, páciens-barát fogászatnak a direkt megerősített kompozit hidaktól az individualizált csapokig. Az everStick üvegszál megerősítések polimer rezin mátrixba ágyazott szilánizált üvegszál rostokból készültek. Köszönhetően egyedülálló ragaszthatóságuknak ezek a termékek a minimálinvazív fogászatot célozzák meg, ahol a páciens egészséges fogszöveteit olyan sokáig őrizhetjük meg, ameddig csak klinikailag lehetséges. Ez azt is jelenti, hogy további kezelési lehetőségek is lehetségesek lesznek, amennyiben a páciensnek bármikor a jövőben szüksége lenne rá.

Több mint 30 éves tudással és tapasztalattal az üvegeionomer technológia terén, a GC-t úgy ismerik, mint e terület európai vezetőjét. Az üvegeionomerek bizonyítottan a leg-sikeresebb klinikai ragasztórendszerek, így alapvetően szükségesek minden fogászati rendelőben. Minden klinikai helyzetre megtalálja a választ a hagyományos és műgyantával megerősített Fuji üvegeionomereink segítségével. A legutóbbi fejlesztésünk a forradalmi **GC EQUIA rendszer**, melyet 2007-ben mutattunk be. A fogorvosoknak többé nem kell nehéz döntéseket hozni, mert most először tökéletes egyensúlyban áll az esztétikum és a költséghatékonyság. Az üvegeionomer cementtel készített helyreállítások sosem voltak még ilyen esztétikusak, transzlucensek, nagy teljesítményűek és gazdaságosak.



TARTALOMJEGYZÉK				
Helyreállító fogászat				
Direkt helyreállítás - kompozit	Üvegszállal megerősített kompozit	GC everX Posterior	20	
		Alkalmazási területek	21	
	Anterior kompozit	GC G-ænial Anterior	22	
	Posterior kompozit	GC G-ænial Posterior	23	
	Helyreállítási kalauz	Helyreállítási kalauz	23	
	Univerzális kompozit	GC G-ænial Universal Flo	24	
		GC Kalore	25	
	Anterior és poszterior kompozit	GC GRADIA Direct	26	
	Folyékony kompozit	GC G-ænial Flo	27	
		GC GRADIA Direct Flo	27	
		GC GRADIA Direct LoFlo	27	
	Bondozás	GC G-ænial Bond	28	
		Lépésről lépésre	29	
		GC G-Bond	29	
Csonkfelépítés	Kompozit csonkfelépítés	GC GRADIA Core & Post	30	
		Lépésről lépésre	30	
	Üvegszálas csap	GC Fiber Post	31	
		GC everStick®POST	31	
Direkt, üvegszállal megerősített helyreállítás	Üvegszálas megerősítés	GC everStick®C&B	32	
		Lépésről lépésre	33	
		GC everStick®PERIO	34	
		GC everStick®ORTHO	34	
		GC everStick®NET	34	
		GC StickRESIN	35	
	Eszközök üvegszálas anyagokhoz	GC StickCARRIER	35	
		GC StickSTEPPER	35	
		Direkt helyreállítás - üvegeionomer	Továbbfejlesztett üvegeionomer cement	GC EQUIA
	Klinikai alkalmazás			37
Hagyományos üvegeionomer cement	GC Fuji IX GP Extra		38	
	GC Fuji IX GP - FAST		39	
Műgyantával megerősített üvegeionomer cement	GC Fuji II LC (Improved)		39	
	GC Fuji VIII GP		40	
Alábélelés	Műgyantával megerősített üvegeionomer cement	GC Fuji LINING LC Paste Pak	40	
		GC Fuji LINING LC	40	
Direkt helyreállítás - eszközök	Kondicionálás	GC Cavity Conditioner	41	
		GC Dentin Conditioner	41	
	Ideiglenes tömőanyag	GC Caviton	41	
	Lakkozás	GC G-Coat PLUS	42	
		GC DiaPolisher Paste	42	
	Finírozás és polírozás	GC New Metal Strips	43	
		GC Epitex	43	

GC EUROPE

GC everX Posterior

Üvegszállal megerősített kompozit a dentin helyettesítésére

A GC everX Posterior egy üvegszállal megerősített kompozit a dentin helyettesítésére, hagyományos kompozitokkal, mint például G-aenial Posterior-ral, mint zománc helyettesítővel együtt használva. A GC everX Posterior-ban lévő rövid üvegszálak tökéletessé teszik bármilyen nagy kiterjedésű kavitás kompozit tömésének megerősítő alapjaként. Az üvegszálak továbbá megakadályozzák a helyreállítás sikertelenségének fő okaként ismert repedések kialakulását, illetve továbbterjedését a töméseken keresztül. Köszönhetően egyedülálló tulajdonságainak, a GC everX Posterior új lehetőségeket nyit a nagy kiterjedésű kavitások helyreállítására a rendelőben, alternatívát adva a nagyméretű kavitások gazdaságos helyreállítása iránt felmerülő növekvő igényre.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Rövid üvegszálak megakadályozzák a repedések továbbterjedését a helyreállításban és a fogban
- Repedésekkel szembeni ellenállás egyenlő a dentinével, majdnem kétszerese bármely hagyományos kompoziténak - ezzel felülmúlhatatlan erőt ad a helyreállításnak
- Minimális vízszintes zsugorodás, mivel az üvegszálak szálirányukban csökkentik a zsugorodás mértékét
- 4-5 mm tömőanyag fénykezelhető egyszerre
- Megbízható kötés a fedő kompozithoz és a fogstruktúrához egyaránt

INDIKÁCIÓK

Direkt kompozit helyreállítások megerősítésére, főleg nagy kiterjedésű posterior kavitások esetén:

- Olyan kavitásoknál, ahol legalább 3 felszint kell helyreállítani
- Kavitásoknál hiányzó csücskökkel
- Mély kavitásoknál (beleértve I. és II. osztályú gyökerkezelt fogakat)
- Amalgám tömések cseréjekor (mivel az amalgám behelyezése gyakran repedések képződéséhez és csücskök töréséhez vezet)
- Kavitások, ahol onlay vagy inlay alkalmazása lenne javasolt


KISZERELÉSEK

GC everX Posterior Unitip (0.13 ml)	
005118	Univerzális szín (transzprens) 15 unitip patron dobozban
005274	Univerzális szín (transzprens) 50 unitip patron dobozban

MEGJEGYZÉS:

- A GC everX Posterior-t a megfelelő kopásállóság érdekében mindig be kell fedni fényre keményedő univerzális helyreállító kompozittal.

Lépésről lépésre - everX Posterior

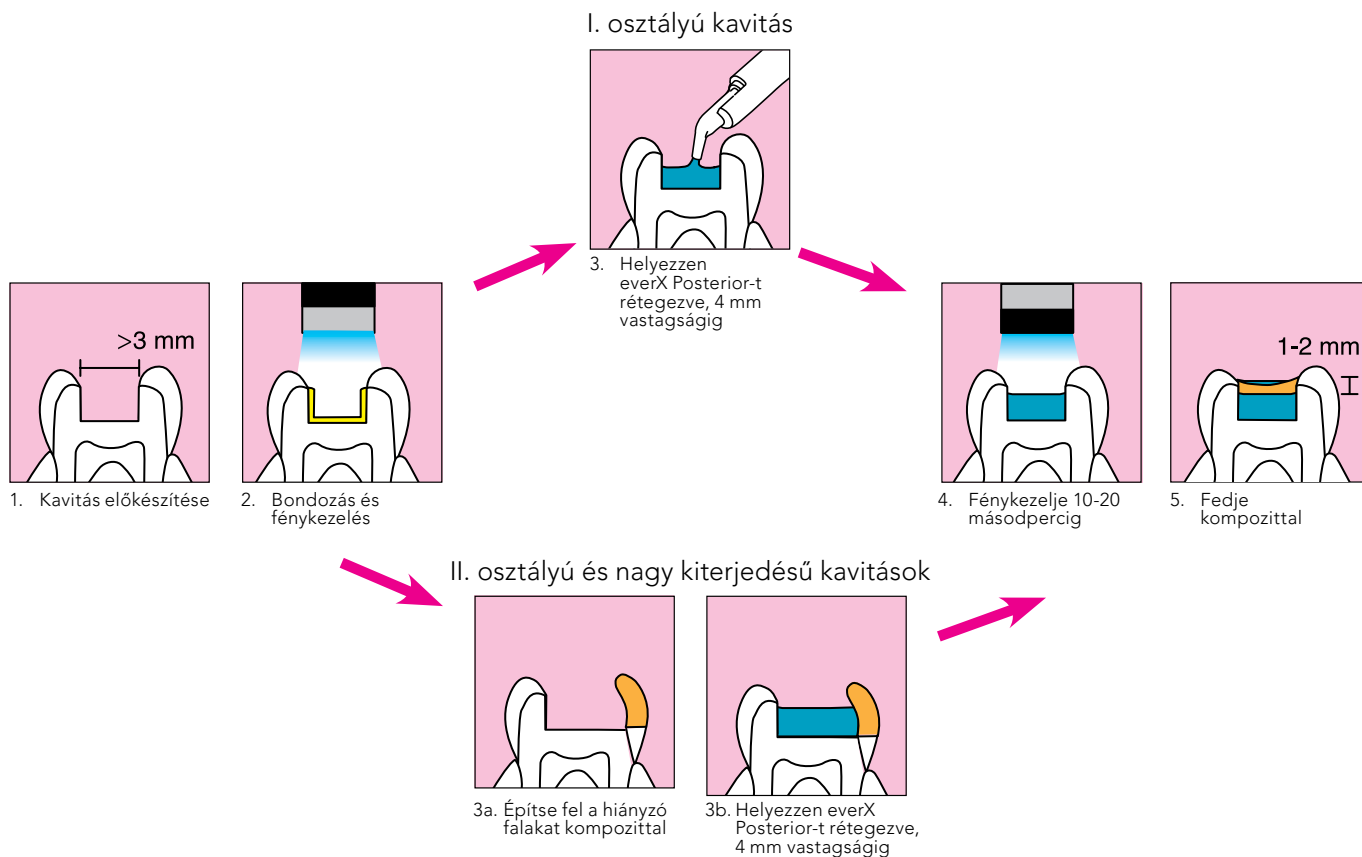

Klinikai esetek everX Posterior

1. Nagy kiterjedésű helyreállítások megerősítése olyan kavitások esetén, ahol inlay vagy onlay lenne javasolt, gyökérkezelt fogak esetén

Dr. Y. Marinova, Bulgária



1. Sérült kompozit helyreállítás



2. Kavitás előkészítése



3. Hiányzó falak felépítése G-aenial Posterior használatával



4. everX Posterior applikálása



5. Kész helyreállítás a végső fedő réteg (G-aenial Posterior) felhelyezése után

2. Amalgám helyreállítások cseréje, főleg hiányzó csücskökkel

Pr M. Peumans, Belgium



1. Sérült amalgám helyreállítás



2. Kavitás előkészítése



3. Hiányzó falak felépítése kompozittal



4. everX Posterior applikálása



5. Kész helyreállítás a végső kompozit réteg felhelyezése után

GC G-aenial Anterior

Fényre keményedő anterior kompozit helyreállító anyag

A GC G-aenial Anterior a megfelelő választás, ha olyan helyreállító anyagot keres, mely minden páciense esztétikai elvárásainak megfelel - legtöbb esetben csupán egyetlen színnel. Egy kompozit, mely gyönyörű és természetes kinézetű, magas fényű helyreállítást tesz lehetővé, mindemellett különösen könnyen kezelhető, alkalmassá teszi a mindennapi használatra. A GC G-aenial Anterior több munkaidőt is ad, így szabadon formázhatja, hogy az ideális anatómikus formát és esztétikát könnyen elérhesse.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- A G-aenial Anterior minden applikációs technikához megfelel: az egyszínű szépségtől a többszínű rétegezéssel megnyíló ezernyi esztétikai lehetőségig
- Egyedi összetétele belső visszatükröződéssel pontosan reprodukálja a természetes fogét a tökéletes esztétika érdekében - csupán egyetlen színnel
- Minden esztétikai követelménynek eleget tesz, a G-aenial Anterior elérhető 22 színben 3 különböző opacitással:
 - Zománc (Külső)
 - Dentin (Standard)
 - Opak Dentin (Belső)
 - Könnyű zománc szín választás a páciens kora alapján
 - Kényelmesen kezelhető: sima, nem ragadós viszkozitás, akár ecsettel is alakítható
- Stressz mentes munka a többrétegű helyreállításokon: a munkaidő körülbelül 4 perc

- Gyorsan és egyszerűen sima, fényes felszínre polírozható
- Esztétikus és radiopak: egyedi, szabadalmaztatott Nagy Sűrűségű Radiopak (HDR) technológia a könnyű röntgennel történő követhetőségért

HASZNÁLAT

Kor-alapú színrendszer zománc pótlásához:

- Junior Enamel (JE) a fiatal páciensek számára
- Adult Enamel (AE) a felnőtt páciensek számára
- Senior Enamel (SE) az idősebb páciensek számára

A készletekkel és az utántöltőkkel kapcsolatos további információkat keresse a termék prospektusában, vagy honlapunkon <http://www.gceurope.com>

KISZERELÉSEK

GC G-aenial Anterior fecskendő (2.7 ml/4.7 g)					
003909	Quick Start készlet (7 fecskendő - A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE)				
900538	Advanced készlet (7 fecskendő - A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)				
Utántöltő: 1 fecskendő					
004678	A1	004697	XBW	004691	JE
004679	A2	004677	BW	004692	AE
004680	A3	004685	C3	004695	SE
004681	A3.5	004686	CV	004696	CVE
004682	A4	004687	CVD	004694	IE
004698	B1	004688	AO2	004693	TE
004683	B2	004689	AO3		
004684	B3	004690	AO4		
GC G-aenial Anterior Unitip patron (0.16 ml/0.28 g)					
003908	Quick Start készlet (35 db Unitip patron - 5 each of A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE and 1 Fogszinkulcs)				
900539	Advanced készlet (35 db Unitip patron - 5 each of A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)				
Utántöltő: 20 db unitip patron					
004649	A1	004652	A3.5	004655	AE
004650	A2	004654	CV	004656	IE
004651	A3	004653	AO3		
Utántöltő: 10 db unitip patron					
004657	BW	004662	CVD	004666	TE
004658	A4	004661	C3	004667	SE
004670	B1	004663	AO2	004668	CVE
004659	B2	004664	AO4	004669	XBW
004660	B3	004665	JE		
GC G-aenial Anterior tartozékok					
004648	Fogszinkulcs, 1 db				
900498	GC Unitip patron adagoló II, 1 db				

GC G-ænial Posterior



Fényre keményedő posterior kompozit helyreállító anyag

A GC G-ænial Posterior nagyobb töltőanyag sűrűséggel rendelkezik, amely szilárdabb konzisztenciát kölcsönöz és jobb kontrollálhatóságot az anatómiai formák alakításakor a posterior helyreállításoknál. A tömöríthető anyag még nedves és folyékony, mikor elkezdjük a manipulálását, így biztosítja a tökéletes kitöltést, még a legmélyebb kavitások esetén is. Az egyedülálló keverék úgy van megalkotva, hogy erős legyen és alacsony zsugorodási stresszel bírjon.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kiváló esztétika egyetlen színnel
- Adaptál színrendszer 4 standard és 2 outside színnel a bonyolultabb technikát igénylő esetekre
- Megfelelő, 252%-os radiopacitás segíti az utánkövetést
- Nem ragadós, jól tömöríthető viszkozitás a kontúrozás nagyobb kontrollálhatósága és anatómiai formák felépítése érdekében
- Magas törési szilárdság és csökkentett zsugorodási stressz a hosszan tartó helyreállításokért

- Könnyen és gyorsan polírozható sima és csillogó felszínre


HASZNÁLAT

II. osztályú kavitások esetén ajánlott először az approximális falat felépíteni egy zománc- vagy standard színnel. Miután a kavitás I. osztályúvá vált, a szokásos módon folytathatjuk a helyreállítás hátralévő részének felépítését, először a csücsök dentin részének applikálásával, majd folytatva a zománcot helyettesítő réteggel.

KISZERELÉSEK

GC G-ænial Posterior fecskendő (2.7 ml/5.5 g)					
Utántöltő: 1 fecskendő					
004699	P-A1	004701	P-A3	004703	P-JE
004700	P-A2	004702	P-A3.5	004704	P-IE
GC G-ænial Posterior Unitip patron (0.16 ml/0.33 g)					
Utántöltő: 20 db unitip patron					
004671	P-A1	004673	P-A3	004675	P-JE
004672	P-A2	004674	P-A3.5	004676	P-IE
GC G-ænial Posterior tartozékok					
004648	Fogsínkulcs, 1 db				
900498	GC Unitip patron adagoló II, 1 db				

Konfigurátor

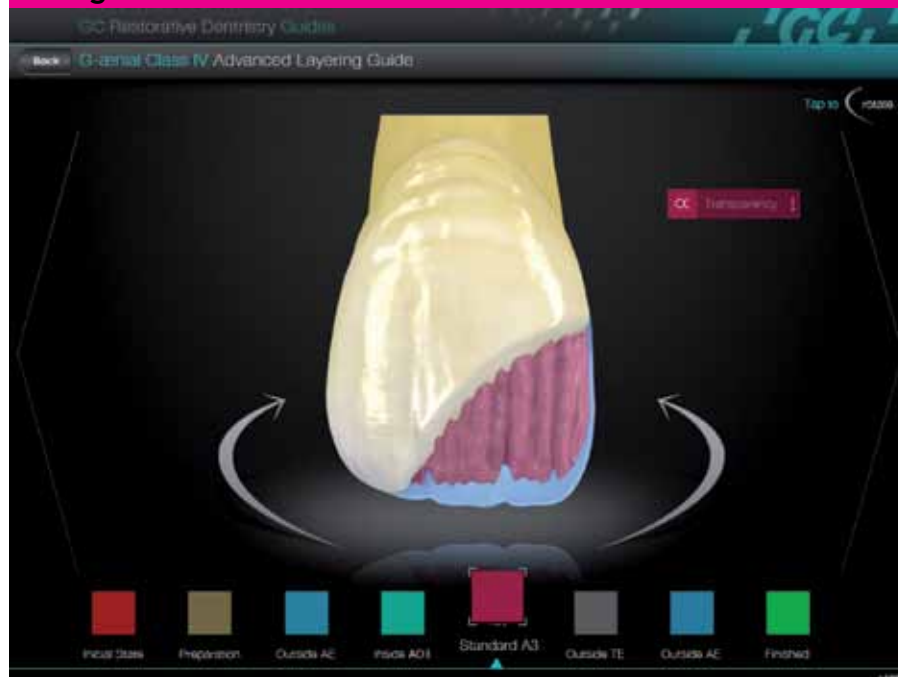

Fejlessze képességeit a GC Konfigurátoraival.

Annak érdekében, hogy optimális eredményt érhesen el helyreállító anyagainkkal, kifejlesztettünk egy átfogó 3D eszközt, amely segítséget nyújt:

- Megfelelő szín kiválasztásában
- Különböző bondozási technikákban
- A különböző színű kompozit helyreállító anyagok használatában és applikálásában

Elérhető  rendszeren keresztül



GC G-ænial Universal Flo

Nagy viszkozitású, fényre keményedő, folyékony univerzális kompozit

A GC G-ænial Universal Flo számos intelligens és kényelmes megoldást nyújt, melyek azon néhány folyékony kompozit közé emelik, melyekben a folyékonyág igazi Univerzális használhatósággal egyesül. A GC G-ænial Universal Flo az injektálható viszkozitás exkluzív kombinációját nyújtja Önnek a könnyű és kényelmes behelyezés érdekében akár mély kavitások esetén is, kimagasló fizikai tulajdonságokkal kombinálva a biztonságos és tartós helyreállításokért. A GC G-ænial Universal Flo válasz mindazokra a nehéz esetekre, ahol nem akar kompromisszumot kötni a tökéletes behelyezés, esztétika és erő között.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Teljes erő: magas fizikai tulajdonságok a helyreállítások tartósságának érdekében minden indikációban
- Kiváló kopásállóság, amely még az általános kompozitokénál is jobb az okkluzális és cervikális felszíneken való optimális használat érdekében
- Figyelmesen kiegyensúlyozott viszkozitás: egyenletesen folyó a könnyű behelyezésért, ugyanakkor erősen tixotróp, hogy megtartsa alakját
- Nagyon magas fényességi szint és fényesség-megtartási arány
- Önpolírozó anyagnak is tekinthető
- Kiváló, láthatatlan esztétikum, kompromisszumok nélkül
- 15 szín és 3 különböző szintű transzlucencia széles választéka

- Speciálisan tervezett fecskendő, mely ergonomikus megoldást nyújt a jobb applikálás érdekében

INDIKÁCIÓK


- I., II., III., IV., V. osztályú direkt helyreállítás
- Sínezés
- Minimál invazív helyreállítás

KISZERELÉSEK

GC G-æniál Universal Flo (2 ml/3.4 g fecskendõnként)					
Utántöltõ: 1 fecskendõ, 20 db adagoló kanûl (mûanyag)					
004619	A1	004630	BW	004631	CV
004620	A2	004624	B1	004628	AO2
004621	A3	004625	B2	004629	AO3
004622	A3.5	004626	B3	004632	JE
004623	A4	004627	C3	004633	AE
GC G-æniál Universal Flo kellékek					
004634	30 db adagoló kanûl (mûanyag)				
004635	30 db adagoló kanûl (fém)				



Direkt I, II, III, IV, V osztály

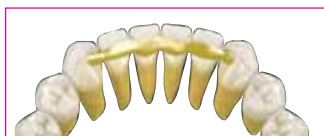

Sínezés



Minimálisan invazív kavitás

GC Kalore

Fényre keményedő univerzális kompozit helyreállító anyag

A DuPont® legjobb ipari monomer innovációjának felhasználásával a GC Kalore zsugorodási stressze egyedülállóan alacsony. Ez mikroszkopikus szinten azt jelenti, hogy a polimerizáció alatt és után is fennmarad a töltőanyag és a rezin mátrix közötti adhézió. A minimalizált zsugorodási stressz biztosítja a helyreállítás integritását, különösen a széleknél. Kiváló esztétikummal kombinálva a Kalore egy forradalmi teljes csomagot nyújt a helyreállító fogászatban.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Alacsonyabb zsugorodási stressz a DuPont új monomertechnológiájának köszönhetően, melyhez kizárólag a GC rendelkezik engedéllyel
- A GC szabadalmaztatott HDR (Nagy Sűrűségű Radiopak) előpolimerizált töltőanyagai magas kopásállóságot biztosítanak
- A töltőanyag és a mátrix közti szabadalmaztatott illeszkedési felület biztosítja az Ön helyreállításainak tartósságát
- Kiváló kezelhetőség és gondtalan polírozás
- Kiváló esztétikum egy-, vagy többszínű helyreállítások esetén

INDIKÁCIÓK

Univerzális anyag minden indikációra: I., II., III., IV. és V. osztályú helyreállítás.

A készletekkel és az utántöltőkkel kapcsolatos további információkat keresse a termék prospektusában vagy honlapunkon: <http://www.gceurope.com>

KISZERELÉSEK

GC Kalore fecskendő (2 ml/4 g)					
003625	Próbakészlet (3 db fecskendő - A2, A3, A3.5)				
Utántöltő: 1 db fecskendő					
003572	AO2	003596	GT	003584	B3
003573	AO3	003597	CVT	003585	C2
003574	AO4	003577	A1	003586	C3
003575	OBW	003578	A2	003587	D2
003576	OXBW	003579	A3	003588	CV
003592	WT	003580	A3.5	003589	CVD
003593	DT	003581	A4	003590	BW
003594	CT	003582	B1	003591	XBW
003595	NT	003583	B2		
GC Kalore Unitip (0.16 ml/0.3 g)					
003570	Próbakészlet (50 db unitip - 20x A2, 20x A3, 10x A3.5)				
Utántöltő: 20 db unitip patron					
003613	A1	003617	A4	003621	C2
003614	A2	003618	B1	003622	C3
003615	A3	003619	B2	003623	D2
003616	A3.5	003620	B3		
Utántöltő: 10 db unitip patron					
003606	XBW	003599	AO3	003608	DT
003605	BW	003600	AO4	003609	CT
003603	CV	003601	OBW	003610	NT
003604	CVD	003602	OXBW	003611	GT
003598	AO2	003607	WT	003612	CVT
GC Kalore tartozékok					
003571	Fogszínkulcs, 1 db				
900498	GC Unitip patron adagoló II, 1 db				

GC GRADIA Direct

Fényre keményedő anterior és poszterior kompozit helyreállító anyag

A GC GRADIA Direct helyreállító anyag egymagában képes minden rendelőben felmerülő esztétikai igényt kielégíteni. Akár egyszínes, akár egyéni rétegezési eljárást alkalmaz, a GC GRADIA Direct könnyedén és gyorsan teszi lehetővé a kimagaslóan természetes megjelenésű és tartós helyreállítások készítését. Egyetlen színárnyalat használatával is kiváló eredmény érhető el, mivel a színek tökéletesen illeszkednek a környező fogak színvilágához. A színárnyalatok kombinálása művészi megjelenést tesz lehetővé, anterior fogak esetén maximum 3, poszterior fogak esetén maximum 2 színárnyalat használatával.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Mikrotöltésű rezin hibrid kompozit
- Egy minden igényt kielégítő helyreállító rendszer
- Egyedülálló irányzat, mely Standard, Outside Special és Inside Special színeket tartalmaz, melyekkel láthatatlan helyreállításokat készíthet
- Hosszabb munkaidő, mivel kevésbé érzékeny az operációs lámpa fényére
- Jól kiegyensúlyozott viszkozitásának köszönhető kiváló alkalmazhatóság

GC GRADIA DIRECT ANTERIOR

- Kiváló esztétikum és sima felszín
- Tökéletes illeszkedés a természetes fog színéhez

GC GRADIA DIRECT POSTERIOR

- Kiváló fizikai tulajdonságok
- Magas törési szilárdságával ellenáll az okkluzális terhelésnek
- Radiopak a könnyű felismerhetőségért

HASZNÁLAT

Standard színek: kaméleon-effektussal anterior és poszterior helyreállításokhoz.
Outside Special: áttetsző színek anterior és poszterior helyreállításokhoz.
Inside Special: opak színek csak anterior helyreállításokhoz.

A készletekkel és az utántöltőkkel kapcsolatos további információkat keresse a termék prospektusában vagy honlapunkon: <http://www.gceurope.com>

KISZERELÉSEK

GC GRADIA Direct fecskendő (Anterior - 2.7 ml/4 g Posterior - 2.7 ml/4.7 g X - 2.7 ml/5 g)					
003332	Bevezető készlet (7 fecskendő - A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 db szinkulcs)				
Utántöltő: 1 fecskendő					
003387	XBW	003371	CVD	003424	P-A3
003361	BW	003372	AO2	003425	P-A3.5
003362	A1	003373	AO3	003426	P-WT
003363	A2	003374	AO4	003427	P-NT
003364	A3	003375	WT	003403	X-A1
003365	A3.5	003376	DT	003404	X-A2
003366	A4	003377	CT	003405	X-A3
003388	B1	003378	NT	003406	X-A3.5
003367	B2	003379	GT	003409	X-AO2
003368	B3	003380	CVT	003407	X-WT
003369	C3	003422	P-A1		
003370	CV	003423	P-A2		
GC GRADIA Direct Unitip patron (Anterior - 0.16 ml/ 0.24 g Posterior - 0.16 ml/0.28 g X - 0.16 ml/0.30 g)					
003331	Bevezető készlet (35 unitip patron - A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 db fogszinkulcs)				
Utántöltő: 20 db unitip patron					
003333	A1	003340	NT	003360	P-NT
003334	A2	003355	P-A1	003390	X-A1
003335	A3	003356	P-A2	003391	X-A2
003336	A3.5	003357	P-A3	003392	X-A3
003338	CV	003358	P-A3.5	003393	X-A3.5
003339	DT	003359	P-WT	003394	X-WT
003337	AO3				
Utántöltő: 10 db unitip patron					
003342	A4	003347	AO2	003350	CT
003354	B1	003348	AO4	003349	WT
003343	B2	003346	CVD	003351	GT
003344	B3	003341	BW	003352	CVT
003345	C3	003353	XBW	003396	X-AO2
GC GRADIA Direct kiegészítők					
003389	Fogszinkulcs, 1 db				
900498	GC Unitip patron adagoló II, 1 db				

GC G-ænial Flo



Fényre keményedő radiopak folyékony kompozit

A GC G-ænial Flo egy könnyen használható folyékony kompozit. Tökéletes adaptálhatóságának és erős radiopak tulajdonságának köszönhetően a GC G-ænial Flo tökéletesen alkalmazható linerként vagy az alámenős részek blokkolására, esetleg alagút-preparáció vagy kisebb defektusok helyreállítása esetén.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Magas nedvesíthetőség, mely lehetővé teszi a tökéletes adaptációt a kavitás falaihoz, elkerülve a légbuborékok kialakulását
- 230 % röntgenárnyék, mely lehetővé teszi a röntgennel történő követést
- Kiegyensúlyozott fizikai tulajdonságok, melyek tökéletesen megfelelnek a termék indikációinak
- 8 színben és 2 opak színben érhető el

KISZERELÉSEK

GC G-ænial Flo (2 ml/3.8 g fecskendőnként)				
Utántöltő: 1 fecskendő, 20 db adagoló kanül (műanyag)				
004636	A1	004638	A3	004640
004637	A2	004639	A3.5	004643
004641	AO2	004642	AO3	
GC G-ænial Flo kellékek				
004634	30 db adagoló kanül (műanyag)			
004635	30 db adagoló kanül (fém)			

GC GRADIA Direct Flo



Fényre keményedő, folyékony hibrid kompozit

A GC GRADIA Direct Flo egy fényre keményedő, folyékony, radiopak hibrid rezin, mely a GC GRADIA Direct-tel történő alkalmazásra lett kifejlesztve. Kedvező fizikai tulajdonságainak, valamint a fecskendőből történő közvetlen alkalmazásához megfelelő folyékonyságának köszönhetően ideálisan alkalmazható linerként kompozit helyreállítások alatt.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- A GC GRADIA Direct Flo nem túl folyékony és nem ragadós formulájának köszönhetően könnyen alkalmazható, a kavitás falai könnyen kialakíthatóak
- Fénykezelhető és radiopak, mely megkönnyíti a diagnózist
- A fecskendő kiváló tervezése miatt könnyen és precízen adagolható

KISZERELÉSEK

GC GRADIA Direct Flo (1.5 g/0.8 ml fecskendőnként)				
Utántöltő: 2 fecskendő, 4 db adagoló kanül (fém)				
003441	A1	003444	A3.5	003447
003442	A2	003445	AO3	
003443	A3	003446	CV	
GC GRADIA Direct Flo kellékek				
001926	20 db adagoló kanül (fém)			
001927	20 db adagoló kanül (műanyag)			

GC GRADIA Direct LoFlo



Magas viszkozitású, fényre keményedő, folyékony hibrid kompozit

A GC GRADIA Direct LoFlo az első folyékony igazi helyreállító anyag, mely nem csak az V. osztályú kavitásoknál illetve linerként alkalmazható, hanem I., II. és III. osztályú kavitások helyreállításakor is. A GC a HDR (Nagy sűrűségű, Radiopak) technológia bevezetésével felülmúlhatatlan fizikai tulajdonságokkal bíró, folyékony helyreállító anyagot kínál.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Nedvesíthetősége tökéletes adaptálhatóságot nyújt, megfolyás nélkül
- Kopásállósága és törési szilárdsága a modern poszterior kompozitok szintjén
- 55%-kal kisebb a zsugorodása, mint a piacvezető folyékony kompozit
- A HDR előpolimerizált töltőanyag a nanoszilikát töltőanyag-technológiával jelentősen megnöveli a tartósságot, polírozhatóságot és a radiopacitást
- Fluoro-alumínium-szilikát üveggel való keverése extra védelmet nyújt a másodlagos szuvasodással szemben

GC G-ænial Bond

Egykomponensű, önsavazó, fényre keményedő adhezív

A GC G-ænial Bond magas erősségű és biztonságos kötést biztosít a zománchoz és dentinhez egyaránt, függetlenül a használt technikától. A GC G-ænial Bond segítségével egy önsavazó adhezív egyszerűségét és csökkentet posztoperatív érzékenységet, valamint nagyobb kötési erőt kap, amennyiben a 10 másodperces szelektív savazást választja zománcon. A foszfát észter monomer megnövelt szintje optimalizálja a savazást és javítja a hibrid réteg minőségét. Az így létrejött nano-interakciós zóna és a HEMA-mentes formula együtt kulcsfontosságú a kötés ereje és tartóssága érdekében.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Alkalmazható önsavazó adhezívként vagy szelektíven savazhatja a zománcot - válassza az Önnek leginkább alkalmas eljárást az adott esethez
- Kiválóbb bond erősség a zománchoz és dentinhez köszönhetően a kémiai és mikro-mechanikai adhézio kombinációjának
- Hosszan tartó bond erősség köszönhetően a HEMA-mentes formulának
- Kiváló marginális integritás
- Nincsen poszt-operatív érzékenység, függetlenül a használt technikától és kompozittól
- Független tesztek során klinikailag bizonyított
- Egyszerű és rövid munkamenet

HASZNÁLAT

Applikálja és hagyja az adhezív réteget érintetlenül 10 másodpercig. Szárítsa le alaposan 5 másodpercig MAXIMÁLIS légnyomással és fénypolimerizálja 10 másodpercig. Szelektív savazásos megközelítés esetén alkalmazzon 35-40%-os foszforsavat a zománcon 10 másodpercre a bondanyag applikálása előtt. Majd folytassa a fent leírt lépésekkel.

KISZERELÉSEK

GC G-ænial Bond	
004644	Kezdő készlet (1 x 5 ml folyadék, 50 db eldobható applikátor (finom), 20 x eldobható adagoló tálca)
004645	3-as utántöltő csomag (3 x 5 ml folyadék)
004646	Utántöltő (1 x 5 ml folyadék)

Lépésről lépésre

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen!

A G-ænial Bond önsavazásos megközelítés esetén



1. Applikálja a G-ænial Bond-ot



2. Várjon 10 másodpercig



3. Maximum légnyomással szárítsa le 5 másodpercig



4. Fénypolimerizálja 10 másodpercig

A GC G-ænial Bond szelektív savazásos megközelítés esetén



1. Savazza a zománcot 10 másodpercig



2. Öblítse le



3. Szárítsa le



4. Applikáljon G-ænial Bondot és folytassa a fent leírt lépésekkel

GC G-Bond



Egykomponensű, önsavazó, fényre keményedő bondanyag

A GC G-Bond egy korszerű, önsavazó, könnyen használható, fényre keményedő adhezív, mely egyesíti a kémiai és mechanikai kötés elveit. A két funkcionális monomer, a 4-MET és a foszforsav-észter nano-töltőanyaggal kombinálva egy egyedülálló és stabil felszínt hoz létre a dentinen: a Nano Kölcsönhatási Zónát (NKZ), mely ugyanakkor a zománchoz is megbízható kötőerőt nyújt.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Az enyhe savazásának köszönhetően az utóérzékenység kockázata alacsony
- A két különböző funkcionális monomer jelenléte kémiai kötést hoz létre a zománcal és a dentinnel
- Bizonyítottan hosszú távú klinikai teljesítmény
- Egykomponensű rendszer egyszerűsített alkalmazási technikával, mellyel időt takaríthat meg - 30 másodperces eljárás
- Könnyű használat, kevésbé érzékeny a dentin nedvességére
- HEMA-mentes a tartós kötés érdekében

KISZERELÉSEK

GC G-Bond	
003416	Kezdő készlet, üveges (5 ml folyadék, 50 db eldobható applikátor & 1 db adagoló tálca)
003417	Kezdő készlet, Unit Dose (50 x 0.1 ml unit & 50 db eldobható applikátor)

GC GRADIA Core

Estétikus csomkfelépítő és gyökércsap beragasztó kompozit

A GC GRADIA Core és a GC Fiber Post intelligens rendszerével most tartós helyreállításokat biztosíthatnak pácienseik számára, melyek még gyengédebbek és kímélőbbek a megmaradt fogszerkezethez. A GC GRADIA Core egyesíti a ragasztást és a csomkfelépítést egyetlen termékben, ezzel egyszerűbbé téve életét. Az önsavazó, kettős kötési ragasztórendszer egyszerű, egy lépéses applikációt alkalmaz. A finírozási fázis már a csomkfelépítő applikálását követően öt perccel megkezdhető.



KISZERELÉSEK

GC GRADIA Core	
900515	Teljes rendszer (1 GC GRADIA Core készlet, 1 GC Fiber Post vegyes készlet, 1 GC Ceramic Primer)
900514	Bevezető készlet (1 GRADIA Core készlet, 1 GC GRADIA Core patronadagoló, 1 GC Ceramic Primer)
003651	GC GRADIA Core készlet (1 GC GRADIA Core patron 10 ml (20 g), 1 SE Bond folyadék A 3 ml, 1 SE Bond folyadék B 1.5 ml, 25 Micro-Tip applikátor, 1 Applikátor tartó, 1 Adagoló tálca, 20 GC Automix Endo csőr, 20 Hosszabbító csőr)
003652	Patron utántöltő (1 GC GRADIA Core patron 10 ml (20 g), 20 GC Automix Endo csőr, 20 Hosszabbító csőr)
003653	GC GRADIA Core SE Bond folyadék A utántöltő, 3 ml
003654	GC GRADIA Core SE Bond folyadék B utántöltő, 1.5 ml
GC GRADIA Core tartozékok	
900511	GC GRADIA Core patronadagoló, 1 db
004846	GC Ceramic Primer (2 x 2 ml folyadék)
900495	Automix Endo csőr, 10 db Automix Endo csőr, 10 db Hosszabbító csőr

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Minimális preparálás szükséges a kevesebb lépésben elérhető, kiváló adhézió tulajdonságoknak köszönhetően
- Ragasztás és csomkfelépítés egyetlen anyaggal
- Kettős kötési és kontakt kötési nagy
- kötési erő biztosítására
- Kidolgozás közben a dentinéhez hasonló érzet
- Minimális stressz a megmaradt fogszerkezeten és magas hajlítási szilárdság, valamint alacsony zsugorodási stressz
- Röntgenárnyéka erősebb, mint a dentiné


Lépésről lépésre



1. Készítse elő a csap helyét



2. Próbálja be a csapot

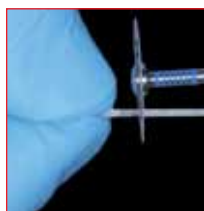


3. Vágja le a csapot a kívánt hosszúságúra



4. Kezelje a csapot szilánzó anyaggal, pl. GC Ceramic Primer-rel



5. Öblítse és szárítsa levegővel és papír csúccsal

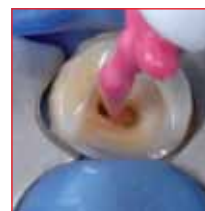

6. Kezelje a bondozni kívánt felületet GC GRADIA Core ÖNSAVAZÓ BOND DAL



7. Szárítsa közepes levegő nyomással 10 másodpercig. Fénykezelje 10 másodpercig.



8. Adagolja ki a GC GRADIA Core-t a csap helyébe




9. Helyezze be a csapot. Fénykezelje 5 másodpercig.



10. Építse fel GC GRADIA Core-ral.



11. Fénykezeljen minden felületet 10 másodpercig

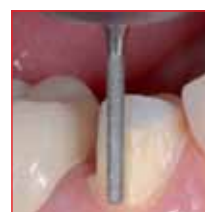

12. Hagyja magától kötni 5 percig, amennyiben a fény nem éri el az anyagot. Ezután kezdje el a formázást.

GC Fiber Post



Üveg Fibre Post

A GC Fiber Post segítségével minimálisan invazív csap-felépítéssel helyreállítást kínálhat pácienseinek. A GC Fiber Post széles méretválasztéka lehetővé teszi a csatorna kíméletes, konzerváló előkészítését. A GC Fiber Post csapok speciálisan kialakított formái optimális adhézión felületet adnak a GC GRADIA Core-hoz.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Minimális gyökércsatorna tágítás, kisebb átmérőjű csapok
- Egyedülálló fényáteresztés, mely biztosítja a paszta fénypolimerizálhatóságát, még a mély csatornában is
- Magas üvegszál-tartalom (77% tömeg) felszíni defektusok nélkül, ezzel biztosítva a nagy nyomásellenállást
- Fémnél alacsonyabb elaszticitási modulus a jobb feszültségkiegyenlítés érdekében
- Fémhez hasonló, magas hajlítási szilárdság, az összes csapméretnél
- Radiopacitás a könnyebb diagnosztizálás érdekében

KISZERELÉSEK

GC Fiber Post	
900515	Teljes rendszer (1 GC GRADIA Core készlet, 1 GC Fiber Post vegyes készlet, 1 GC GRADIA Core Patronadagoló, 1 GC Ceramic Primer)
400101	Vegyes készlet (15 GC Fiber Posts - 5 x 1,0 mm, 5 x 1,2 mm, 5 x 1,4 mm és 2 Drill - 1 x 1,2 mm, 1 x 1,4 mm)
Fiber Post utántöltő	10 Fiber Posts a következő méretekből: 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6 (egyenként csomagolva)
Előfúró utántöltő	1 db a következő méretekből: 1,2, 1,4, 1,6
GC Fiber Post tartozékok	
004846	GC Ceramic Primer (2 x 2 ml folyadék)

GC everStick®POST



Egyedileg formázható, polimerizálatlan üvegszál csap

GC everStickPOST lágy, flexibilis polimerizálatlan üvegszál csap, amely egyénileg alakítható a gyökércsatorna formájához a fénykezelés előtt, emellett fénykezelés után magas erősséget biztosít. Figyelembe véve a csatorna anatómiáját a fog törésének veszélye jelentősen csökken.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Teljesen adaptálható a csatorna morfológiájához, hogy a ragasztási felszínt és erőt a fog legkritikusabb részéin maximalizálni lehessen
- Fogmegtartó, hiszen a csatorna kialakításánál nem kell a hagyományos, előre megformázott csapokhoz hasonló mértékű preparációt végezni
- Magas hajlítási szilárdság a fénykezelés után
- Rugalmassága közelíti a dentinéhez
- Adhezív és mikromechanikai kötés a kompozit cementhez és gyökértömő kompozitokhoz egyaránt, köszönhetően az IPN struktúrának
- Az okkluzális nyomás egyenletes eloszlása a gyökér struktúráján, lecsökkentve ezzel a törések veszélyét

INDIKÁCIÓK

Az egyedi GC everStickPOST különösen alkalmas az atipikus csatornához, például ívelt, ovális, vagy nagyon nagy gyökércsatornához.

KISZERELÉSEK

GC everStickPOST	
900846	everStickPOST Intro (5 x post Ø 0,9; 5 x post Ø 1,2; 5 x post Ø 1,5; 5 ml StickRESIN folyadék)
900855	everStickCOMBI (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm ² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1,2; 1 x StickSTEPPER kézi műszer; 1 x StickREFIX D szilikon eszköz)
900838	everStickStarter Kit (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm ² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1,2; 5 ml StickRESIN folyadék; 2 ml G-aenial Universal Flo fecskendő; 1 x StickREFIX D szilikon eszköz; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)
Utántöltők	
900847	10 x 2 cm post Ø 0,9
900848	10 x 2 cm post Ø 1,2
900849	10 x 2 cm post Ø 1,5
everStickPOST tartozékok	
900842	StickRESIN, 5 ml adhezív folyadék

GC everStick®C&B

Üvegszál megerősítés az üvegszállal megerősített kompozit hidakhoz

A GC everStickC&B üvegszál megerősítés egyedi kezelésmódot tesz lehetővé a hiányzó fogak pótlására. Az GCeverStick C&B segítségével üvegszállal megerősített kompozit hidakat hozhat létre egyetlen ülésben, minimálinvazív technikát alkalmazva. Ez az evidenciákkal alátámasztott üvegszál megerősítő technológia fémmentes, költséghatékony kezelési módszert tesz lehetővé, hogy kiterjesztse protetikai kezelési alternatíváit.

A GC everStickC&B lehetővé teszi, hogy visszafordítható, minimálisan invazív megoldásokat hozzon létre úgy, hogy az egészséges fogstruktúra olyan sokáig megtartható, amíg az klinikailag lehetséges.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- A hiányzó fogak pótlásának megbízható és esztétikus módja, egyetlen kezeléssel
- Foganyag megőrző megközelítés
- Tökéletes a sürgős helyzetekre, traumás esetekre, hogy azonnali megoldást nyújthasson a hiányzó fog pótlására
- Gazdaságos alternatíva arra az esetre, ha kiterjedt pótlásra van igény
- Ideális az anterior és posterior helyreállításokhoz is

INDIKÁCIÓK

Bármely indikációra hiányzó fog pótlásánál akár ideiglenes, átmeneti- vagy hosszú távon:

- Felszínen rögzített hidak
- Inlay és onlay hidak
- Hibrid hidak
- Teljes koronákon rögzített hidak
- Implantátumon rögzített hidak
- Ideiglenes hidak
- Azonnali hidak

Ezeknek a hidaknak mindegyikét meg lehet rendelni fogászati laboratóriumból is.

KISZERELÉSEK

GC everStickC&B (Ø 1.5 mm; ~4000 üvegszál rost)	
900854	everStickIntro (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 1 x StickREFIX D)
900855	everStickCOMBI (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickREFIX D)
900838	(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN folyadék; 2 ml G-aenial Universal Flo fecskendő; 1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)
Utántöltők	
900852	2 x 12 cm üvegszál
900853	1 x 8 cm üvegszál
GC everStickC&B tartozékok	
900843	StickREFIX szilikon eszköz (3 x StickREFIX L, 3 x StickREFIX D)

Lépésről lépésre

Hogyan készítsünk egy everStick®C&B üvegszállal megerősített hidat az anterior régióban



1.-3. Ellenőrizze az okklúziót, mérje meg és vágja le a szükséges hosszúságú üvegszálat



4. Tisztítsa le a fogat habkőporral és vízzel



5. Savazza a bondozási felületet 45-60 másodpercig




6. Bondozza a gyártó előírásainak megfelelően



7. Applikáljon vékony rétegben folyékony kompozitot



8. a Tartsa nyomás alatt az üvegszálat és közben fénykezelje 5 másodpercig területenként. Az üvegszálat hajlítsa be a hídtag középsére

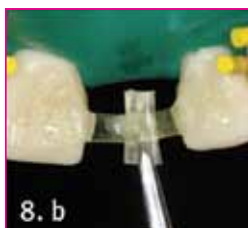

8. b Helyezzen el keresztirányban is egy üvegszálat a hídtag megerősítésére



9. Fedje be a teljes vázat vékony rétegben kompozittal és fénykezelje 40 másodpercig



10. Építse fel a hídtagot kompozit rétegezéssel



11. Finírozza a hidat és állítsa be az okklúziót

GC everStick a mindennapi fogászatban



A GC everStick üvegszálal megerősítéseket a modern, páciens-barát fogászat számára fejlesztették ki. Az everStick üvegszálal megerősítések termoplasztikus polimerben lévő szilanzált üvegszálalokból és fényre keményedő rezin mátrixból állnak. Az everStick termékek hozzájárulnak a minimál invazív fogászathoz, mivel a páciens saját egészséges foganyaga addig megőrizhető, amíg az klinikailag lehetséges. Ez azt is jelenti, hogy más kezelési opciók is elérhetőek maradnak, ha esetlegesen a páciensnek szüksége lenne rá a jövőben.

Az üvegszálal és a kompozit közti megfelelő kötés kulcskérdés a kezelés sikerességét illetően. Csak az everStick termékek rendelkeznek egyedülálló, szabadalmaztatott egymásba fonódó polimer hálózattal (IPN). Ez klinikailag tökéletesebb kötést eredményez, mely megbízható felszínt és tökéletes kezelhetőséget biztosít.

IPN - az everStick rostok szíve



Az IPN struktúra jelentősége, hogy a felszínek reaktívalhatóak még az utolsó polimerizáció után is. A reaktíválás elengedhetetlen a kiváló kötés érdekében, ha:

- laborban készült pótlások vannak a foghoz rögzítve
- üvegszálalal megerősített kompozit (FRC) eszközök átalakításakor vagy javításakor

Az IPN szerkezet alapvetően megkülönbözteti az everStick termékeket az összes többi elérhető üvegszálalal kompozit anyagtól.

GC everStick®PERIO



Üvegszálás megerősítés
parodontális sínhez

Az GC everStickPERIO előnedvesített, egyirányú üvegszál minimál invazív és megbízható sínhez. Optimális kezelhetőségi tulajdonságokkal és esztétikával dinamikus és költséghatékony alternatívát kínál a fogak stabilizálására és visszahelyezésére.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Teljesen fémentes, transzparens, magas esztétikát nyújtó megoldás
- Kényelmes a páciensnek, mert öntisztítóra alakítható, valamint nem gátolja a rágó funkciót
- Reaktiválható és könnyen átalakítható vagy javítható
- Kiváló mikromechanikai és kémiai kötés a kompozitához köszönhetően a szabadalmaztatott IPN struktúrának
- Szükség esetén könnyen eltávolítható

KISZERELÉSEK

GC everStickPERIO (Ø 1.2 mm; ~2000 üvegszál rost)	
900854	everStickIntro (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 1 x StickREFIX D)
900855	everStickCOMBI (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickREFIX D)
900838	everStickStarter Kit (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN bottle; 2 ml G-aenial Universal Flo syringe; 1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)
GC everStickPERIO utántöltő	
900850	2 x 12 cm üvegszál
900851	1 x 8 cm üvegszál

INDIKÁCIÓK

- Fogfelszínen rögzített intra-koronális sínhez
- Parodontális sínhez és fogfelszínen rögzített hidak kombinációja

GC everStick®ORTHO



Üvegszálás megerősítés az
esztétikus ortodonciai rögzítéshez

A GC everStickORTHO indikációja az esztétikus retenció fázisa az aktív ortodonciai kezelést követően. A mátrix rostokban tartja az individuális üvegszálakat mely megkönnyíti kezelését és fogívhez való adaptálhatóságát.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Jól illeszkedik a természetes fogsínhez
- Könnyen adaptálható közvetlenül a foghoz kiiktatva ezzel a tanulmánymodellek és második vizit szükségességét
- Megbízható kompozit adhezív kötés
- Kényelmes viselet és könnyen tisztítható
- Teljesen fémentes, fémallergia veszélye nélkül használható (Ni, Cr)

KISZERELÉSEK

GC everStickORTHO (Ø 0.75 mm; ~1600 üvegszál)	
900841	everStickORTHO 2 x 12 cm üvegszál

GC everStick®NET



Üvegszálás megerősítés labiális
sínhez

Ezzel az extrém vékony és esztétikus kétirányú üvegszál hálóval az GC everStickNET az optimális választás a labiális sínhez traumatizált eseteknél. Ez a előnedvesített üvegszál sín minimálisan invazív megoldást ajánl megbízható kötéssel, optimalizált kezelhetőségi tulajdonságokkal és esztétikával.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Teljesen fémentes, transzparens, magas esztétikai megoldást nyújtva
- Kényelmes a páciens számára, mivel öntisztítóvá alakítható és nem zavarja a rágó funkciókat
- Reaktiválható és könnyen átalakítható, javítható
- Szükség esetén könnyen eltávolítható

KISZERELÉSEK

GC everStickNET	
900855	everStickCOMBI (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickREFIX D)
900838	everStickStarter Kit (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN folyadék; 2 ml G-aenial Universal Flo fecskendő; 1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)
GC everStickNET utántöltő	
900837	everStickNET, 30 cm² üvegszálás háló

INDIKÁCIÓK

- Traumatizált fogak labiális sínhez
- Labiális parodontális sínhez
- Héjak javítása, megerősítése

GC StickRESIN



Fényre keményedő zománc adhezív

A GC stickRESIN egy fényre keményedő egykomponensű, dimetakrilát alapú zománc adhezív. A GC stickRESIN GC Stick üvegszálak és GC StickNET üvegszálak háló nedvesítésére-, valamint a felszínek reaktíválására használatos.

KISZERELÉSEK

GC StickRESIN	
900842	5 ml adhezív folyadék

GC StickCARRIER



Kéziműszer

A GC StickCARRIER kéziműszer a GC Stick és GC everStick üvegszálak termékekhez speciálisan kialakított. A GC StickCARRIER nagyon hasznos az üvegszál kötegek elhelyezésekor, egyidejűleg az üvegszál kötegek helybe igazítására is szolgál.

KISZERELÉSEK

GC StickCARRIER - 1 db	
900826	Kéziműszer

GC StickSTEPPER



Kéziműszer

A GC StickSTEPPER a Stick és everStick üvegszálak termékek használatának megkönnyítéséhez kialakított műszer. A GC StickSTEPPER műszer alakja segíti az üvegszál kötegek pozicionálását, miközben egyaránt védi a megmaradó üvegszálat a korai kötéstől a behelyezési eljárás során.

KISZERELÉSEK

GC StickSTEPPER - 1 db	
900825	Kéziműszer

GC EQUIA®

Önragasztó, egyben behelyezhető poszterior helyreállító anyag

Az GC EQUIA egy egyedülálló helyreállító rendszer az esztétikus és gazdaságos posterior helyreállításokhoz, lenyűgöző erővel minden szinten. Az GC EQUIA rendszer egyesíti az GC EQUIA Fil, új generációs üvegionomer, és GC EQUIA Coat, magas töltőanyag tartalmú rezin lakk anyagokat, amely az üvegionomer technológiát egy magasabb szintre emeli, és új dimenziókat nyit meg a helyreállító fogászatban. Összehasonlítva számos más helyreállító lehetőséggel az GC EQUIA lényeges időelőnyt ad. Az összehasonlíthatatlan esztétika kiszélesíti a posterior helyreállítás lehetőségeit, hogy páciensei elvárásainak megfelelőhessen. Sok éves klinikai tapasztalat bizonyítja, hogy ez a rendszer nagyszerű alternatívát nyújt napi munkájában.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- A teljes munkaidő körülbelül 3,5 perc
- Kiterjesztett indikációk használhatóságra, összehasonlítva más üvegionomer termékekkel
- A rendszer nem igényel rétegezést, nem ragadós és tömöríthető, tökéletesen adaptálható a kavitás falaihoz
- Majdnem teljesen zsugorodásmentes, így az EQUIA bulk fill anyagnak is nevezhető, még nagyobb kavitások esetén is
- Az üvegionomer ereje az idő múlásával növekszik az anyagnak a nyál közegében történő egyedi utóérésének következtében
- Kofferdám használata opcionális, a kémiai kötés miatt nem igényel bonyolult bondozási eljárást

- Nincs szükség bonyolult finírozási és polírozási eljárásra, csupán az EQUIA Coat egyszeri applikálása szükséges
- Egyedülálló csillogás és sima felszín, tartós, természetes fénnnyel, könnyebben, mint valaha

Az EQUIA rendszer elérhető különböző egyes- vagy kombinált kiszerezésekben, melyek tartalma EQUIA Fil kapszulákból és egy üveg EQUIA Coat-ból áll. Az EQUIA Fil a következő Vita® színekben elérhető: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4 és SW (Standard White).

KISZERELÉSEK

GC EQUIA (kapszula kevert tartalma 0.14 ml)					
Bevezető csomag (50 db EQUIA Fil kapszula, 4 ml EQUIA Coat és kellékek)					
900584	A2	900585	A3	900582	Vegyes
Promo csomag (100 db EQUIA Fil kapszula, 4 ml EQUIA Coat és kellékek)					
900593	A2 és A2	900594	A2 és A3	900595	A3 és A3
Klinikai csomag (250 db EQUIA Fil kapszula, 6 ml EQUIA Coat és kellékek)					
900860	A2	900861	A3		
Utántöltők: 50 db kapszula dobozban					
004370	Vegyes	004374	A3.5	004378	C4
004371	A1	004375	B1	004778	SW
004372	A2	004376	B2		
004373	A3	004377	B3		
Utántöltő GC EQUIA Coat					
004379	1 üveg EQUIA Coat 4 ml, eldobható applikátor (25), 1 Applikátor tartó				
GC EQUIA kellékek					
002559	GC Adagolópisztoly IV, 1 db				

GC EQUIA® Klinikai esetek



Cervikális helyreállítás - Dr. M. Blique



Okkluzális helyreállítás végleges fogon - Dr. M. Kukurba-Setkiewicz



Okkluzális helyreállítás végleges fogon - Dr. M. Blique



Helyreállítás minimál invazív technikával - Dr. D. Adyani-Fard



Lépésről lépésre



1. Applikáljon petróleum zselét vagy GC kakaóvaját a matrica belsejébe



2. Használjon anatómiai formázott ékeket a jobb adaptáció és kontaktpontok érdekében



3. Használjon szűk gyűrűket a szekcionált matrica készletből a fogak szeparálására, hogy biztosítsa a megfelelő kontaktpontokat



4. Applikáljon GC Cavity Conditioner-t (10 másodpercig), vagy Dentin Conditioner-t (20 másodpercig)



5. Öblítse és gyengéden szárítsa, ne szárítsa ki



6. Rázza és enyhén ütögesse meg. Nyomja be a dugattyút



7. Helyezze a kapszula-adagolóba. Nyomja meg egyszer az aktiváláshoz



8. Rázza 10 másodpercig. A munkaidő a keveréstől számított 1 perc 15 másodperc



9. Helyezze a kapszulát az adagolóba. Nyomja meg kétszer, hogy éléssze a kapszulát



10. AZONNAL adagolja ki 10 másodpercen belül



11. Tömörítse és formázza. Kerülje el a szennyeződést és kiszáradást



12. Bizonyosodjon meg az EQUIA® Fil teljes kötéséről, majd óvatosan távolítsa el a gyűrűt. Használjon szondát, hogy elválassza az EQUIA® Fil-t a matricától



13. A keveréstől számított 2 perc 30 másodperc múlva kezdhető a finírozás



14. Fejezze be a helyreállítást EQUIA® Coat applikálásával. NE FÚJJA LE LEVEGŐVEL



15. Fénykezelje 20 másodpercig

GC Fuji IX GP EXTRA

Továbbfejlesztett, gyorsan kötő, tömöríthető üvegeionomer helyreállító cement

Az üvegeionomer technológia fejlődése a GC Fuji IX GP EXTRA kifejlesztését eredményezte, egy magas erősségű üvegeionomer cement új generációs üveg töltőanyaggal, amely a helyreállításnak nagyon magas transzlucenciát ad, amely idővel minimálisan változik. Az eredmény egy eddig elérhetetlen természetes esztétika egy hagyományos üvegeionomer cementtel. A GC Fuji IX GP EXTRA-ban használt különleges üveg töltőanyaga háromszor több fluoridot ad le, mint a GC Fuji IX GP FAST, így még jobban véd a kariesz ellen. A kényelmes munkaidő kombinálva a gyors kötési idővel azt jelenti, hogy a finírozást és polírozást a keveréstől számított két és fél perc után elkezdheti.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Extra fluorid leadás
- Gyors kötés, még bő munkaidő esetén is
- Extra transzlucencia a kiváló esztétikum érdekében
- Nincs szükség kofferdám használatára
- Erős kémiai kötés a zománchoz és a dentinhez savazás, bondozás nélkül
- Fogkímélő preparációs technika, alámenős részek nélkül
- Fém matricával használható, könnyen kialakítható
- Egylépéses behelyezés
- Jó röntgenárnyéka megkönnyíti a posztoperatív diagnózist
- Kiváló biokompatibilitás

INDIKÁCIÓK

A GC Fuji IX GP EXTRA ideális végleges vagy ideiglenes I. és II. osztályú helyreállításokra gyermek fogaknál, valamint alacsony nyomásnak kitett I. és II. osztályú helyreállításokhoz felnőtt fogaknál, V osztályú és gyökérfelszín helyreállításra, csontfelépítésére és kompozittal, vagy inlay esetén azonnali- vagy késleltetett szendvics technikához.

KISZERELÉSEK

GC Fuji IX GP EXTRA P/F					
005076	Bevezető csomag, 1-1 csomag A2 (15 g por, 6.4 ml folyadék)				
005077	Bevezető csomag, 1-1 csomag A3 (15 g por, 6.4 ml folyadék)				
Utántöltők: 15 g por					
005086	A1	005089	A3.5	005092	B3
005087	A2	005090	B1	005093	C4
005088	A3	005091	B2		
005073	6.4 ml (8 g) folyadék				
GC Fuji IX GP EXTRA kapszula (megkevert térfogat kapszulánként 0.14 ml)					
Utántöltők: 50 db kapszula dobozban					
003279	Vegyes	003282	A3	003285	B2
003280	A1	003283	A3.5	003286	B3
003281	A2	003284	B1	003287	C4
Tartozékok					
002559	GC Adagolópisztoly IV, 1 db				

GC Fuji IX GP és GC Fuji IX GP FAST



Tömöríthető üvegionomer helyreállító cement normál és gyorsan kötő változatban

Tömöríthető, nem ragadós konzisztenciájának köszönhetően I., II. és V. osztályú helyreállításoknál és alábélelőként, csomkfelépítőként is ideálisan használható*. Egyszerű kezelhetősége és az üvegionomerekre jellemző egyedülálló tulajdonságok biztosítják, hogy a GC Fuji IX GP a modern tömőanyagokkal szemben támasztott minden követelménynek megfelel.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Könnyen behelyezhető, tömöríthető, magas kopásállóságú üvegionomer
- Nincs szükség kofferdám használatára
- Erős kémiai kötés a zománchoz és a dentinhez savazás, bondozás nélkül
- Fém matricával használható, könnyen kialakítható
- Egylépéses behelyezés
- Jó röntgenárnyéka megkönnyíti a posztoperatív diagnózist
- Kiváló biokompatibilitás

Amit a GC Fuji IX GP FAST kínál:

- Rövidebb kötési idő, a keverés kezdetétől számított 3. perc elteltével a finírozás elkezdhető
- Könnyebben behelyezhető, mert állaga sűrűbb
- Erősebb, így hosszabb az élettartama

HASZNÁLAT

A GC Fuji IX GP FAST lehet a megfelelő anyag azokban az esetekben is, amikor a kezelési terv még nem eldöntött. Sokféle kezelési lehetőség választható: szendvicstechnika kompozittal, inlay-vel vagy akár az üvegionomer magában.

KISZERELÉSEK

GC Fuji IX GP P/F					
003264	Bevezető csomag, 1-1 csomag, A3 (15 g por és 6.4 ml folyadék)				
900444	3-2 csomag, 3 x 15 g por: A2, A3, B3, 2 x 6.4 ml folyadék				
Utántöltők: 15 g por					
003265	A2	003268	B2	003270	C4
003266	A3	003269	B3	003267	A3.5
003271	6.4 ml folyadék				
GC Fuji IX GP kapszula (megkevert térfogat kapszulánként 0.14 ml)					
Utántöltők: 50 db kapszula dobozban					
003273	A2	003275	A3.5	003277	B3
003274	A3	003276	B2	003278	C4
GC Fuji IX GP FAST kapszula (megkevert térfogat kapszulánként 0.14 ml)					
Utántöltők: 50 db kapszula dobozban					
003288	A1	003291	A3.5	003293	B3
003289	A2	003292	B2	003294	C4
003290	A3				
GC Fuji IX GP/FAST tartozékok					
002559	GC Adagolópisztoly IV, 1 db				

* Információért nézze meg a használati utasítást.

GC Fuji II LC Improved



Fényre keményedő üvegionomer cement

A GC Fuji II LC Improved világszerte a vezető fényre keményedő üvegionomer cement. Bár elsősorban a III., V. osztályú kavitások, valamint tejfogak tömésére szánták, a GC Fuji II LC Improved sok célra használható, olyan másodlagos indikációs területekkel, mint pl. liner, alábélelés, csomkfelépítés*.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kiváló esztétikum és polírozhatóság a kisebb szemcseméretnek köszönhetően
- Magasabb töltőanyagtartalma miatt jelentősen megnövelt kopásállóság

- Jó röntgenárnyéka megkönnyíti a posztoperatív diagnózist
- Kémiai kötés a fogszövethez, hidrofilitás
- 11 Vita® színben

KISZERELÉSEK

GC Fuji II LC Improved P/F					
900469	Bevezető csomag, 3-2 csomag (3 x 15 g por: A2, A3, B3 és 2 x 6.8 ml folyadék)				
Utántöltők: 15 g por					
003252	A1	003256	A4	003260	C2
003253	A2	003257	B2	003261	C4
003254	A3	003258	B3	003262	D2
003255	A3.5	003259	B4		
003263	6.8 ml folyadék				
GC Fuji II LC kapszula (50 db kapszula, megkevert térfogat kapszulánként 0.10 ml)					
003244	Vegyes (A4, B2, B3, B4, C2, D2)				
003233	A1	003237	A4	003241	C2
003234	A2	003238	B2	003242	C4
003235	A3	003239	B3	003243	D2
003236	A3.5	003240	B4		
GC Fuji II LC Improved tartozékok					
002559	GC Adagolópisztoly IV, 1 db				

* Információért nézze meg a használati utasítást.

GC Fuji VIII GP



Önkötő, műgyantával megerősített üvegonomer helyreállító anyag

Üvegonomer helyreállító anyag továbbfejlesztett fizikai és esztétikai tulajdonságokkal, melyek a III., V. osztályú és a gyökérfelszíni kavitások legjobb választásává teszik. A GC Fuji VIII GP kimagaslóan gazdaságos termék.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Hosszú távú rögzülés az erős kémiai kötésnek köszönhetően
- Jó translucencia fénykezelés nélkül
- Speciális formula specifikus műgyantával, ezért ideális anterior helyreállításokhoz
- Jó átlós szakítószilárdság (30 MPa) és magas hajlítási szilárdság (52 MPa)
- Mechanikai tulajdonságainak 90%-át 10 percen belül eléri
- Ezekon felül az üvegonomerek összes előnye

KISZERELÉSEK

GC Fuji VIII GP P/F (1-1 csomag, 15 g por, 6.8 ml folyadék)					
003245	A2	003247	A3.5	003249	B3
003246	A3	003248	B2	003250	C4
003251	8 g folyadék				
GC Fuji VIII GP kapszula (50 db kapszula, megkevert térfogat kapszulánként 0.10 ml)					
001869	Vegyes	001865	A3.5	001867	B3
001863	A2	001866	B2	001868	C4
001864	A3				
Tartozékok					
002559	GC Adagolópisztoly IV, 1 pce				

GC Fuji LINING LC Paste Pak



Fényre keményedő üvegonomer liner paszta-paszta formában

Fényre keményedő, műgyantával megerősített üvegonomer liner cement paszta-paszta formában. Nagyszerű kezelhetősége valódi üvegonomer tulajdonságokkal kombinálva gyors és megbízható linerré teszi.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Egyszerű, pontos kiadagolás
- Könnyű, buborékmentes keverés
- Könnyen, elfolyás nélkül felvihető a kavitás falaira
- Csekély filmvastagság
- Kiváló kötés a fogszerkezethez, kondicionálás nélkül is
- Erős kötés kompozitokhoz

KISZERELÉSEK

GC Fuji LINING LC Paste Pak	
001887	Paste Pak patron, 7 g / 4.7 ml és keverőtömb
GC Fuji Lining LC Paste Pak tartozékok	
001573	Paste Pak adagoló

GC Fuji LINING LC



Fényre keményedő üvegonomer alábélelő cement

Fényre keményedő, por-folyadék kiszerezésű cement amalgám, kompozit és porcelán alatti gyors alábéleléshez.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Fényre keményedő, gyors kötési idővel (30 másodperc fénykezelés)
- Alacsony vízzoldékonyság, nedvességre érzéketlen
- Kiváló kötés a fogszerkezethez, tartós széli zárás
- Radiopak, ezzel megkönnyíti a posztoperatív diagnózist

KISZERELÉSEK

GC Fuji LINING LC	
000021	Bevezető csomag, 1-1 csomag (10 g por, 6.8 ml folyadék és tartozékok)
Utántöltők	
000022	10 g por
000128	6.8 ml folyadék

GC Cavity Conditioner



Kavitástisztító anyag

Enyhe, 20% poliakrilsavas kondicionáló a smear layer eltávolítására és a fogfelületek kondicionálására.

KISZERELÉSEK

GC Cavity Conditioner	
000110	5.7 ml folyadék

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Hatékonyan tisztítja a felületet, így optimális kötés érhető el
- Mechanikai retenciót hoz létre
- Alacsony a posztoperatív érzékenység kockázata
- Javítja a széli zárast

- Kék színű, így applikálása ellenőrizhető

HASZNÁLAT

Egy vattapamaccsal vigye fel a felszínre 10 másodpercre. Öblítse le vízzel, fújja le a felület kiszáritása nélkül, majd applikálja az üvegonomert.

GC Dentin Conditioner



Kavitástisztító anyag

A 10%-os poliakrilsavas oldat tisztítja a fog felületeit, ezáltal javítja az üvegonomerek kötését.

KISZERELÉSEK

GC Dentin Conditioner	
000120	23.8 ml folyadék

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Javítja a széli zárast és növeli a helyreállítás tartósságát
- Zárva hagyja a dentin-tubulusokat, így kisebb az utóérzékenység kockázata
- Kék színű, így applikálása ellenőrizhető

HASZNÁLAT

Egy vattapamaccsal vigye fel a felszínre 20 másodpercre. Öblítse le vízzel, fújja le a felület kiszáritása nélkül, majd applikálja az üvegonomert.

GC Caviton



Ideiglenes tömőanyag

Ideiglenes tömőanyag normál kavitásokba és gyökérkezelések után.

KISZERELÉSEK

GC Caviton	
000286	Fehér, 30 g tégely

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Vízre és nyálra beinduló kötés
- Kiváló alkalmazhatóság
- Könnyen eltávolítható

GC G-Coat PLUS



Nanotöltésű, önragasztó, fényre keményedő védőlakk

A GC G-Coat PLUS egyenletes részecskeloszlású, nanotöltésű védőlakk, mely üvegionomerekhez, kompozitokhoz valamint ideiglenes helyreállításokhoz egyaránt használható. A folyékony fény fokozott keménységet és védelmet nyújt. Ezentúl nem kell polírozni, mivel a GC G-Coat PLUS három egyszerű lépésben történő alkalmazásával hosszantartó fényt és tökéletes simaságot biztosít.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Sima felszínt biztosít, csökkenti az összes fajta helyreállítás elszíneződését, mint például az üvegionomerek vagy kompozitok
- Megvédi a fog és a helyreállító anyag széleit
- Óvja az üvegionomert kezdeti vízerzékenységekor
- Növeli a kopásállóságot, különösképpen az üvegionomerekét
- Kompatibilis a különféle fénypolimerizáló készülékekkel

INDIKÁCIÓK

- Üvegionomer helyreállítások
- Kompozit helyreállítások
- Ideiglenes koronák
- Már meglévő helyreállítások
- A helyreállítás és a fog határának védelme

HASZNÁLAT

- Adagoljon ki 1 cseppet
- Vigye fel a helyreállításra
- Fénykezelje 20 másodpercig (Ne fújja le légárammal)

KISZERELÉSEK

GC G-Coat PLUS	
003272	Kezdő készlet, üveg (4 ml üveg, 20 adagolótálca, 50 micro-tips applikátor, 1 applikátor tartó)

GC DiaPolisher Paszta



Gyémánt polírozó paszta kompozitokhoz és porcelánhoz

A szokásos polírozást követő végső lépésként használt GC DiaPolisher Paszta magasabb fényt ad a direkt és indirekt kompozit helyreállításoknak, ezzel fokozza az esztétikai eredményt. Az okkluzális felületek polírozása és a már meglévő kompozit helyreállítások karbantartása sokkal könnyebbé válik.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Szuperfinom gyémánt szemcsék (1 µm) biztosítják a legjobb hatékonyságot rövid idő alatt
- Tökéletes fényes felszínek a gyönyörű eredményért
- Hatékonyan megakadályozza a plakk lerakódását és az elszíneződést
- Vízrel könnyen lemosható
- Friss menta ízű

HASZNÁLAT

Polírozza a kompozit vagy porcelán felszínt közepes sebességgel és nyomással polírozó kehegy vagy kefe segítségével.

KISZERELÉSEK

GC DiaPolisher Paszta, 2 g	
004415	DiaPolisher paszta

GC New Metal Strips



Finírozó fémcsíkok

Alumíniumoxid szemcsékkel galvanizált fémcsíkok, a tömések approximális finírozására és polírozására.

KISZERELÉSEK

GC New Metal Strips	
004847	Vegyes (2.6 mm, 3.3 mm, 4.0 mm), 12 pcs (1 db minden szemcsészettségből és szélességből)
Vegyes utántöltő: 12 db (4 db minden szélességből)	
004848	Piros (preparáció), N.200
004849	Kék (végső preparáció), N.300
004850	Zöld (finírozás), N.600
004851	Sárga (polírozás), N.1000
Utántöltő: 6 mm, 12 pcs	
004852	Piros (preparáció), N.200
004853	Kék (végső preparáció), N.300
004854	Zöld (finírozás), N.600
004855	Sárga (polírozás), N.1000

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Hajlékony és ellenálló
- Elég vékony, hogy szoros kontaktpontoknál is könnyen alkalmazható legyen
- Autoklávozható, könnyen tisztítható
- Különböző szemcsészettségek és szélességek

GC Eptex



Finírozó és polírozó szalag

Könnyű felületkidolgozó, finírozó és polírozó szalag az interproximális területekre, üvegionomerhez és kompozitához.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Rendkívül vékony és hajlékony, szoros kontaktpontoknál is könnyen alkalmazható
- Nagyon ellenálló
- Erősen a szalag felületébe ágyazott abrazív részecskék
- Négy fokozatban elérhető
- Könnyen kezelhető szalagadagoló
- Matricaszalag is kapható

INDIKÁCIÓK

- Durva = preparáció
- Közepes = végső preparáció
- Finom = finírozás
- Extra finom = polírozás

KISZERELÉSEK

GC Eptex	
000404	Kezdő készlet, állvány és 1 db minden szalagból
000409	Transzlucens matrica szalag, 10 m
000405	Durva (kék), 10 m
000407	Közepes (zöld), 10 m
000406	Finom (szürke), 10
000408	Extra finom (piros), 10 m

A MEGFELELŐ TERMÉKEK PROTETIKAI MUNKÁJÁHOZ...

Minden fogorvos tudja, milyen fontos a precíz lenyomatvétel, mivel kulcsfontosságú tényező a tökéletesen illeszkedő fogpótlások biztosításához. A megfelelő lenyomatanyag és a jó lenyomatvételi technika az egész protetikai folyamatot egyszerűbbé és gyorsabbá teszi.

A GC büszkén mutat be egy innovatív lenyomatvételi módot, új kémiával, amely lehetővé teszi a tökéletes lenyomatvételt bármely körülmények között. A tökéletesen illeszkedő helyreállításokhoz szükséges tökéletes lenyomatok elérése még kiszámíthatatlan körülmények között is most már minden fogorvos számára lehetséges a **GC EXA'lence** segítségével.

Új VPES anyagink mellett továbbra is kínálatunkban marad már bizonyított termékpalettánk a tixotróp és hidrofíli szilikon alapú lenyomatvételi anyagokkal az összes közkedvelt lenyomatvételi technikához.

A **GC Aroma Fine Plus** kiváló ólom- és pormentes finom alginát részecskékből álló formulája egyenletes felszínt biztosít a rendkívül precíz lenyomatokért. A kiváló por-víz affinitás könnyen és gyorsan keverhetővé teszi.

Annak érdekében, hogy a helyreállítások elsőre jól illeszkedjenek, szükségszerű, hogy megfelelő lenyomatanyaggal dolgozzon, de a megfelelő kanál kiválasztása is kiemelkedően fontos. Akár fogas, fogatlan vagy harapásrögzítő kanalat keres, mi rendelkezünk az elvárásainak megfelelő kanállal. Elvégre, a GC kínálja a kanalak legszélesebb választékát Európában.

Követve a sokéves tapasztalatot a **GC Fit Checker**-rel, a GC most bemutatja a **GC Fit Checker Advanced** és **GC Fit Checker Advanced Blue** termékeit. A **GC EXA'lence**-nél használt VPES technológiára építve mutatjuk be ezeket az új illeszkedés-ellenőrző anyagokat: ultra vékony és transzparens a tökéletes és precíz illeszkedés-vizsgálat és pontos, rövid kötési idő érdekében.

Emellett új jellemzői, mint a megnövelt keménység, könnyű igazíthatóság és eltávolíthatóság, valamint a speciális kék szín a kerámia anyagokon való könnyű ellenőrzés érdekében olyan anyaggá teszik, melyet mindig szeretne fiókjában tudni.

A GC több mint 30 évnyi dokumentált bizonyítékkal rendelkezik, így kiérdemelte helyét a fogpótlások tartós ragasztásának területén. A hagyományos üvegionomerektől, a műgyantával megerősített üvegionomereken keresztül, az önragasztó rezinekig; akár fém alapú helyreállítások mindennapi ragasztáshoz, vagy igényesebb eljárásokhoz - például rezin vagy megerősített kerámia helyreállítások - a GC megadja a választ. A kézi keverésű por-folyadék cementet, a sokoldalú GC Automix pasztapasztá formulát, vagy a precíz kapszularendszereket kedveli jobban? A GC a legjobban teljesítő termékeket hozza el Önnek különböző felhasználóbarát formákban. A GC üvegionomerei napjaink első választásai a mindennapi ragasztások során, valamint az ortodoncia területén is, ahol sok éven keresztül igazán sikeresnek bizonyultak.

A helyreállító fogászatban gyakran szükség van ideiglenes megoldásokra. Akár egyszínes ideiglenes, vagy többretegű esztétikus hosszú távú ideiglenes helyreállításokat készít, a GC a legkorszerűbb önkötő és fényre keményedő anyagok sorát kínálja.

Végül, de nem utolsó sorban a GC csúcscategóriás alábélelő anyagainak sora, melyek kiváló akril és szilikon technológián alapulnak, olyan opciót kínálnak Önnek, mely az összes páciense igényeinek megfelel. Az olyan klasszikus indikációk, mint az érzékeny nyálkahártya, felfekvési terület, éles vagy csontos alveoláris gerinc, alámenős részek vagy a nem illeszkedő protézisek, mind megérdemelnek egy egyszerű, egy lépéses megoldást. Pontosan ezt kínálja a GC nyálkahártya kondicionáló és alábélelő anyagainak portfóliója.



TARTALOMJEGYZÉK			
Protetika a fogorvos számára			
Ragasztás	Kompozit	GC G-CEM LinkAce	46
		Lépésről lépésre	47
		GC G-CEM kapszula	47
	Műgyantával megerősített üvegionomer cement	GC FujiCEM 2	48
		GC Fuji PLUS (EWT)	49
	Hagyományos üvegionomer cement	GC Fuji I	49
	Ideiglenes	GC Fuji TEMP LT	50
		GC Freegenol	50
Ideiglenes koronák és hidak	Kiegészítő eszközök	GC Pliers	50
Ragasztás		Alkalmazási útmutató	51
Ortodonciai ragasztás	Műgyantával megerősített üvegionomer cement	GC Fuji ORTHO LC PP Automix	52
		GC Fuji ORTHO LC	53
		GC Fuji ORTHO	53
		GC Fuji ORTHO BAND LC PP	54
		GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak	55
		GC ORTHO Gel Conditioner	55
Lenyomatvétel	VPES	GC EXA'lence	56
		Lenyomatvételi technikák	57
	Szilikon	GC Examix/flex	58
		GC Exafast NDS	58
		GC Exajet	59
	Alginát	GC Aroma Fine PLUS	59
	Kanalak	GC Dentulous Trays	60
		GC Edentulous Trays	60
		GC Closed-Bite Trays	61
	Kiegészítő eszközök	GC Impression Separation Wafer	61
	Termoplasztikus anyagok	GC Bite Compound	62
		GC ISO Functional Sticks	62
	Kiegészítő eszközök	GC Treclean	62
Ideiglenes koronák és hidak	Akril rezin	GC Unifast III	63
		GC Unifast TRAD	63
		GC Unifast LC	64
	Kompozit rezin	GC Revotek LC	64
Harapásellenőrzés	VPES Szilikon	GC Fit Checker Advanced	65
		GC Fit Checker Advanced Blue	65
	Szilikon	GC Exabite II NDS	65
Alábélelés és kondicionálás	Rezin	GC Tissue Conditioner	66
		GC Reline	66
	Szilikon	GC Reline Extra Soft	67
		GC Reline Soft	67
	Parodontális pakolás	GC Coe-Pak (AUTOMIX)	67

GC EUROPE

GC G-CEM LinkAce

Önragasztó rezin cement automix kiszerelésben

A GC G-CEM LinkAce duál kötésű, önragasztó univerzális rezin cement dupla dugattyús automix fecskendőben, kerámia- fém- vagy kompozit indirekt helyreállítások adhezív ragasztásához. Önkötő módban a legmagasabb polimerizációs konverziós rátával, GC G-CEM LinkAce tökéletes eredményt biztosít a beragasztandó protetikai munka anyagától függetlenül. A GC G-CEM LinkAce-ben lévő foszfát monomerek felülmúlhatatlan tartósságot garantálnak a ragasztásnak. A magas kopásállóság és a szín megtartása mellett nyugodtak lehetünk a CAD-CAM és fémmentes helyreállítások beragasztásakor is.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kiemelkedően hatékony önkötő módban
- Tökéletes ragasztóerő minden modern helyreállító anyaghoz
- Magas kötőerő a dentinhez és zománchoz önkötő és duál-kötő módban is
- Nincs szükség a fogfelszín előkondicionálására
- Fluoridleadás a megnövelt biztonságért
- Nincs poszt-operatív érzékenység
- Tökéletes színmegtartás
- A legalacsonyabb lineáris tágulás
- Megfelelő radiopacitás
- Nem szükséges hűtőben tárolni

INDIKÁCIÓK

Minden fajta kerámia- rezin- és fém alapú inlay, onlay, korona és híd ragasztására. Fém- kerámia- üvegszálaspapok és öntött csapok beragasztására és gyökértömésre.

KISZERELÉSEK

GC G-CEM LinkAce (4.6 g - 2.7 ml) fecskendőnként	
004861	A2, 2 fecskendő, 15 automix csőr, 5 automix endo csőr
004862	Transzlucens, 2 fecskendő, 20 automix csőr, 5 automix endo csőr
004863	AO3, 2 fecskendő, 15 automix csőr, 5 automix endo csőr
004864	BO1, 2 fecskendő, 15 automix csőr, 5 automix endo csőr
GC G-CEM LinkAce tartozékok	
900668	GC Automix csőr, 10 pcs
900495	GC Automix endo csőr, 10 pcs


Lépésről lépésre GC G-CEM LinkAce

1. Nincs szükség bondozásra vagy savazásra



Tisztítsa, öblítse, és szárítsa a preparált fogat.

2. Erős kötés bármely helyreállításhoz

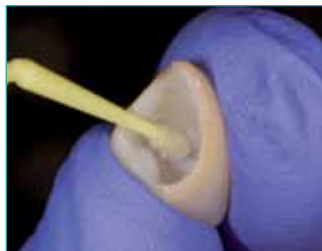

Készítse elő a helyreállítást a gyártó utasításainak megfelelően.

3. Egy lépéses automix kiadagolás



Adagolja az anyagot közvetlenül a helyreállításba.

4. Extrém vékony rétegvastagság (3 µm) a tökéletes illeszkedésért



Helyezze be a helyreállítást és tartsa helyén mérsékelt nyomás alatt.

5. Gyors és időben gazdaságos eljárás



Részpólimerizáljon minden felszínt 1 másodpercig, vagy hagyja önkötő módban, míg gumiszerűvé válik.

6. Ideális konzisztencia a maradékanyag eltávolításához



Távolítsa el a maradékanyagot.

7. Esztétikus és erős végeredmény



Polírozza a széleket, amennyiben szükséges.

Dr. Javier Tapia Guadix,
Madrid, Spanyolország

GC G-CEM Capsule



Önragasztó rezin cement kapszulás vagy automix kiszerelésben

A GC G-CEM egy dual kötő, önragasztó, univerzális rezin cement kapszulás kiszerelésben, teljes kerámia, fém vagy kompozit indirekt helyreállítások adhézió ragasztására.

A GC G-CEM egyesíti a hagyományos cementek kezelhetőségét és önkötését a rezin cementek adhéziójával valamint kiváló mechanikai és esztétikai tulajdonságaival.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kiváló kötési tulajdonságok a fogművek anyagaihoz, beleértve a cirkóniumot és lítium diszilikát kerámiát
- Magas kötőerő a zománchoz és dentinhez önkötő és fényre keményedő módban egyaránt
- Nincs szükség afogfelszín kondicionálására
- Közvetlen behelyezés a gyökércsatornába erre a célra kifejlesztett hosszabbító csőr segítségével
- Hosszú távon stabil, a legmagasabb színtabilitással, mivel a kötés után nincs lebomlás
- Legalacsonyabb lineáris tágulás

INDIKÁCIÓK

- Teljes kerámia és kompozit koronák, hidak, inlay-k és onlay-k
- Fém és fémkerámia koronák, hidak, inlay-k, onlay-k
- Fém, kerámia és üvegszál csapok, öntött csapok és csomó beragasztása

KISZERELÉSEK

GC G-CEM kapszula (50 db kapszula, megkevert térfogat kapszulánként 0.17 ml)					
003221	Vegyes	003228	AO3	003230	BO1
003217	A2	003229	Translucens		
GC G-CEM kapszula tartozékok					
004414	GC Kapszulahosszabbítók, 10 db				
002559	GC Adagolópisztoly IV, 1 db				

GC FujiCEM 2

Műgyantával megerősített üvegeionomer ragasztócement

Az új GC FujiCEM 2 egy teljes évtizednyi folyamatos fejlesztés és a világszerte több mint 150 millió korona beragasztásával elért hírnév eredménye. Az innovatív erő és fúzió technológiának köszönhetően a GC FujiCEM 2 sikeres kezelést garantál a fogorvosnak.

Az új GC FujiCEM 2 a kezelhetőség és a fizikai tulajdonságok legjavát nyújtja az Ön teljes nyugalma érdekében.

Akár az automix vagy a kézi keverésű kiszerezést kedveli jobban, esetleg a fecskendő vagy a hagyományos fém adagolót preferálja...

A GC FujiCEM 2 mindezt egy termékben kínálja.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Válassza ki az Ön által preferált adagolót: a fém Paste Pak adagoló mellett elérhető a fecskendő-jellegű műanyag FujiCEM 2 adagoló is
- Válassza ki az Ön által preferált kezelési módot: automix vagy kézi keverés
- Az A és B paszták különböző színe segít, hogy homogén keveréket hozzon létre a pasztákból
- Csupán 10 µm rétegvastagság behelyezési nyomás alatt a jobb illeszkedés érdekében
- Új, magas elaszticitású keresztkötésű monomer jobb ellenálló képességgel az okkluzális nyomás kihívásaival szemben
- Klinikailag feloldhatatlan kémiai kötés garantált adhézió erővel
- Nincsen posztoperatív érzékenység
- Optimális fluoridleadás

INDIKÁCIÓK

A GC FujiCEM 2 egy költséghatékony anyag, amely indikációk széles köréhez alkalmas:

- Fém- és fémkerámia (PFM) koronák és hidak
- Magas erősségű kerámia (cirkon) koronák és hidak
- Kompozit inlay, onlay, koronák és hidak
- Teljes kerámia inlay
- Fém-, kerámia- és üvegszálcsapok

KISZERELÉSEK

GC FujiCEM 2 (13.3 g/7.2 ml patron)	
Bevezető csomagok	
900630	2 Paste Pak patron + Paste Pak adagoló (fém)
900631	2 Paste Pak patron + FujiCEM 2 adagoló (műanyag)
900632	2 paste Pak patron + 44 keverőcsőr + Paste Pak adagoló (fém)
900633	2 Paste Pak patron + 44 keverőcsőr + FujiCEM 2 adagoló (műanyag)
Utántöltők	
004603	2 Paste Pak patron
004602	2 Paste Pak patron és 44 keverőcsőr
GC FujiCEM 2 tartozékok	
001573	Paste Pak adagoló (fém)
004647	GC FujiCEM 2 adagoló (műanyag)
900446	GC FujiCEM 2 keverőcsőr utántöltő

GC Fuji PLUS (EWT)



Műgyantával megerősített üvegonomer ragasztócement

Kiemelkedő teljesítményének és a különböző színárnyalatainak köszönhetően a GC Fuji PLUS egy univerzálisan alkalmazható ragasztócement. A GC Fuji PLUS EWT megnövelt munkaideje lehetővé teszi nagy fesztávú hidak, kombinált munkák vagy több helyreállítás egyidejű beragasztását.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Könnyen keverhető és megmunkálható, akár egy átlagos cement, de mechanikai tulajdonságai a műgyanta alapú ragasztókéhoz hasonlóak
- Erős kémiai kötés a fogszerkezethez, mellyel kiiktathatók a bonyolult és nedvességre érzékeny eljárások
- Minimális a filmvastagság, egyszerű behelyezés, jó illeszkedés
- Nincs utóérzékenységi
- Nagyon alacsony oldékonyság, tartós széli zárás

- Röntgenárnyéka megkönnyíti a diagnózist

INDIKÁCIÓK

A GC Fuji PLUS sokoldalú, fémalapú helyreállítások, kerámia inlay-k, megerősített kerámia koronák és hidak, valamint bármely típusú akril/rezin korona, inlay, onlay és híd beragasztására alkalmas.

KISZERELÉSEK

GC Fuji PLUS P/F			
003211	Bevezető teljes készlet A3 (15 g por, 7 ml folyadék, 6,5 ml kondicionáló és tartozékok)		
Utántöltők			
003212	Sárga, 15 g por	003231	EWT, A3, 15 g por
003214	Transzlucens, 15 g por	003215	7 ml folyadék
003213	A3, 15 g por	000221	Kondicionáló, 6,5 ml
GC Fuji PLUS kapszula (50 db kapszula, megkevert térfogat kapszulánként 0.19 ml)			
003209	Sárga	003210	A3
GC Fuji PLUS Tartozékok			
002559	GC Adagolópisztoly IV, 1 db		

GC Fuji I



Üvegonomer ragasztócement

Több mint 25 év dokumentált használat bizonyítja, hogy a GC Fuji I biztonságosan és hatékonyan alkalmazható számos rutin ragasztási eljárás esetén.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Pulpakompatibilis és szövetbarát, alacsony az utóérzékenység kockázata
- Kiváló ragasztóhatás, tartós széli zárás
- Megnövelt munkaidő, jó keverési tulajdonságok, kényelmes használat
- Kis részecskeméret
- Könnyű behelyezés
- Gyors kötés
- Kiváló röntgenárnyék
- Hosszú távú fluoridleadás

INDIKÁCIÓK

A GC Fuji I ideális a rutinragasztásokhoz fémváz munkák esetén.

KISZERELÉSEK

GC Fuji I P/F	
003201	Bevezető készlet, 1-1 csomag Világossárga (35 g por, 20 ml folyadék, tartozékok)
Utántöltők	
003203	Világossárga, 35 g por
003205	20 ml folyadék
GC Fuji I Kapszula (50 db kapszula, megkevert térfogat kapszulánként 0.19 ml)	
003106	Világossárga
GC Fuji I P/F tartozékok	
002559	GC Adagolópisztoly IV, 1 db

GC Fuji TEMP LT



Ideiglenes üvegionomer ragasztócement, paszta-paszta formában

Az első hagyományos üvegionomer cement paszta-paszta formában, melyet kifejezetten hosszú távú ideiglenes ragasztásra terveztek. Biztos tartást nyújt, míg biztosítja az indirekt helyreállítások későbbi biztonságos eltávolítását.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Nem folyós konzisztencia és csekély filmvastagság
- A felesleges anyag könnyen eltávolítható
- Stabil és megbízható teljesítmény a hosszú távú ideiglenes ragasztások esetében
- Magas fluoridleadás és újratöltés
- Könnyen eltávolítható a pillér felszínéről
- Radiopak

KISZERELÉSEK

GC Fuji TEMP LT	
004253	2 x Paste Pak patron 13.3 g (7.2 ml) és keverőtömb
001573	Paste Pak adagoló

INDIKÁCIÓK

Az összes típusú teljes kerámia, rezin, akrilát és fémvázak koronák és hidak ideiglenes ragasztása.

Különösen ahhoz fejlesztett, hogy biztosítsa a megfelelő tartást és az implantált pillérre rögzített koronák és hidak eltávolíthatóságát.

GC Freegenol



Ideiglenes ragasztócement

Eugenolmentes ideiglenes ragasztóanyag ideiglenes koronákhoz, hidakhoz és különféle protetikai munkákhoz.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Eugenolmentes, nem fejt ki káros hatást a műgyanta tartalmú anyagok polimerizációjára
- Változtatható konzisztencia
- Könnyen eltávolítható a koronákról és a csonkokról
- Tisztító folyadékot is tartalmazó készlet

HASZNÁLATA

A kötési idő beállítható: több bázis - gyorsabb kötés; kevesebb bázis - lassabb kötés.

KISZERELÉSEK

GC Freegenol	
003440	1-1 csomag (55 g bázis, 20 g katalizátor, 2.5 ml tisztító folyadék és tartozékok)

GC Pliers



Koronaeltávolító fogó

Ideiglenes koronák és hidak, fémvázak bepróbálására és eltávolítására.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Ergonomikus kivitel, jól kontrollálható erő
- Biztos fogás
- Cserélhető gumitappancs, nem károsítja a fogműveket
- Ragasztó por a jó tapadás érdekében

KISZERELÉSEK

GC Pliers	
800111	GC Pliers tartozékokkal (50 db gumitappancs 4 g ragasztó por)
000237	Tartozékok (50 db gumitappancs, 4 g ragasztó por)

Ragasztási útmutató

GC ragasztócementek - Indikációs útmutató		Fuji I		FujiCEM 2	Fuji PLUS			G-CEM LinkAce	G-CEM
Cement típus		Hagyományos üvegionomer cement		Műgyantával megerősített üvegionomer	Műgyantával megerősített üvegionomer			Önragasztó rezin cement	Önragasztó rezin cement
Kiszerezés		Por/folyadék és kapszula		Kézi keverés és automix	Por/folyadék és kapszula			Automix	Kapszula
Fém / PFM	Inlay / Onlay	✓		✓	✓			✓	✓
	Koronák	✓		✓	✓			✓	✓
	Hidak	✓		✓	✓			✓	✓
	Gyökércsapok	✓		✓	✓			✓	✓
Kerámiák - alacsony erősségűek	Inlay / Onlay	✗		✓	✓			✓	✓
	Koronák	✗		✗	✗			✓	✓
	Hidak	✗		✗	✗			✓	✓
	Héjak	✗		✗	✗			✗	✗
Kerámiák - Magas erősségűek (alumínium, cirkon, lítium diszilikát)	Koronák	✓		✓	✓			✓	✓
	Hidak	✓		✓	✓			✓	✓
	Gyökércsapok	✗		✓	✓			✓	✓
Kompozit / Megerősített polimerek	Inlay / Onlay	✗		✓	✓			✓	✓
	Koronák	✗		✓	✓			✓	✓
	Hidak	✗		✓	✓			✓	✓
	Gyökércsapok	✗		✓	✓			✓	✓
		Fuji I	Fuji I CAPS	FujiCEM 2	Fuji PLUS	Fuji PLUS EWT	Fuji PLUS CAPS	G-CEM LinkAce	G-CEM Capsule
Keverési idő perc/másodperc		20"	10"	10"-15"	20"	20"	10"	10"-15"	10"
Munkaidő perc/másodperc (keveréstől számítva)		2'	2'15"	2'15"	2'30"	3'30"	2'	3'30"	2'30"
Végso finirozás megkezdési ideje perc/másodperc (helyreállítás behelyezésétől számítva)		4'30"	4'30"	4'30"	4'30"	5'45"	4'15"	4'30"	4'

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Fényre keményedő üveginomer paszta formában, ortodonciai ragasztásokhoz

A jól ismert GC Fuji ORTHO LC most elérhető a GC kényelmes automix kiszerezésében. Ez azt jelenti, hogy a fénypolimerizálás adta kényelem mellett élvezheti a mennyiség megválasztásának szabadságát is, garantáltan helyes keverési arányok mellett. A kiegyensúlyozott kötési erőnek köszönhetően a bracketek helyben maradnak a kezelés folyamán, de ugyanakkor könnyen el is távolíthatók. Ráadásul, védi a zománcot a folyamatos és újratölthető fluorid leadás, ami csökkenti a fehér foltok kialakulásának kockázatát az ortodonciai kezelés során.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- A patronos kiszerezés csökkenti az előkészítési időt
- Optimális kezelhetőség és lehetőség a választásra kézi keverés és automix közül
- Ellenőrzött adagolás, mely biztosítja a megfelelő mennyiséget minden indikáció esetén
- Kényelmes direkt applikálás a bracketekre az automix cső használatával
- Fénypolimerizálás 20 másodpercig
- Kiváló adhézió, még nedves körülmények között is
- Optimális fluorid leadás
- Könnyen eltávolítható bracketek, zománcsérülések nélkül

KISZERELÉSEK

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix	
003102	Kezdő készlet (1 x 13.3 g (7.2 ml) patron, 20 x keverőcsőr fényre keményedő anyaghoz, 2 x 1.4 g (1.2 ml) GC ORTHO Gel kondicionáló, 15 x ecsetvég)
Utántöltők	
003103	2 x 13.3 g (7.2 ml) GC Paste Pak patron
GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix tartozékok	
900549	20 x keverőcsőr fényre keményedő anyaghoz
001573	Paste Pak adagoló

GC Fuji ORTHO LC



Fényre keményedő üvegeionomer fogszabályozási ragasztócement

A fényre keményedő eljárás nagyobb kényelmet nyújt a fogszabályozó brackettek és gyűrűk felragasztásához.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Fénypolimerizáció 40 másodperc alatt
- Kiváló kötés még nedves környezetben is
- Egyszerűen applikálható
- Könnyen eltávolítható fogszabályozó készülékek, zománcsérülések nélkül
- Hosszú távú fluoridleadás
- Nem színeződik el

KISZERELÉSEK

GC Fuji ORTHO LC P/F	
000027	Bevezető csomag (15 g por; 6.8 ml folyadék és tartozékok)
Utántöltők	
000029	40 g por
000030	6.8 ml folyadék
GC Fuji ORTHO LC kapszula (megkevert térfogat kapszulánként 0.10 ml)	
000034	50 db kapszula
001820	Kondicionáló, 23.8 ml folyadék
Tartozékok	
002559	GC Kapszulaadagoló IV, 1 db

GC Fuji ORTHO



Önkötő üvegeionomer fogszabályozási ragasztócement

A kompozitok és az üvegeionomerek tulajdonságainak ideális kombinációja fogszabályozó készülékek ragasztására.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kiváló kötés még nedves környezetben is
- Könnyen applikálható
- Könnyen eltávolítható fogszabályozó készülékek, zománcsérülések nélkül
- Önkötő
- Hosszú távú fluoridleadás
- Nem színeződik el

KISZERELÉSEK

GC Fuji ORTHO P/F	
000208	Bevezető csomag, 1-2 csomag (1 x 40 g por, 2 x 6.8 ml folyadék és tartozékok)
Utántöltők	
000209	40 g por
000210	6.8 ml folyadék
001820	Kondicionáló, 23.8 ml folyadék

GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak (automix kompatibilis)

Fényre keményedő üveginomer ragasztócement paszta-paszta formában fogsabályzó gyűrűkhöz

A fényre keményedő GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak anyagot kifejezetten a gyűrűk és készülékek rögzítésére fejlesztették ki. Az anyag nagyon egyszerűen keverhető, hiszen a GC igen kényelmes Paste Pak rendszerében érhető el. A kék szín és a fénypolimerizálás által szabályozott keményedés egy kényelmesen használható ortodonciai anyagot eredményeznek. A kiegyensúlyozott kötési erőnek köszönhetően a gyűrűk és készülékek biztosan a helyükön maradnak a kezelés ideje alatt, ugyanakkor egyszerűen eltávolíthatók. Ráadásul a folyamatos és újratölthető fluoridleadás segíti a zománc védelmét és csökkenti a fehér foltok kialakulásának kockázatát az ortodonciai kezelés alatt.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Gyűrűk és készülékek ragasztásához
- A szabályozott adagolású patronos kiszerelés megfelelő mennyiséget biztosít minden indikáció esetén
- Kényelmes direkt applikálás a gyűrűkre az automix csőr segítségével
- Lehetőség az ön- és a fényre kötés közti választásra a szabályozott keményedés érdekében
- Öt és fél perces munkaidő
- Optimális kezelhetőség
- Kék szín az ellenőrizhető applikálás és eltávolítás érdekében
- 20 másodperces fénypolimerizálás
- Magas fluoridleadás
- Kiváló adhézio, nedves körülmények között is
- Könnyen eltávolítható fogsabályzó készülékek, zománcsérülések nélkül

KISZERELÉSEK

GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak	
003105	2 x 12.9 g (7.2ml) patron, GC keverőlap N°22
GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak tartozékok	
001573	Paste Pak adagoló
900549	Keverőcsőr LC-hez, 20 db

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak



Műgyantával megerősített üvegonomer cement gyűrűk ragasztására, paszta formában

A világon az első paszta formában kapható fogszabályozási ragasztócement, mely ötvözi az ortho cementek és a paszta kiszerelés terén szerzett szaktudást.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Gyűrűk és készülékek ragasztására
- Paste Pak patronos kiszerelés
- A filmvastagság mindössze 9 µm
- Optimális kezelhetőség
- Magas fluoridleadás
- Kék szín
- A felesleg könnyen eltávolítható felhelyezéskor és az eltávolítást követően

KISZERELÉSEK

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak	
001888	2 db Paste Pak patron, 2 x 13.3 g / 7.2 ml és keverőlap
GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak tartozékok	
001820	Kondicionáló, 23.8 ml folyadék
001573	Paste Pak adagoló

GC ORTHO Gel Conditioner



Ortodonciai kondicionáló zselé

Egyedülálló 20%-os poliakril savas zselé, mely arra lett kifejlesztve, hogy enyhén kondicionálja a fogzománcot a GC ortodonciai ragasztócement applikálása előtt. A kondicionáló zselé hatékonyan megtisztítja a felszínt, hogy a zománc károsítása nélkül növelje a kémiai kötés erejét. A kondicionáló zselé fecskendő kiszerelésben érhető el ecsetvégekkel, a könnyű applikáció érdekében.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Növeli a kötési erőt a zománc károsítása nélkül
- Fecskendő kiszerelésben érhető el ecsetvégekkel az egyszerűbb applikáció érdekében
- Kék árnyalat az applikáció kontrollálása érdekében

HASZNÁLAT

Tisztítsa meg a fog felszínét horzsakőporral és vízzel, majd alkalmazza ORTHO Gel Conditioner-t 10 másodpercig. Alaposan öblítse le. Távolítsa el a felesleges nedvességet nedves vattagömböccel, ezzel elkerülve a felszín dehidratálódását.

KISZERELÉSEK

GC ORTHO Gel Kondicionáló	
003104	3 x 1.4 g (1.2 ml) fecskendő, 25 x ecsetvég

GC EXA'lence

Vinil poliéter szilikon lenyomatanyag

Az EXA'lence bevezetésével a GC kifejlesztette az ideális megoldást az összes klinikai alkalmazásra, és feleslegessé teszi a lenyomatanyag típusát érintő nehéz döntések meghozását. A belső hidrofilitás és a szakítási ellenállás kombinációja egy anyagban biztosítja, hogy ezentúl minden körülmények között kiváló lenyomatokat készíthet. Az EXA'lence termékskálája mind a fogorvosok, mind a fogtechnikusok igényeit kielégíti, hiszen különböző viszkozitásokat és kötési időket kínál. Megjósolhatatlan körülmények között is tökéletes lenyomatot készíteni a tökéletesen illeszkedő helyreállítások érdekében - ez mostantól minden fogászati szakember számára lehetséges.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kötés előtti nedvesíthetőséget biztosít, így még nedves körülmények között is tökéletes részletvisztaadást garantál
- A kötés után is hidrofil marad a kiöntéskor elérhető legmagasabb pontosság érdekében
- Ellenálló formulája kiküszöböli a szájból vagy a kiöntött modelltől való eltávolításkor bekövetkező szakadás kockázatát
- Hosszú munkaidő, rövid kötési idő
- Enyhén mentolos íze kellemes a páciensnek
- A két viszkozitás színei közötti határvonal könnyen felfedezhető

KISZERELÉSEK

GC EXA'lence	
GC EXA'lence Regular, normál kötési 48 ml Patron	
137907	Extra Light Body, 2 patron, 6 keverőcsőr SS méret (sárga)
137908	Light Body, 2 patron, 6 keverőcsőr SS méret (sárga)
137916	Medium Body, 2 patron, 6 keverőcsőr L méret (kék)
137904	Heavy Body, 2 patron, 6 keverőcsőr L méret (kék)
137905	HeavyRigid Body, 2 patron, 6 keverőcsőr L méret (kék)
GC EXA'lence Fast Set, gyors kötési 48 ml patron	
137912	Extra Light Body, 2 patron, 6 keverőcsőr SS méret (sárga)
137913	Light Body, 2 patron, 6 keverőcsőr SS méret (sárga)
137911	Medium Body, 2 patron, 6 keverőcsőr L méret (kék)
137909	Heavy Body, 2 patron, 6 keverőcsőr L méret (kék)
137910	HeavyRigid Body, 2 patron, 6 keverőcsőr L méret (kék)
GC EXA'lence Putty, 500 g (278 ml) bázis, 500 g (278 ml) katalizátor	
137810	Standard 1-1 csomag tartozékokkal
137866	Klinikai 5-5 Pack csomag tartozékokkal
GC EXA'lence 370 Regular, normál kötés, 370 ml patron	
137871	Standard készlet, Medium Body, 1 patron, 10 dinamikus keverőcsőr, 1 Bayonet zárógűrű
137274	Medium Body, 2 patron, utántöltő
137868	Klinikai csomag, Medium Body, 6 patron
137872	Standard Kit, Heavy Body, 1 patron, 10 dinamikus keverőcsőr, 1 Bayonet zárógűrű
137273	Heavy Body, 2 patron utántöltő
137867	Klinikai csomag, Heavy Body, 6 patron
GC EXA'lence 370, Fast set, gyors kötés, 370 ml patron	
137874	Standard készlet, Medium Body, 1 patron, 10 dinamikus keverőcsőr, 1 Bayonet zárógűrű
137272	Medium Body, 2 patron, utántöltő
137860	Klinikai csomag, Medium Body, 6 patron
137873	Standard Kit, Heavy Body, 1 patron, 10 dinamikus keverőcsőr, 1 Bayonet zárógűrű
137271	Heavy Body, 2 patron, utántöltő
137869	Klinikai csomag, Heavy Body, 6 patron
GC EXA'lence tartozékok	
150004	GC Dinamikus keverőcsőr, 370 ml (50)
150005	GC Bayonet zárógűrű, 370 ml (5)
138900	GC Univerzális adhezív EXA anyagokhoz 7 ml
890130	GC Keverőcsőr II, 60 x SS (Sárga)
900114	GC Keverőcsőr II, 60 x SS (Zöld/Kék)
800119	GC Intraorális csőr, 100 db
900483	GC Intraorális csőr, 100 db Sárga
800006	Patronadagoló II

Lenyomatvételi technikák

1 FÁZISÚ - 1 IDEJŰ

Az egyfázisú anyag nyomás alatt létrehoz egy stabil alapot. Ugyanezt az anyagot fecskendezzük a preparáció köré, hogy megkapjunk egy minden részletet visszaadó reprodukciót.



INDIKÁCIÓK

Teljes fogsor, inlay-k, héjak, onlay-k, részleges koronák, preparáció nélküli lenyomatok, pick-up lenyomatok, implantátumok, koronák és hidak.

2 FÁZISÚ - 1 IDEJŰ

A Heavy Body anyagok stabil alapot alkotnak a kanálban.

A Light Body vagy Extra Light Body precíziós lenyomatanyagok befedik a fogat a tökéletesen részletes reprodukció érdekében.




INDIKÁCIÓK

Inlay-k, héjak, onlay-k, részleges koronák, preparáció nélküli lenyomatok, implantátumok, koronák és hidak.

2 FÁZISÚ - 2 IDEJŰ

Első lenyomatként Putty vagy Heavy Body anyaggal stabil alapot készítünk.

A GC elválasztó hátrák használata ajánlott, mivel így szükségtelenné válik a lenyomat kivágása. A precíziós fázist a második lenyomatvételnél az Extra Light Body vagy Light Body anyaggal valósítjuk meg.

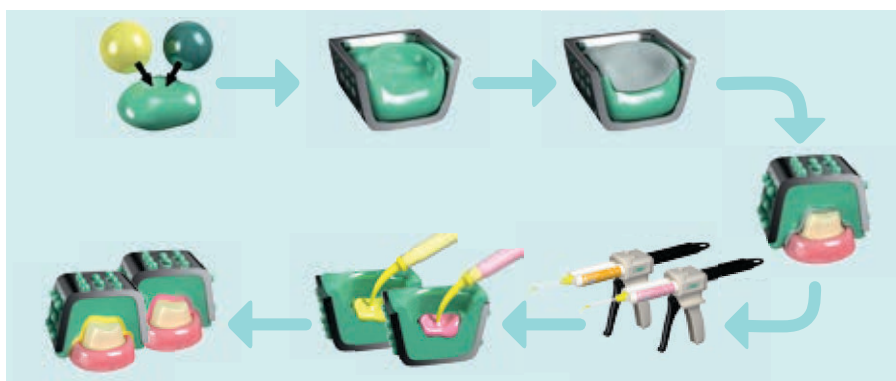

INDIKÁCIÓK

Koronák, hidak, inlay-k, onlay-k és héjak.

GC Examix NDS & GC Exaflex Putty



Normál kötésű A-szilikon lenyomatanyag

Tixotróp lenyomatanyag patronos kiszerezésben, mely alkalmazható az összes közkezdelt lenyomatvételi technikához. Adaptált folyékonyága, megnövelt munkaideje és meredek kötési görbéje igen egyszerűen használható A-szilikonná teszi.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Tixotróp tulajdonságú, a részleteket pontosan visszaadja
- Nagyfokú rugalmasság és szakítószilárdság, könnyen eltávolítható a szájból
- Nagyfokú térfogatállóság, egyenletes folyási képesség, problémamentes lenyomatvétel
- Gyökfogó hidrogénvegyület, azonnal kiönthető gipsszel

KISZERELÉSEK

GC Examix NDS	
137106	Injection (réz), 2 db patron, egyenként 48 ml, 6 keverőcsőr II, S méret (rózsaszín)
137016	Regular (kék), 2 db patron, egyenként 48 ml, 6 keverőcsőr II, L méret (kék)
137406	Monophase (lila), 2 db patron, egyenként 48 ml, 6 keverőcsőr II, LL méret (lila)
GC Examix NDS tartozékok	
800006	Patronadagoló II
GC Exaflex Putty	
138801	Putty, 1-1 csomag (500 g világoskék bázis, 500 g sárga katalizátor)
138885	Putty, 5-5 csomag (5 x 500 g világoskék bázis, 5 x 500 g sárga katalizátor)

GC Exafast NDS és GC Exafast Putty



Gyors kötésű A-szilikon lenyomatanyag

Az A-szilikon lenyomatcsalád képviselői, melyek arra lettek kifejlesztve, hogy mindössze kb. 2 perc alatt nagy pontosságú lenyomatokat készíthessen.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Gyors kötés, rövidebb szájból töltött idő
- Tixotróp tulajdonságú, nagyfokú térfogatállóság, egyenletes folyási képesség
- Nagyfokú rugalmasság és szakítószilárdság, könnyen eltávolítható a szájból
- Gyökfogó hidrogénvegyület, azonnal kiönthető gipsszel

KISZERELÉSEK

GC Exafast NDS	
137107	Injection (réz), 2 db patron, egyenként 48 ml, 6 keverőcsőr II, S méret (rózsaszín)
137007	Regular (kék), 2 db patron, egyenként 48 ml, 6 keverőcsőr II, L méret (kék)
137407	Monophase (lila), 2 db patron, egyenként 48 ml, 6 keverőcsőr II, LL méret (lila)
GC Exafast NDS tartozékok	
800006	Patronadagoló II
GC Exafast Putty	
137307	1-1 csomag (500 g kék bázis, 500 g sárga katalizátor)
137305	Putty, 5-5 csomag (5 x 500 g kék bázis, 5 x 500 g sárga katalizátor)

GC Exajet



A-szilikon lenyomatanyag
fóliatasakban

A-szilikon alap lenyomatanyag,
mely a GC lenyomatanyag- és
kanálrendszerének szerves részeként
lett kifejlesztve.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Optimalizált viszkozitás, pontosan
behelyezhető a kanál
- Nagyfokú elaszticitás, könnyen
eltávolítható a szájból és a gipszmintáról
- Normál és gyors kötésű változat
- Dinamikus keverés, közvetlen aktiválás
- A patron beleillik minden standard
keverőgéphe

KISZERELÉSEK

GC Exajet Normál kötésű	
800085	Bevezető csomag, 300 ml bázis, 62 ml katalizátor, 1 db patron és 10 db dinamikus keverőcsőr
800086	Utántöltő csomag, 2 x 300 ml bázis, 2 x 62 ml katalizátor
800087	Klinikai csomag, 6 x 300 ml bázis, 6 x 62 ml katalizátor
GC Exajet Gyors kötésű	
800082	Bevezető csomag, 300 ml bázis, 62 ml katalizátor, 1 db patron és 10 db dinamikus keverőcsőr
800083	Utántöltő csomag, 2 x 300 ml bázis, 2 x 62 ml katalizátor
800084	Klinikai csomag, 6 x 300 ml bázis, 6 x 62 ml katalizátor
GC Exajet tartozékok	
800088	1 db patron
800089	50 dinamikus keverőcsőr

GC Aroma Fine PLUS



Alginát lenyomatanyag

Továbbfejlesztett, új ólom- és
pormentes alginát lenyomatanyag ultra
finom alginát szemcsékkel.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kiemelkedően jó por-víz affinitás,
könnyebben, gyorsabban keverhető
- Keverés során kevesebb légbuborék
keletkezik
- Tixotróp tulajdonságú, enyhe nyomásra
folyékonnyá válik
- Kellemes menta íz
- Egyenletesebb felszín a rendkívül pontos
lenyomat és sima gipszminták érdekében

KISZERELÉSEK

GC Aroma Fine PLUS (10 x 1 kg)	
004107	Normál kötésű (rózsaszín)
004108	Gyors kötésű (zöld)
GC Aroma Fine PLUS (5 x 1 kg)	
900636	Normál kötésű (rózsaszín)
900635	Gyors kötésű (zöld)

GC Dentulous Trays



Krómozott fém, rozsdamentes acél és műanyag fogas lenyomatkanalak

Ezeket a GC gyári kanalakat kifejezetten fogazattal rendelkező pácienseknél való használatra tervezték. A nagy választék a kanalak különböző méretéből, alakjából és típusából adódik.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

Krómozott fém lenyomatkanalak

- Merev, de hajlítható a pontosabb egyéni illeszkedésért
- Ellenáll a sterilizációnak
- Hegesztett perem a kanálszálon, nyomástűrés a lenyomatvétel alatt

Rozsdamentes acél lenyomatkanalak

- Ellenáll a sterilizálásnak
- Hegesztett perem a kanálszálon, nyomástűrés a lenyomatvétel alatt

Műanyag lenyomatkanalak

- Egyedi kanyarulatok perem, minimális anyagelmozdulás
- Perem a kanálszálon, nyomástűrés a lenyomatvétel alatt
- Eldobható

GC Edentulous Trays



Krómozott fém fogatlan lenyomatkanalak

A krómozott fém GC lenyomatkanalak kifejezetten fogatlan páciensek számára lettek tervezve, annak érdekében, hogy ezek a kanalak megfeleljenek a páciens anatómiai adottságainak.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Merev kanál, nagyobb pontosság
- Hajlítható fém, egyénileg beállítható illeszkedés
- Perforáció és hegesztett perem (a kanál külső felületén), optimális retenció
- Speciális kialakítás annak érdekében, hogy az alginát minden területre eljusson, a kemény és lágy részek tökéletes visszaadása
- Sterilizációnak ellenáll

MEGJEGYZÉS

Napi használatra válassza a GC Standard kanalakat. A páciens anatómiai adottságaihoz való igazodáshoz a négyszögletes, kúpos és ovoid alakban létező GC STO-K kanalakat válassza. Immediát fogpótlások készítéséhez GC McGowan kanalakat válasszon.

GC Closed-Bite Trays



Harapásellenőrző háromfunkciós, szél nélküli és duplaívű kanalak

Amennyiben háromfunkciós kanalat vagy harapásellenőrző kanalat keres, a GC gazdaságos, eldobható, robosztus megoldást kínál, bármely méretre.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Mikro vékony, hajlékony hártya, nem torlódik fel a retromoláris tájékon, nem gátolja a teljes összezárást
- Erős markolat és keret, egyszerű behelyezés és eltávolítás
- Anterior és poszterior változat a megfelelő ívfedéért
- Költséghímélő

MEGJEGYZÉS

GC harapásellenőrző háromfunkciós kanalak: alkalmasak precíziós és antagonista lenyomatvételre, valamint a harapás rögzítésére egy lépésben.
GC háromfunkciós szél nélküli: mind a négy ívhez használható.
GC duplaívű kanál: segítségével a minta a valós okkluzális kapcsolatot tükrözi.

GC Impression Separation Wafer



Polietilén helyfenntartó fólia kétfázisú kétidejű lenyomatvételi technikához

Az 1 mm vastag polietilén helyfenntartó habfólia egyenletes helyet alakít ki az első lenyomatban, mely így a továbbiakban egyéni kanálként alkalmazható. Ezzel az egyszerű technikával a lenyomatanyag maximális rugalmassága kihasználható, az eltávolításkor nem lép fel maradandó deformáció.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Az orvosok számára lehetővé teszi egy direkt egyéni kanál létrehozását a székben
- A fólia mintát hagy a lenyomatanyag felszínén az extra retenció érdekében
- Könnyen elsajátítható, nem szükséges körbevágni a lenyomatot
- Csak egy időpontra van szükség
- Olcsóbb és gyorsabban kivitelezhető
- Az alsó és a felső íven történő lenyomatvételhez is alkalmas

HASZNÁLAT

A szeparáló fólia méretét össze kell vetni a választott GC gyári lenyomatkanállal (lehetőleg merev fém). Ahol szükséges, a fólia részei eltávolíthatóak ollóval. Az első lenyomatot GC Exaflex Putty-val vagy GC Exafast Putty-val vegye le.

KISZERELÉSEK

GC Impression Separation Wafer	
800099	30 db dobozban

GC Bite Compound



Lenyomatanyag
harapásrögzéshez

KISZERELÉSEK

GC Bite Compound	
001407	120 g dobozban (15 rúd, egyenként 8 g)

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Alacsony lágyulási hőmérséklet: 53°C
- Nem ragadós
- Hosszú munkaidő
- Okkluzális viszonyok ellenőrzése

GC ISO Functional Sticks



Termoplasztikus rudak funkció
lenyomatvételhez és
alábéleléshez

KISZERELÉSEK

GC ISO Functional Sticks	
000043	120 g dobozban (15 rúd, egyenként 8 g)

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Könnyen felmelegíthető 62°C fokon
- Hideg vízben gyorsan megkeményedik
- Széles körű alkalmazás

HASZNÁLAT

Lenyomatvételre nyújtáskor nem szálkásodó
állapotban alkalmazható.

GC Treclean



Lenyomatkanál-tisztító

Lenyomatkanalakon visszamaradt
alginát eltávolítására szolgáló
tisztítópor.

KISZERELÉSEK

GC Treclean	
001144	1.2 kg dobozban

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Vízzel könnyedén összekeverhető
- A visszamaradt alginát folyóvízzel
egyszerűen eltávolítható

GC Unifast III



Önkötő akrilát hosszú távú ideiglenes pótlásokhoz

Az új SURF technológia, mely a polimerreszecskek előállításának egy forradalmian új módszere, garantálja a buborékmentes és kivételesen egyenletes színű keveréket. Fizikai tulajdonságai, kezelhetősége és esztétikumuk meghaladja a por-folyadék műanyagoktól elvárható szintet.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Egyszínes ideiglenes vagy rétegzett többszínes esztétikus hosszú távú ideiglenes pótlásokhoz
- Kiváló kezelhetőség ecsettechnikával és keveréssel egyaránt
- Optimális tixotrópia, kontrollált folyékonyság
- Dentin-, zománc- és élszínek gazdag választéka
- A természetes fogéval egyező, optimális transzlucencia

- Könnyedén elérhető esztétikus, fényes felszín a G-Coat PLUS-szal

INDIKÁCIÓK

- Ideiglenes koronák és hidak
- Inlay-k
- Ínyreprodukció
- Implantátumos hidak
- Implantátumcsavarok helyének lezárása
- Fogsorok javítása
- Csúsztatós fogsorok

KISZERELÉSEK

GC Unifast III	
003464	Intro 2-1 csomag, A2-A3 (35 g por A2-A3, 42 ml folyadék és tartozékok)
Utántöltők	
Utántöltő por 35 g A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8 (Erezett pink)	
Utántöltő por 100 g A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8 (Erezett pink)	
Utántöltő por 300 g A2, A3, Incisal, No.8 (Erezett pink)	
003489	Folyadék 40g (42 ml)
003490	Folyadék 100 g (104 ml)
003491	Folyadék 250 g (260 ml)
GC Unifast III tartozékok	
002654	Műanyag tartó
002687	Ecset No. 10
002688	Eldobható adagolótálca (50 db) No. 2

GC Unifast TRAD



Önkötő akrilát

Univerzális műanyag ideiglenes inlay-k, onlay-k, koronák és hidak, illetve (részleges) fogsorok javításához.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Préselő- és ecsettechnikához
- Gyorsan kötő
- Nagymértékben térfogatálló
- Hosszú távú ideiglenes fogműnek alkalmas

KISZERELÉSEK

GC Unifast TRAD P/F	
339104	Ivory, 100 g por
339103	Pink X, 100 g por
339105	Live Pink, N° 8, 100 g por
339114	Ivory, 250 g por
339113	Pink X, 250 g por
339115	Live Pink, N° 8, 250 g por
339124	Ivory, 1 kg por
339123	Pink X, 1 kg por
339125	Live Pink, N° 8, 1 kg por
339291	104 ml folyadék
339292	260 ml folyadék

GC Unifast LC



Fényre keményedő akrilát

Fényre keményedő műanyag elsősorban ideiglenes inlay-k, onlay-k, koronák, hídak készítéséhez.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Könnyen applikálható
- Bonyolult esetekben is alkalmazható
- Először önkötéssel egy gumiszerű állapotba szilárdul, mely könnyen eltávolítható a szájból
- Végso fénypolimerizációval kontrollált kötés
- Kiváló keménység, térfogatállóság
- Kiszerezések

KISZERELÉSEK

GC Unifast LC P/F					
338006	Intro 6-2 csomag (6 x 30 g por; 2 x 14.3 ml folyadék)				
Utántöltők: 50 g por					
000363	A2	000365	B2	000367	C2
000364	A3	000366	B3		
000362	Transzlucens				
000368	2 x 14.3 ml folyadék				

GC Revotek LC



Egykomponensű ideiglenes korona/híd anyag

A GC Revotek LC az első egykomponensű, fényre keményedő kompozit rezin ideiglenes helyreállítások készítésére, rúd alakban.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Nem kell keverni, nincs szükség lenyomatra
- 60 átlagos inlay-hez vagy 30 átlagos méretű koronához elegendő
- Fényre keményedő kompozit, nincs hőfejlődés, szagtalan és nincs kémiai irritáció
- Erős és tartós, magas kopásállóságú
- Kismértékben zsugorodik, tökéletes az illeszkedés

HASZNÁLAT

Vágja le a szükséges mennyiséget. Formázza meg az anatómiának megfelelően. Fénykezelje a szájüregben 10 másodpercig. Ezután távolítsa el, és fénykezeljen minden felszínt egyenként 20 másodpercig.

KISZERELÉSEK

GC Revotek LC	
001842	Intro csomag, B2 színárnyalat (1 rúd, 1 fényvédő rekesz, 1 GC spatula N° 2)

GC Fit Checker Advanced



Fehér VPES szilikon az illeszkedés pontosságának ellenőrzésére fémalapú helyreállítások és fogpótlások esetén

Vinyl PolyEther anyag a nyomáspontok- és indirekt helyreállítások illeszkedésének ellenőrzésére. Köszönhetően nagyon vékony konzisztenciájának és hidrofilitásának, használata kényelmes és a pótlások illeszkedésének pontos megfigyelését teszi lehetővé.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Elérhető kézi keverés és automix kiszerelésben egyaránt
- Tixotróp konzisztenciájának köszönhetően könnyen applikálható
- Minimális filmvastagság, amely nagy

pontossággal ad vissza minden részletet

- Magas szakítási ellenállás az ellenőrzés utáni könnyű eltávolítás érdekében
- Megnövelt keménység a sima és könnyű trimmeléshez

KISZERELÉSEK

GC Fit Checker Advanced tubus	
004903	Fehér, 1-1 csomag, (55 g (42 ml) bázis, 50 g (42 ml) katalizátor, 3g retarder, keverőlap)
GC Fit Checker Advanced patron	
004904	Fehér, 2 x 62 g (48 ml) patron, 3 db keverőcsőr IIS (rózsaszín), 3 db keverőcsőr IIS (sárga)
GC Fit Checker Advanced tartozékok	
800006	Patronadagoló II

HASZNÁLAT

- Munkaidő: 1 perc
Szájban töltött idő minimálisan: 1 perc

GC Fit Checker Advanced Blue



Kék színű VPES szilikon az illeszkedés és okklúzió pontos ellenőrzésére kerámia helyreállítások esetén

A GC Fit Checker Advanced Blue vékony viszkozitásának és pontos kötési idejének köszönhetően nagyon könnyen applikálható. Megfelelő transzparenciája és kék színe jól megfigyelhető és tökéletes kontrasztot biztosít az esztétikus pótlásokkal, mint pl. kerámia alapú koronák és hidak.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Elérhető kézi keverés és automix kiszerelésben egyaránt
- Megfelelő folyékonyság tixotrópiával párosítva
- Minden részletet pontosan visszaad

- Transzparens kék szín az okklúzió pontos ellenőrzésére még 100 µm vastagság alatt is
- Magas szakítószilárdság a könnyű eltávolításért és megnövelt keménység a könnyű trimmelés érdekében

KISZERELÉSEK

GC Fit Checker Advanced Blue patron	
004905	Kék, 2 x 56 g (48 ml) patron, 3 db keverőcsőr IIS (rózsaszín), 3 db keverőcsőr IIS (sárga)
GC Fit Checker Advanced tartozékok	
800006	Patronadagoló II

HASZNÁLAT

- Munkaidő: 1 perc
Szájban töltött idő minimálisan: 1 perc

GC Exabite II NDS



Harapásrögzítő anyag

A-szilikon anyag, melynek tulajdonságait kifejezetten harapásrögzítéshez igazították.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Keverés és alkalmazás közvetlenül a patronból
- Tixotróp tulajdonságú, mely ideális egyensúlyt biztosít a stabilitás és a folyékonyság között

- Biztonságot nyújt a minták artikulátorba helyezésekor
- Könnyen vágható

KISZERELÉSEK

GC Exabite II NDS	
890014	2 db patron, egyenként 48 ml, 6 db keverőcsőr (L méret)
132488	8 db patron, egyenként 48 ml, 24 db keverőcsőr (L méret)
GC Exabite II NDS tartozékok	
800006	Patronadagoló II

HASZNÁLAT

Meredek kötési görbe: munkaidő 45 másodperc, kötési idő csupán 45 másodperc

GC Tissue Conditioner



Puhán maradó akril nyálkahártya-kondicionáló és fogsor-alábélelő anyag

A GC Tissue Conditioner igazi új generációs, korszerű, akril alapú, puha fogsor-alábélelő anyag, melyet a GC szabadalmaztatott. A GC Tissue Conditioner nagyszerű választás, ha hosszú ideig puhán és tisztán maradó anyagot keres. A GC Tissue Conditioner-t kondicionálásra, puha alábélelésre és funkcionális lenyomatvételre is használhatja.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Tökéletes konzisztenciája és folyékonyága könnyen applikálhatóvá teszi
- A szájba illesztés mindössze 5 percet vesz igénybe
- Egyedülálló, szabadalmaztatott formulája és speciális bevonata véd az idő során bekövetkező lekopástól és a kialakuló szagoktól
- Kiváló felületi simaságának köszönhetően óriási segítséget nyújt a gyógyuláshoz, és higiéniailag is kifogástalan
- Hosszantartó puhaság, képes a nyálkahártya változásaihoz idomulni
- Új anyagréteg hozzáadása bármikor lehetséges

INDIKÁCIÓK

- Nyálkahártya-kondicionálás
- Puhán maradó alábélelés
- Funkcionális lenyomatvétel
- Azonnali fogsorok
- Direkt implantációs technikák

KISZERELÉSEK

GC Tissue Conditioner	
002894	Intro 1-1 csomag, élő pink
002895	Intro 1-1 csomag, fehér
Utántöltők	
002897	Élő pink, 90 g por
002896	Fehér, 90 g por
002892	Folyadék utántöltők. 101 ml
002893	Coating Agent védő bevonat, 15 ml

GC Reline



Székben használható kemény fogsor-alábélelő anyag

Rendelőben használható, metilmetakrilát-mentes műanyag, teljes és részleges fogsorok hosszú távú alábélelésére.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Rendelői, egyszerű, közvetlen használat
- MMA-mentes, nem okoz kémiai szövetirritációt
- Minimális hőfejlődés, kellemes illat
- A végső polírozás már a keverés kezdetétől számított öt és fél perc múlva elvégezhető

MEGJEGYZÉS

Alámenős részek esetén a fogsort távolítsa el, miután az anyag elérte a gumszerű állapotát. A felesleg eltávolítását követően helyezze vissza a végső kötésig.

KISZERELÉSEK

GC Reline	
346000	Intro csomag, Standard csomag P/F (80 g por, 50 ml folyadék, 12 g (12 ml) bondanyag, tartozékok)
Utántöltők	
346002	80 g por
346191	50 ml folyadék
346099	Bondanyag, 12 g (12 ml)

GC Reline Extra Soft



Extra puha szilikon alábélelő anyag

A-szilikon alapú szövet-tehermentesítő anyag, felfekvési pontok kezelésére fogatlan páciensek esetében.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Hosszan tartó rugalmasság és térfogatállóság
- Nyomás hatására folyékonnyá válik
- Patronos kiszerezés, egyszerű, közvetlen használat
- Nincs hőfejlődés, szagtalan

KISZERELÉSEK

GC Reline Extra Soft	
004841	Intro csomag, 56 g (48 ml) patron, 6 keverőcsőr II (L méret) (kék), Primer R 12 g (13 ml), finírozó korong, Modifier A és B, egyenként 10 g (9 ml), tartozékok
Utántöltők	
004844	56 g (48 ml) patron
000602	Primer R, 12 g (13 ml) folyadék
000603	Modifier, 1-1 csomag, A+B egyenként 10 g (9 ml), keverőpad, szivacs
GC Reline Extra Soft tartozékok	
800006	Patronadagoló II

GC Reline Soft



Puha szilikon alábélelő anyag

A-szilikon fogsor-alábélelő anyag hosszú távra, főleg azokra az esetekre, amelyekben támasztószövet-hiánnyal állunk szemben.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Patronos kiszerezés, egyszerű, közvetlen használat
- Hosszú távon is rugalmas marad, ütéselnyelő képessége kiváló
- Szilikon, nincs hőfejlődés, szagtalan
- Nyomás hatására jól folyik

KISZERELÉSEK

GC Reline Soft	
004840	Intro csomag, 62 g (48 ml) patron, 6 keverőcsőr II (L méret) (kék), Primer R 12 g (13 ml), finírozó korong, Modifier A és B, egyenként 10 g (9 ml), tartozékok
Utántöltők	
004843	62 g (48 ml) patron
000602	Primer R, 12 g (13 ml) folyadék
000603	Modifier, 1-1 csomag, A+B egyenként 10 g (9 ml), keverőpad, szivacs
GC Reline Soft tartozékok	
800006	Patronadagoló II

GC Coe-Pak (Automix)



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Patronos vagy kézi keverésű kiszerezés
- Könnyen formázható
- Rugalmas konzisztencia
- Páciensbarát
- Segíti a gyógyulási folyamatot
- Eugenol mentes, műgyanta tartalmú anyagokkal kompatibilis
- Nem tapad a kesztyűhöz

Parodontális pakolás

Kétkomponensű anyag sebpakolásra, sebek és varratok befedésére, fogeltávolítás sebének stabilizálására.

KISZERELÉSEK

GC Coe-Pak Automix NDS	
135003	2 patron, egyenként 50 ml, 12 db keverőcsőr
GC Coe-Pak Automix NDS tartozékok	
800006	Patronadagoló II
GC Coe-Pak (90 g bázis, 90 g katalizátor)	
135801	Normál kötés
135301	Kemény és gyors

A MEGFELELŐ TERMÉKEK AZ ÖN PROTETIKAI MUNKÁIHOZ...

A legtöbb protetikai munka során az első lépés egy jó minőségű modell elkészítése. A GC büszkén ajánlja Európa egyik legkedveltebb IV. osztályú fogászati gipszét, a GC Fujirock EP-t. A kiemelkedő minőségű IV. osztályú fogászati gipsz ideális minden fogmű készítéséhez, mivel nagy pontosságú, kiemelkedően kemény a széleknél és magas nyomásslábadású. Ugyanezt a kiváló minőséget elérheti a tükröződésmentes **GC Fujirock EP OptiXscan**-nel, mely minden modern képalkotó eljáráshoz alkalmazható, a minimális hőtágulású alátalpalásokhoz pedig itt a higan folyó **GC Fujirock EP OptiFlow**. Gyakran a modellálás a következő lépés, melyhez a **GC Pattern Resin** a megfelelő választás. A **GC Pattern Resin** már bizonyított a következő területeken: egyéni csúsztatók, rögzítések, implantációs felépítmények készítése, valamint műanyag csontok készítése galvántechnikához.

A GC a koronákhoz és hidak öntéséhez alkalmazható foszfátbázisú beágyazóanyagok gyártásáról ismert. Az új **GC Fujivest Platinum II** és **GC Fujivest Premium**-mal a GC egy újabb mérföldkőhöz érkezett a koronák és hidak öntésének területén. A **GC Fujivest Platinum II**-t nemesfém, félnemesfém és Pd-alapú ötvözetekhez készítették. A **GC Fujivest Premium** a legjobb választás, ha a lehető legnagyobb pontosságra törekszik nemnemesfém ötvözetekkel. Továbbá kínáljuk a méltán híres **GC Fujivest Super**-t speciálisan nemesfém, félnemesfém és Pd-alapú ötvözetből készült precíziós öntésekhez, kiemelt figyelmet fordítva a komplikált implantációs öntésekre. A **GC Fujivest II** megfelelő precíziós koronák és hidak öntésére minden fogászati ötvözetből, beleértve az Ni-Cr-t és a Co-Cr-t. A **GC Stellavest** az öntéshez készült beágyazóanyagok mindennapi követelményeinek megfelel, és alkalmas a nemnemesfém fogászati ötvözetekhez is.

A GC a fémmentes megközelítés esetére is számos beágyazó anyagot ajánl. A **GC MultiPressVest** kifejezetten a préselhető kerámia technikákhoz lett adaptálva, melyet a **GC Initial PC** préselhető rendszeren és a **GC Initial IQ** rendszereken belül kínálunk. A **GC Cosmotech VEST** egy foszfátbázisú hőálló modellanyag fémmentes kerámiapótlásokhoz, mint például héjak, inlay-k és onlay-k készítéséhez. A **GC G-Cera ORBIT VEST** ellenőrizhető hőtágulást kínál, mely alkalmassá teszi a kerámiák közvetlen felviteli technikájához, nem csak inlay-k, onlay-k és héjak, de koronák készítéséhez is.

A **GC Initial kerámiarendszer** új perspektívát ajánl a fémkerámia indikációkra. Akár a **GC Initial MC**-t használja normál hőfokon, a **GC Initial LF**-et alacsony olvadáspontú technikával vagy akár a **GC Initial Ti**-t titán alkalmazásokhoz, egyszerűen nem tud hibázni! Az Initial előnyei az egyszerű használhatóságban, a rendszerezett és egyértelmű felépítésben, valamint a tökéletesített technikában mutatkoznak meg - ezeknek köszönhető az állandó és tökéletes esztétikum, valamint az optimális költséghatékonyság. A kiváló eredmények érdekében a GC bemutatja továbbá a kerámia bondot titán vázakhoz. Hogy a legtöbb ötvözethez alkalmazható legyen, rendelkezünk egy bonddal, melyet

pufferként alkalmazunk az ötvözet és a kerámia között. Blokkolja a fém-oxidokat és kiegyenlíti a hőtágulási együtthatók eltérését.

A **GC Initial kerámiarendszer** széles körű távlatokat nyit meg a teljeskerámia-technika alkalmazóinak. Amennyiben a klasszikus alumínium-oxiddal vagy akár a legújabb irányt követve, cirkóniummal dolgozik, az Initial rendszerében mindig megtalálja az optimális, megbízható és gazdaságos megoldást. A **GC Initial Zr-Fs** és **GC Initial AL** iránymutató a jövő teljeskerámia-rendszere számára.

A következőketesen jó minőségű és reprodukálható esztétikai eredmények érdekében, büszkén mutatjuk be a **GC Initial IQ** rendszereinket fémhez és cirkonhoz. Akár a rétegzéses vagy préseléses megközelítést választja, újra és újra képes lesz ugyanolyan esztétikai eredmények reprodukálására kevesebb anyag felhasználásával. A varázslat a **GC Initial IQ Lustre Paste NF** rendszerben rejlik, a háromdimenziós kerámiafestékben, mely vitalitást és természetes fényt kölcsönöz helyreállításainak.

A fényre keményedő **GC GRADIA** anyagunk képviseli a nagy erősségű mikro-hibrid kompozitok jól megalapozott irányát, klinikailag bizonyított tartósságával, természetes opaleszcenciájával és kimagaslóan élethű megjelenésével. Kiegészülve a **GC GRADIA** gum shades anyaggal a fogszínhez és természetes ínyhez hasonló életszerű természetes megjelenést készíthet.

A különböző fogászati anyagok közti optimális kötés érdekében 3 féle primert ajánlunk. A **GC Metal Primer II** a megfelelő adhezív fogászati akrilát és kompozit különböző ötvözetekhez történő rögzítéséhez. A **GC Composite Primer**, mely ecsettel egyszerűen applikálható, a biztos kötés érdekében újraépíti a kompozit és kompozit közötti oxigén-inhibíciós réteget. A laboratóriumi rezinek, akrilátok és kompozitok kerámia felszínéhez történő biztonságos rögzítése érdekében a **GC Ceramic Primer** alkalmazását ajánljuk. Ezt a három primert alkalmazhatja intraorális javítások készítéséhez sérült helyreállítások esetén vagy az adhézió növelésére rezin adhezív cementek esetén.



TARTALOMJEGYZÉK			
PROTETIKA A FOGTECHNIKUS SZÁMÁRA			
Modellkészítés	IV. osztályú gipsz	GC Fujirock EP	70
		GC Fujirock OptiFlow	71
		GC Fujirock OptiXscan	71
Modellálás	Rezin	GC Pattern Resin LS	72
	Viasz	GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD	72
Lenyomatvétel	Egyéni kanalak	GC Ostron	72
Beágyazás	Ötvözetekhez	Rendszerszerű megközelítés	73
		GC Fujivest Platinum II	74
		GC Fujivest Premium	75
		GC Fujivest Super	76
		GC Fujivest II	76
		GC Stellavest	77
		GC Vest-G	77
	Kiegészítő eszközök	GC Casting Ring LINER	77
	Kerámiákhoz	GC MultiPressVest	78
		GC Cosmotech VEST	78
		GC G-Cera ORBIT VEST	78
	Koronák és hidak	Kerámia	Intro
GC Initial MC			80
GC Initial MC Classic Line			81
GC Initial Ti & LF			82
Kerámia bond		GC Initial Ti Bonder	83
		GC Initial INmetalbond	83
		GC Initial Connector Paste	83
Kerámia		GC Initial AL & ZR	84
		GC Initial PC & LF	85
		GC Initial Gum & Bleach	86
Kerámia 3D festék		GC Initial IQ Lustre Pastes NF	87
Kerámia One-Body		GC Initial IQ Layering over Metal & Zircon	88
		GC Initial IQ Press over Metal & Zircon	89
Kompozit		GC GRADIA	90
Kompozit íny színek		GC GRADIA gum shades	91
Lakkozás		GC Optiglaze	91
Üvegszálás megerősítés		GC Stick & StickNET	92
Primer fém-kompozit		GC Metal Primer II	93
Primer kompozit-kompozit		GC Composite Primer	93
Primer kompozit-kerámia		GC Ceramic Primer	93
Kompozit polimerizáló eszközök	GC Labolight LV-III	94	
	GC STEPLIGHT SL-I	94	

GC Fujirock® EP

IV. osztályú fogászati gipsz

A világ egyik legnépszerűbb fogászati gipsze, a GC Fujirock EP, 4 színben érhető el, hogy megfeleljen minden elvárásnak, mely egy esztétikus és kiváló minőségű fogmű modellének készítésekor felmerülhet. A kiemelkedő minőségű IV. osztályú fogászati gipsz ideális minden fogmű készítéséhez, mivel nagy pontosságú, kiemelkedően kemény a széleknél és magas nyomásslábadású.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kiváló fizikai tulajdonságok
- Rövid keverési idő (kb. 1 perc)
- Meghosszabbított munkaidő (8 perc fölött)
- Rövid kikeményedési idő (mindössze 12 perc)
- A lenyomatról már 30 perc elteltével eltávolítható
- Erősen folyékony, tixotróp tulajdonságú, pontos részletvisztaadás
- Kismértékű hőtágulás (kevesebb, mint 0.08%)
- Azonnali stabilitás, a fogmű tökéletesen illeszkedik

KISZERELÉSEK

GC Fujirock EP	
890222	Aranybarna, 5 kg
890223	Pasztellsárga, 5 kg
890224	Hófehér, 5 kg
890225	Topázbézs, 5 kg
890226	Aranybarna, 12 kg
890227	Pasztellsárga, 12 kg

GC Fujirock® OptiFlow



IV. osztályú fogív-alátalpaló gipsz

Hígan folyó IV. osztályú gipsz a GC Fujirock EP-vel készült fogívek alátalpalására. A 4 kapható színárnyalat - terrakottavörös, dinamikus lila, mentazöld és zafírkék - kielégíti a mesteri modellek készítéséhez szükséges esztétikum és egyediség kívánalmait. A GC Fujirock EP négyféle színárnyalatával optimális kombinációt alkot.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Vízszűrően folyik a légbuborékoktól mentes alátalpalásért
- Stabil, alacsony tárgulású, hogy tökéletesen illeszkedjen a GC Fujirock EP-hez és a GC Fujirock EP OptiXscan-hez

HASZNÁLAT

Mindössze 20 ml vízzel magas, folyékony konzisztencia érhető el. Színek - terrakottavörös, mentazöld és zafírkék.

KISZERELÉSEK

GC Fujirock Optiflow (12 kg)	
900478	Terrakottavörös
900480	Mentazöld
900481	Zafírkék

GC Fujirock® OptiXscan



IV. osztályú scannelhető fogászati gipsz

A CAD/CAM és implantációs technológiák jelentősége napról napra nő, ezért a GC kifejlesztett egy különleges, IV. osztályú gipszet. Speciális összetételű por komponensének köszönhetően a Fujirock EP OptiXscan minden létező képalkotó eszközzel kompatibilis.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kompatibilis a képalkotó eszközökkel (lézer, optikai)
- Igazítható munka- és rövid kötési idő a gyors kiönthetőségért
- Változtatható keverési arány a fizikai jellemzők megváltozása nélkül
- Alacsony tárgulás a legpontosabb eredmény érdekében
- Finom, sima felszín
- Nagyon kopásálló

HASZNÁLAT

- 20 ml rövid kötési időhöz (a modell 20 perc alatt elkészül). 21 ml több modellhez.
- Szín - Inkabarna

KISZERELÉSEK

GC Fujirock OptiXscan	
900482	Inkabarna, 5 kg

GC Pattern Resin LS



Alacsony zsugorodású mintázó műanyag

A már sokat bizonyított mintázó műanyag, mely használható mindenféle kapcsok, palatinál vagy lingvál ívek, implantált pillérek vagy akár műanyag csontok készítésére galvántechnikához.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Minimális zsugorodás, könnyű munkálhatóság, pontos minta és öntés
- Nagy keménység, szilárdság
- Nagyfokú stabilitás még vékony rétegben is
- Maradék nélkül kiég, az öntvényfelület nagyon tiszta

HASZNÁLAT

A GC Pattern Resin LS kifejezetten az ecsettechnikához lett kifejlesztve.

KISZERELÉSEK

GC Pattern Resin LS	
335201	1-1 csomag (100 g por, 105 ml folyadék, 2 db keverőcsésze, 1 db ecset N°4, 1 db pipetta)
335202	100 g por
335204	1 kg por
335203	105 ml folyadék
335205	262 ml folyadék
001416	Ecset N°4, 10 db

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM és HARD



Fogászati inlay öntőviasz

Modelláló viasz mindennemű helyreállításra kiváló plaszticitással és alacsony deformációval a modelltől való eltávolításakor.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kiváló képlékenység
- Precíz mintázhatóság, alacsony zsugorodás
- Maradéktalanul kiég
- Sima öntvényfelszín

KISZERELÉSEK

GC Inlay Wax	
SOFT	
001157	60 db rúd (Lila)
001159	60 db rúd (Szürke)
001154	40 g tégely (Lila)
001156	40 g tégely (Szürke)
MEDIUM	
001086	60 db rúd (Szürke)
001084	60 rúd (Zöld)
001083	40 g tégely (Szürke)
001081	40 g tégely (Zöld)
HARD	
001162	40 g tégely (Szürke)
001160	40 g tégely (Zöld)

GC Ostron



Önkötő műanyag egyéni kanalakhoz

Egyéni kanalak, alaplemezek és harapási sablonok készítésére szolgáló akrilát.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI


- Időtakarékos
- Kiválóan adaptálható, de nem ragad
- Bőséges munkaidő
- Sima, fényes felület, nagyfokú térfogatállóság
- Könnyen vágható

KISZERELÉSEK

GC Ostron P/F	
000615	Kék-transzparens, 1 kg por
000605	Clear (rózsaszín-transzparens), 1 kg por
000354	250 ml folyadék

GC Fujivest Platinum II & Premium - a rendszer felépítése

BEÁGYAZÓK KORONÁKHOZ ÉS HIDAKHOZ

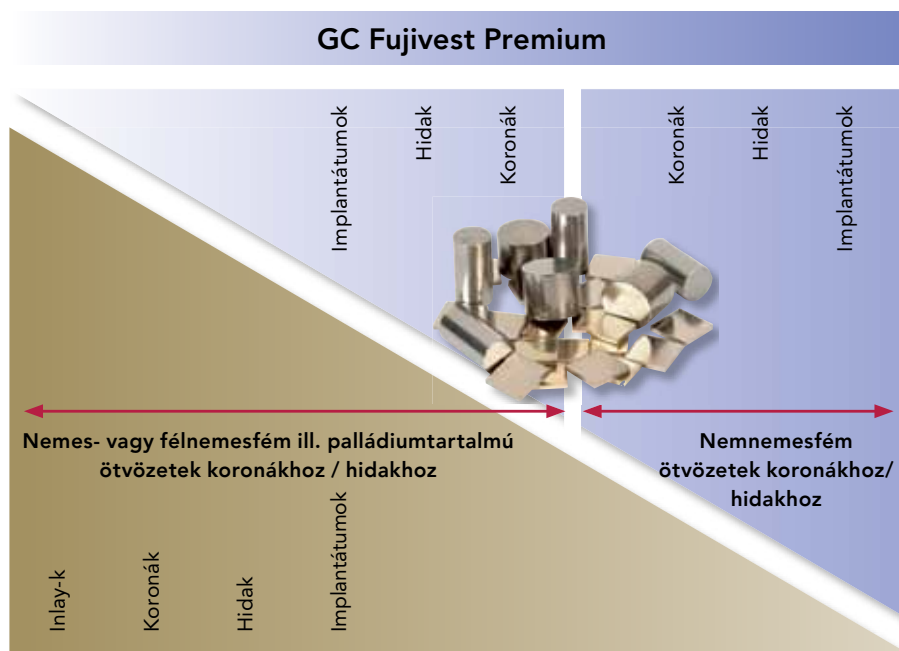

A Fujivest Platinum II és Premium beágyazók egyéni és kiegészítő besorolása. A táblázatból kiolvasható az adott fogászati ötvözetnek ill. a helyreállítás típusának leginkább megfelelő beágyazóanyag.

→ Kifejezetten ajánlott
→ Ajánlott
→ Nem ajánlott

Az új fejlesztésű beágyazóinkkal a GC EUROPE ismét bizonyította hozzáértését a foszfátbázisú korona/híd beágyazók gyártásának területén. A Fujivest Platinum II és a Fujivest Premium az európai korona/híd piac modern öntési követelményeihez lett igazítva.

GC FUJIVEST PLATINUM II

Tökéletes kontrollálhatóság és kiemelkedően pontos illeszkedés - ezek egy modern, nagy precizitású beágyazóanyaggal szemben támasztott legfontosabb követelmények. A GC EUROPE újabb mérföldkővet helyezett le a GC Fujivest Platinum II bemutatásával, mely mindenfajta nemes, félnemes és Pd bázisú ötvözetek korona- és hídtechnikájához alkalmazható. Ennek az új grafitmentes, foszfátbázisú korona/híd beágyazónak az előnyei közé tartoznak kényelmes alkalmazási tulajdonságai és tökéletes expanziókontrollja - gyors és lassú kitüzeléses eljárás esetén egyaránt.

GC FUJIVEST PREMIUM

Ellenőrzött hőtágulás a tökéletes precizitásért, különösképpen nemnemesfém ötvözetek esetében. Akár gyorsan, akár hagyományosan tűzeli ki, akár öntőgyűrűvel, akár anélkül, az új GC Fujivest Premium minden modern, széles körűen alkalmazható beágyazóval szemben támasztott elvárásnak megfelel. Ez a grafitmentes, foszfátbázisú korona/híd beágyazó széles körűen alkalmazható, mégis folyamatosan precíz öntési eredményt biztosít. Így a GC Fujivest Premium ideálisan alkalmazható mindenfajta protetikai munkához és ötvözetekhez, különösképpen a nikkel-króm és kobalt-króm ötvözetekhez. A finomörlésű porszerkezetnek köszönhetően a fogtechnikusok választhatnak a gyors, illetve a programvezérelt hevítési eljárás között - megbízható expanziókontrollal.

GC Fujivest® Platinum II

Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag

Tökéletes megoldás a legmagasabb követelmények esetében: az új GC Fujivest Platinum II. a beágyazó nemes- és félnemes ötvözetekhez alkalmazható. Hosszú és kényelmes munkaidejével és továbbfejlesztett folyékonyságával a komplikált esetek beágyazása minden eddiginél egyszerűbbé vált. A GC Fujivest Platinum II különösen sima felszíne igazán pontos kiöntéseket fog eredményezni, bármikor. Ez a csúcsmínőségű beágyazó alkalmazható gyors hevítési és lépcsőzetes kitüzeléses eljárás esetén is.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Speciálisan a nagy precizitású öntésekhez nemes, félnemes és Pd-bázisú ötvözetekhez
- Gyors hevítési- vagy lépcsőzetes eljárás
- Tökéletes illeszkedést tesz lehetővé, akár implantációs szuprastruktúrák és nagy fesztávú hidak esetében
- Könnyen megmunkálható, megnövelt expanziós tartománnyal
- Hosszabb munkaidő, jobb folyékonyság
- Nagyon könnyű kibontás az öntvény megrongálásának kockázata nélkül
- Sima felszínek - minden apró részletre ügyelve

HASZNÁLAT

Precíziós beágyazó gyors és lassú kitüzeléses eljáráshoz egyaránt. Nemesfémhez, félnemesfémhez és Pd alapú ötvözetekhez.

KISZERELÉSEK

GC Fujivest Platinum II	
900671	6 kg por (100 x 60 g tasak)
900673	6 kg por (40 x 150 g tasak)
900672	6 kg por (67 x 90 g tasak)
900676	900 ml folyadék

GC Fujivest® Premium

Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag

A tökéletes megoldás a változatos igényekre: a GC Fujivest Premium korona/híd beágyazó használható mindenfajta fogászati ötvözethez, különös tekintettel a nemnemesfém ötvözetekre. Akár gyorsan vagy hagyományosan hevítik, öntőgyűrűvel vagy anélkül, a GC Fujivest Premium megbízható expanziókontrollja következetesen precíz öntési eredményeket nyújt.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Széles expanziós tartományt nyújt 3,5%-ig, a nemnemesfém ötvözetekkel készülő bonyolult implantológiai szuprastruktúrák most már biztonságosak és egyértelműek
- Öntőgyűrű nélküli, gyors és lassú hevítéssel egyaránt használható
- Pontos illeszkedés a könnyű hígíthatóság miatt, az optimális expanziókontroll érdekében
- Erősen folyékony, lágy konzisztencia
- Robosztus beágyazás, de könnyű kibontás

HASZNÁLAT

Gyors és lassú kitüzeléses eljáráshoz egyaránt. Mindenfajta fogászati ötvözethez alkalmazható, különös tekintettel a nemnemesfém ötvözetekre.

KISZERELÉSEK

GC Fujivest Premium	
890182	6 kg por (100 x 60 g tasak)
890183	6 kg por (40 x 150 g tasak)
890184	6 kg por (67 x 90 g tasak)
890186	900 ml folyadék

GC Fujivest® Super



Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag

Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag nemes, félnemes és Pd-alapú ötvözetek precíziós öntéséhez, különös tekintettel a komplikált implantológiai öntésekre. A GC Fujivest Super egyaránt használható gyors és lassú hevítéses eljárásokhoz.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Gyors melegítési eljárás
- Teljes expanzió 2,34%-ig - speciális, magas expanziójú folyadék is kapható
- Krémszerű konzisztencia nagyfokú folyékonyssággal és nedvesíthetőséggel, kiváló részletviszszaadás
- Ellenőrizhető kötés és hőtágulás, nagyon precíz illeszkedés
- Könnyen bontható
- Pontos rajzolat, pontos felületreprodukálás, precíz öntés

HASZNÁLAT

Nagy pontosság nemes vagy félnemes öntvények esetében, akár nagy fesztávú fogműveknél is. Implantációs technikák esetén kérje speciális használati útmutatónkat.

KISZERELÉSEK

GC Fujivest Super	
800023	6 kg por (100 x 60 g tasak)
800024	6 kg por (40 x 150 g tasak)
800026	6 kg por (67 x 90 g tasak)
800025	900 ml folyadék
800029	900 ml magas expanziójú folyadék

GC Fujivest® II



Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag

Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag precíziós koronák, hidak öntéséhez mindenfajta fogászati ötvözetből, a Ni-Cr és a Co-Cr ötvözeteket is beleértve.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Grafitmentes
- Öntőgyűrű nélküli technika is lehetséges akár gyors vagy lassú hevítéssel
- Nagyfokú folyékonysság, nedvesíthetőség
- Sima felszín
- Ellenőrizhető kötés és hőtágulás
- Speciális alacsony expanziójú folyadék

HASZNÁLAT

Mind a gyors, mind a lassú melegítéses eljárással használható. Tökéletesen alkalmas nemnemesfém ötvözetekhez.

KISZERELÉSEK

GC Fujivest II	
800016	6 kg por (100 x 60 g tasak)
800019	6 kg por (67 x 90 g tasak)
800017	6 kg por (40 x 150 g tasak)
900665	8 kg por (4 x 2 kg)
800018	900 ml folyadék
800078	900 ml alacsony expanziójú folyadék

GC Stellavest®



Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag

Speciálisan a fogászati nemnemesfém ötvözetek öntési technikája által naponta támasztott igényekre kifejlesztett grafitmentes beágyazóanyag.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Grafitmentes
- Gyorsan hevíthető
- Széles expanziós tartomány (3%-ig), minden ötvözethez, beleértve a Co-Cr ötvözetet is
- Öntőgyűrűs vagy anélküli eljárásokhoz
- Nagyfokú pontosság, sima felszín
- Igen robosztus, de mégis könnyen bontható
- Gazdaságos

KISZERELÉSEK

GC Stellavest	
900667	6 kg por (150 x 40 g tasak)
900666	8 kg por (4 x 2 kg)
800043	900 ml folyadék

HASZNÁLAT

Egyaránt használható gyors és lassú melegítési technikához, különös tekintettel az öntőgyűrű nélküli gyors melegítésű eljárásra.

GC Vest®-G



Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazóanyag

Univerzális, grafitmentes beágyazóanyag koronák és hidak készítéséhez, a Pd ötvözeteket kivéve minden ötvözet öntési technikájához.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Grafitmentes
- Lépcsőzetes hevítéshez
- Teljes expanzió 3,26 %-ig
- Nagyfokú folyékonyság, nagyon sima arany öntvényfelszín
- Különösen jó a teleszkópos és a kombinált öntvényekhez
- Könnyű bontás
- Csökkenti a forrasztások számát a nagy fesztávú protetikai munkák esetén

KISZERELÉSEK

GC Vest-G	
800030	6 kg por (100 x 60 g tasak)
800032	6 kg por (40 x 150 g tasak)
800031	900 ml folyadék

Casting Ring Liner



Öntőhenger-kibélelő

Kerámia- és azbeszt mentes kibélelő a beágyazóanyagok teljes expanziójának biztosításáért.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Azbesztmentes, speciális kerámiarost összetétel
- Biológiai lebomló
- Nem ég meg magas hőfokon
- 1 mm-es vastagság, tökéletes puffer
- Jól adaptálható az öntőhengerhez
- Precíz öntés, megelőzi a repedéseket

KISZERELÉSEK

Casting Ring Liner	
900617	20 m tekercs

HASZNÁLAT

Kifejezetten a lépcsőzetes hevítési technikához alkalmazható.

GC MultiPressVest®



Grafitmentes, foszfátbázisú beágyazó préselhető kerámiához

A beágyazóanyag kifejezetten a GC préselhető kerámia rendszereihez lett adaptálva, mint a GC Initial PC és a GC Initial IQ rendszer.

KISZERELÉSEK

GC MultiPressVest	
800243	6 kg por (60 x 100 g tasak)
800244	900 ml folyadék

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Finom őrlésű foszfátbázisú beágyazó a lágy, részletgazdag préselések jegyében
- Krémes konzisztencia a könnyű és pontos beágyazásért
- Nagyfokú hőállóságának köszönhetően gyors és hagyományos hevítési technikával is alkalmazható
- Speciálisan a különféle préskerámia rendszerekhez kifejlesztve:
- Teljes préskerámia technika az Initial PC-vel: koronák, inlay-k, és héjak
- Préskerámia fémvázra az Initial IQ - One Body, Press-over-Metal-lal
- Préskerámia cirkónium vázra a GC Initial IQ - One Body, Press-over-Zircon-nal

GC Cosmotech VEST



Hőálló modellanyag

Foszfátbázisú hőálló modellanyag fémmentes kerámiapótlások: héjak, inlay-k és onlay-k készítéséhez.

KISZERELÉSEK

GC Cosmotech VEST	
001147	990 g por (30 x 33 g tasak)
001150	200 ml folyadék

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Expanziós viselkedése kifejezetten a kerámiához illik
- Jól használható minden kerámia pótlás készítéséhez
- Sima felszín
- Kiváló keménység és ellenállóképesség a széleknél, megelőzi a repedések keletkezését
- Többszörös kitüzeléskor is hőálló, pontos kitüzelési eredmény
- Könnyen bontható

GC G-Cera ORBIT VEST



Hőálló modellanyag

Foszfátbázisú hőálló modellanyag kerámiák közvetlen felviteli technikájához, héjak, inlay-k és onlay-k készítéséhez.

KISZERELÉSEK

GC G-Cera ORBIT VEST	
800035	Koronához/héjhoz, 990 g por (30 x 33 tasak)
800036	Inlay-khez, 990 g por (30 x 33 tasak)
800037	200 ml folyadék

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- 2 por keverésével kontrollálható expanzió
- Jó nedvesíthetőség
- Nagyfokú stabilitás
- Sima felszín, könnyen eltávolítható
- Pótlólagos hevítési eljárásokat is lehetővé tesz
- Majdnem minden kerámia anyaggal használható, pontos kitüzelési eredménnyel

GC Initial

Egy teljes kerámiarendszer az összes létező alkalmazáshoz

Az immár 10 éve a piacon lévő GC Initial kerámia termékcsalád talán a legváltozatosabb rendszernek nevezhető, alkalmas a mai modern fogtechnikákban használt összes szubstruktúra típusához. A GC Initial segítségével minden egyes fogtechnikus képes lesz választ adni bármilyen esztétikai kihívásra, függetlenül a váz típusa-, a felépítési eljárás- és gazdasági szempontoktól.

GC INITIAL MC FÉMVÁZAKHOZ

Kerámia fémötvözethez normál hőtágulási expanzióval (HTE), legyen magas- vagy alacsony aranytartalmú, tartalmazzon ezüstöt vagy palládiumot, nemnemesfém ötvözetekhez és galvántechnikához is. Készíthet szintertechnikával inlay-t, vagy onlay-t, valamint héjat hőálló modellanyagra égetve.

GC INITIAL AL ALUMÍNIUM-OXID VÁZAKHOZ

Kerámia alumínium-oxid vázakhoz igazított színtulajdonságokkal, melyek lehetővé teszik a végső helyreállítás tökéletes és homogén felépítését.

GC INITIAL IQ

One Body / egyréteges felépítés, vagy préskerámia, mely lehetővé teszi, hogy kizárólag a formára és funkcióra koncentrálhasson. Az esztétikát a végső fázisban adjuk hozzá, a 3D hatású LP NF lazúrpasztákkal.

GC INITIAL LF ALACSONY OLVADÁSPONTÚ TECHNIKÁKHOZ

Szintetikus kerámia alacsony hőmérsékletű kitűzeléshez olyan fémötvözetekhez, melyek hőtágulási együtthatói kompatibilisek a GC Initial MC-vel. Korrigálja a GC Initial MC-vel készült helyreállításait, vagy használja mint leplező anyag a GC Initial PC présapkákon.

GC INITIAL TI TITÁN VÁZAKHOZ

Kerámia magas esztétikával rendelkező és biokompatibilis helyreállítások készítéséhez.

A kerámia vázhoz való biztos ragasztása érdekében használjon GC Initial Titanium Bonder-t.

GC INITIAL ZR CIRKÓNIUM-OXID VÁZAKHOZ

Kerámia magas erősségű cirkónium-oxid vázakhoz való használatra, mely ideális az olyan finom szubstruktúrák megalkotására, mint pl. a hidak.

GC INITIAL PC A PRÉSTECHNIKÁKHOZ

Kerámia préseléses technikához akár a rétegezést, akár festést részesíti előnyben. Rétegezéshez használjon Initial LF-et.

GC Initial MC

A legmesszebb mutató kerámia rendszer

A GC Initial MC kerámiarendszer új perspektívát kínál a fémkerámia indikációkra. Földpát tartalma és kiváló fény-optikai tulajdonságai roppant magas esztétikai potenciált szabadítanak fel, függetlenül attól, hogy a könnyű és gyors standard rétegezési technikával vagy a legmagasabb esztétikai kívánalmaknak megfelelő élethű rétegezési technikával dolgozik. A hőtágulási együttható (HTE) minden hagyományos ötvözethez adaptált, függetlenül attól, tartalmaznak-e ezüstöt, aranyat, esetleg palládium-alapúak. Még a nemnemesfém és galván koronák kerámia leplezése is egyszerűen megoldható. Az Initial MC-vel nem kell aggódnia az égetés során fellépő zsugorodás miatt, még magas aranytartalmú ötvözetek esetében sem.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Optimalizált zsugorodási tulajdonságok és jó polírozhatóság
- Tökéletesen alkalmazható az összes hagyományos ötvözzel
- A GC Initial MC égetési hőfoka 930°C
- Effektanyagok a különböző színezési és rétegezési technikákhoz
- Opaker por és paszta formában egyaránt
- Tökéletesen összehangolt alkotóelemek, beleértve a fehérített és az ínszíneket
- Átfedő, logikus rendszer minden anyagra és színárnyalatra
- Egyszerűen használható, könnyen elsajátítható
- Gyors, esztétikus és gazdaságos eredmény

MEGJEGYZÉS

A készletek részletezett tartalma és az utántöltők megtalálhatók a szórólapokon és a terméklistákban, valamint honlapunkon: <http://www.gceurope.com>

KISZERELÉSEK

GC Initial MC	
877001	Basic Set paszta opakerrel
877045	Basic Set por opakerrel
877002	Basic Plus Set paszta opakerrel
877046	Basic Plus Set por opakerrel
877003	Advanced Set
877035	Entrance Kit (paszta opakerl)
877048	Entrance Kit (por opaker)
877004	Paszta opaker
877065	Bleach Set
877071	Gum Shades Set paszta opakerrel
877070	Gum Shades Set por opakerrel
GC Initial Stain Set	
877016	Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC

GC Initial MC Classic Line



Új fejlesztés az Initial MC portfólióban

A GC Initial MC Classic Line olyan termékcsoportot képvisel az Initial MC portfólióban, mely speciálisan a 3 rétegű felépítési technikához alkalmazkodik. Hatékony és gazdaságos módon tökéletesen reprodukálhatja a jól ismert Vita színeket. A hozzá tartozó opaker pasztákat optimalizáltuk ehhez a rendszerhez. A magasabb szintelítettségüknek köszönhetően ideális alapot képeznek, különösen a nemnemesfém ötvözeteknél.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Esztétikus eredmények a klasszikus 3 réteges technikával
- Könnyű és gyors applikáció rövid betanulási idővel és gazdaságos munkamódszerrel
- Megfelelő stabilitás, csökkentett zsugorodás
- Moduláris rendszer: a 3 réteges technikából továbbblépve az egyedi, többreteges megközelítés felé mutat
- Kombinálható NF lazúrpasztákkal és más Initial MC rendszer összetevőkkel

KISZERELÉSEK

GC Initial MC Classic Line	
877081	Initial MC Classic Line Work készlet 1, egyben tartalmazza az összes szükséges anyagot a 3 réteges technikához a leggyakoribb Vita színekben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3, BLD-2
877084	Initial MC Classic Line Work készlet 2, a Work készlet 1 kiegészítője a következő színek létrehozásához: A4, B1, B4, C1, C2, C4, D2, D4, BLD-1,3)
877082	Initial MC Classic Line Welcome készlet, tartalmazza az összes anyagot, mellyel Vita A3 árnyalat hozható létre
877083	Initial MC Paste Opaque CL készlet

FEJLESSZE RÉTEGEZÉSI TECHNIKÁJÁT A GC INITIAL LAYERING GUIDES ALKALMAZÁSSAL

Ahhoz, hogy optimális eredményt érjen el kerámiacsaládunkkal kifejlesztettünk Önnek egy egyedülálló eszközt, amely egy 3D prezentáción keresztül végigkíséri az Initial különböző applikációs lépéseit. Mielőtt elkezdené használni, különböző jellemzők alapján választhat:

- kívánt rétegezési technika: 2-réteges, 3-réteges vagy 4-réteges
- kívánt színrendszer: Vita Classical vagy Vita 3D Master
- kívánt kitüzelési mód: egylépéses vagy többlépcsős
- kívánt opaker típus: por vagy paszta
- kívánt ötvözet típus: nemesfém vagy nemnemesfém

A GC Initial Layering Guides könnyen érthető módon vezeti végig a helyreállítás különböző rétegeinek felépítésén. A lépések között bármikor megforgathatja a helyreállítást, hogy tökéletes képet kapjon a különböző porok felvitelének módjáról. A képek változtathatók standard- és transzparens, vagy körvonalazott nézetre a megfelelő vizuali-

záció érdekében. Megtalálja továbbá a tökéletes égetési instrukciókat, a releváns színkulccsal és sok más lehetőséggel, melyek segítik, hogy kihozza a maximumot az Initial kerámiákból.

A GC Initial Layering Guides ingyen letölthető iPhone és iPad készülékekre az Apple App Store-ból.



GC Initial Ti & GC Initial LF

Speciális fémkerámia rendszer

A GC Initial kerámiarendszer perspektívát ajánl a speciális fémkerámia indikációkra is. A GC Initial LF alacsony olvadáspontú technikához, míg a GC Initial Ti olyan helyzetekhez ajánlott, ahol magas igényt támasztanak a biokompatibilitással szemben és mégis a legmagasabb esztétikát várják el. A kerámiacsalád többi tagjához jól igazodik, köztudottan számtalan az előnye ezeknek a speciális fémkerámiáknak például az egyszerű kezelhetőség, rendszerszerű és egyértelmű összetevők és az optimalizált anyagok a megfelelő feldolgozáshoz - így következetesen kiváló esztétikát adnak és költséghatékonyak.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Optimalizált zsugorodási tulajdonságok és jó polírozhatóság
- Effektanyagok a különböző színezési és rétegezési technikákhoz
- Tökéletesen összehangolt alkotóelemek, beleértve a fehérített színeket
- Átfedő, logikus rendszer minden anyagra és színárnyalatra
- Egyszerűen használható, könnyen elsajátítható
- Gyors, esztétikus és gazdaságos eredmény

GC Initial LF

- Szintetikus kerámia 770°C fokos égetési hőmérséklettel
- A 11.6x10-6 K-1(25°- 500°C) hőátviteli együttható (HTE) - alkalmas standard HTE-val rendelkező kerámia fémötvözetekhez, nemnemesfém-, magas és redukált aranytartalmú ötvözetekhez,

valamint galván- vagy palládium alapú ötvözetekhez (20%-nál kisebb ezüsttartalommal)

- Kimagasló polírozhatóság
- Kiváló, alacsony zsugorodási tulajdonságok

GC Initial Ti

- 8.6x10-6 K-1 (25°-500°C) hőátviteli együttható - alkalmas titánium alapú anyagokhoz
- Optimális kötés a titán vázakhoz
- Égetési hőfok 780°C

NOTE

A készletek részletezett tartalma és az utántöltők megtalálhatók a szórólapokon és a terméklistákban, valamint honlapunkon: <http://www.gceurope.com>

KISZERELÉSEK

GC Initial LF	
877005	Basic Set
877006	Basic Plus Set
877007	Advanced Set
877036	Entrance Kit
877066	Bleach Set
GC Initial Ti	
877013	Basic Set
877014	Basic Plus Set
877015	Advanced Set
877039	Entrance Kit
877069	Bleach Set
GC Initial Stain Set	
877016	Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC
877017	Stain Set INvivo/INsitu AL, Zr, Ti

GC Initial Ti Bonder



Kerámia bond titán vázakhhoz

A GC Initial Ti Bonder optimális kötést biztosít a titán váz és a GC Initial Ti porcelán között.

KISZERELÉSEK

GC Initial Ti Bonder	
874027	Intro készlet (4 g por, 25 ml folyadék)
874025	4 g por
874026	25 ml folyadék

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Könnyen applikálható, rövid lépésekben
- Könnyű keverni (por és folyadék)
- Bármilyen titán esetén használható - akár tiszta vagy ötvözet, öntött vagy frézelt
- Tökéletes illeszkedés a GC Initial Ti Bonder és a GC Initial Ti kerámia között

GC Initial INmetalbond



A fogászati fémötvözetek és az Initial fémkerámiák közti pufferolásra

A bond egy rétegét az ötvözet és a kerámia között kell alkalmazni. Blokkolja a fémoxidokat és közömbösíti a hőtágulási együtthatók esetleges eltéréseit.

KISZERELÉSEK

GC Initial INmetalbond	
877050	8 g paszta (2 x 4 g paszta)

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Könnyű applikálás
- Használatra kész paszta
- Kiegyenlíti a fogászati fémötvözetek és az Initial fémkerámiák hőtágulási együtthatóinak eltérését
- Javítja és biztosítja a különböző típusú ötvözetek kémiai kötését
- Alkalmazásával szélesebb HTE kompatibilitás érhető el

GC Initial Connector Paste



Finom kerámia paszta szintertechnikához

A GC Initial MC/LF Connector Paste egy köztes réteget képez a GC hőálló modellanyagok és a GC Initial MC/LF kerámia között, mely tökéletes illeszkedést és optimális égetési eredményt biztosít a kerámia szintertechnikához.

KISZERELÉSEK

GC Initial MC/LF Connector Paste	
877030	6 g paszta

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Használatra kész paszta
- Piros színű, ezért az égetés előtt optimálisan applikálható a modellanyagra
- Tökéletes illeszkedés a GC Initial MC-hez és az Initial LF-hez

GC Initial Zr-FS / GC Initial AL

Széles körűen alkalmazható teljes kerámia rendszer

Az Initial kerámiarendszer széles körű távlatokat nyit meg a teljeskerámia-technika alkalmazóinak. Amennyiben a klasszikus alumínium-oxiddal vagy akár a legújabb irányt követve cirkóniummal dolgozik, az Initial rendszerében mindig megtalálja az optimális, megbízható és gazdaságos megoldást. Az Initial iránymutató a jövő teljeskerámia-rendszere számára.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Az alkotóelemek hőtágulási együtthatója precízen illeszkedik az alkalmazáshoz
- Nagyfokú nedvesíthetőség vázak esetén, biztos rögzülés
- Optimalizált zsugorodási tulajdonságok, magas égetési stabilitás
- Effekanyagok a különböző színezési és rétegezési technikákhoz
- Erősen fluoreszcens dentinek a természetes és kreatív színezéshez
- Kiemelkedően hatékony és gazdaságos
- Minden anyaggal és színárnyalattal kompatibilis, logikus rendszer
- Egyszerűen használható, könnyen elsajátítható
- Gyors, esztétikus, gazdaságos eredmény

MEGJEGYZÉS

A cirkon fényvisszaverő használatra kész linereket arra tervezték, hogy megbízhatóan elfedjék a különböző színű cirkon vázakat, miközben megőrzik az esztétikai szempontból lényeges fényhatásokat. Miután így kondicionálta a vázat, egy standard rétegezési technika kiváló eredményhez vezet majd.

A készletek részletezett tartalma és az utántöltők megtalálhatók a szórólapokon és a terméklistákban, valamint honlapunkon: <http://www.gceurope.com>

KISZERELÉSEK

GC Initial AL	
877008	Basic Set
877009	Advanced Set
877037	Entrance Kit
877067	Bleach Set
GC Initial Zr-FS	
877010	Basic Set
877011	Advanced Set
877038	Entrance Kit
877068	Bleach Set
877072	Gum Shades Set Paste Opaque
GC Initial Stain Set	
877017	Stain Set INvivo/INsitu AL, Zr, Ti

GC Initial PC / GC Initial LF

Széles körűen alkalmazható préskerámia rendszer

Préskerámia technika használatakor, az Initial kerámiarendszere összekapcsolja a gazdaságosságot a jó esztétikummal. A tökéletesen illeszkedő, széles körűen alkalmazható alkotóelemek kiemelkedően hatékony és költségkímélő munkát tesznek lehetővé. Az Initial LF nem csak önmagában használható, gond nélkül alkalmazható felületek finírozásához, vagy akár az Initial PC préskerámiával egy tökéletes teljeskerámia-rendszerként. Az Initial rendszerezetten sokoldalú, egyszerű, esztétikus, gazdaságos és megbízható.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Az összes alkotóelem tökéletesen illeszkedik egymással
- Nagyfokú nedvesítő képesség vázak esetén, biztos rögzülés
- Optimalizált zsugorodási tulajdonságok, magas égetési stabilitás
- Az Initial PC és az Initial LF egy komplett teljeskerámia-rendszert alkot
- Effektanyagok a különböző színezési és rétegezési technikákhoz
- Minden anyaggal és színárnyalattal kompatibilis, logikus rendszer
- Egyértelmű és azonos koncepció a különböző készletek tartalmában
- Egyszerűen használható, könnyen elsajátítható
- Kiemelkedően hatékony és gazdaságos

MEGJEGYZÉS

A készletek részletezett tartalma és az utántöltők megtalálhatók a szórólapokon és a terméklistákban, valamint honlapunkon: <http://www.gceurope.com>
További információ a GC MultiPressVest beágyazóról a 78. oldalon található.

KISZERELÉSEK

GC Initial PC	
877018	Starter Package
GC Initial LF	
877005	Basic Set
877006	Basic Plus Set
877007	Advanced Set
877036	Entrance Kit
877066	Bleach Set
GC Initial Stain Set	
877016	Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC

GC Initial Gum & Bleach Shades

Egy teljes kerámiarendszer az összes létező alkalmazáshoz

”Nincsen fehér esztétikum vörös esztétikum nélkül.” Az Initial-el készülő még esztétikusabb és még természetesebb gingivális helyreállításokért az Initial moduláris kerámia sorozata néhány csúcsmínőségű íny szint is tartalmaz. Az Initial MC és Initial Zr Gum Shades kiegészítő készletek a magas esztétikumú gingivális helyreállítások által támasztott minden követelményt kielégítenek. Annak érdekében, hogy az Initial egyedülállóan harmonikus színrendszerét kiterjesszük, illetve a nagyon világos színek trendjét követhessük, létrehoztuk az Initial fehérített színeit, melyek lehetőséget nyújtanak a lehető legvilágosabb színek elérésére, az alkalmazott kerámiarendszertől függetlenül.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

GC Initial Gum Shades

- Öt természetű íny szín
- Kifejezetten alkalmas esztétikus implantációs szuprastruktúrákhoz, valamint korona- és hídtechnikákhoz
- Az gingivális területen is egyénileg karakterizálható kerámia lehetővé teszi a koronasél ínybe történő élethű átmenetét
- Az egyes lépések könnyedén elkülöníthetők a különböző égetések között, az indikáció és a személyes munkamódszerek függvényében

GC Initial Bleach Shades

- Kiegészíti az öttagú Initial kerámiacsaládot
- Természethű fénydinamikájának köszönhetően a legmagasabb esztétikai igényeket is kielégíti
- Árnyalatok a szokványos színskálán túl is
- A különböző alkotóelemeket egymáshoz adva a helyreállítás esztétikuma emelhető

KISZERELÉSEK

GC Initial Gum shades	
877070	GC Initial MC, Gum Shade Set (por opaker)
877071	GC Initial MC, Gum Shade Set (paszta opaker)
877072	GC Initial Zr-Fs, Gum Shade Set
GC Initial Bleach shades	
877065	GC Initial MC, Bleach Set
877066	GC Initial LF, Bleach Set
877069	GC Initial Ti, Bleach Set
877068	GC Initial Zr-Fs, Bleach Set
877067	GC Initial AL, Bleach Set

GC Initial IQ - GC Lustre Pastes NF

Háromdimenziós kerámiafestékek

A GC Initial lazúrpaszták háromdimenziós kerámiafestékek, melyek színmélységet és élethő transzlucenciát biztosítanak az Initial IQ prés- és rétegezési rendszereinek, valamint az összes többi GC Initial kerámiának. Az új formulájú lazúrpaszták használatra kész tégelyekben kaphatók, és univerzálisan alkalmazhatók, hiszen mind az alacsony, mind a magas Hőtágulási Együtthatójú kerámiákhoz használhatók. A lazúrpaszták vastagabb rétegben is felhordhatók, finom kerámiarészecske alapú kerámiafestékek felülmúlhatatlan vitalitást és természetest fényt kölcsönöznek helyreállításainak.



KISZERELÉSEK

GC Initial IQ, Lustre Pastes NF	
877078	GC Initial IQ, GC Lazúrpasztá NF készlet (1 x világosság, 4 x testszín, 8 x zománc effekt szín, hígító folyadék, frissítő folyadék, 1 keverőtálka, 2 ecset, képes használati útmutató)
Utántöltők	
876401	Neutrális, 4 g
876402	Test A, 4 g
876403	Test B, 4 g
876404	Test C, 4 g
876405	Test D, 4 g
876406	Zománc effekt Vanília, 4 g
876407	Zománc effekt Fehér, 4 g
876408	Zománc effekt Világosszürke, 4 g
876409	Zománc effekt Sötétszürke, 4 g
876410	Zománc effekt Világoskék, 4 g
876411	Zománc effekt Sötétkék, 4 g
876412	Zománc effekt Incizális, 4 g
876413	Zománc effekt Olíva, 4 g
876414	Zománc effekt Világosság, 4 g
876220	Hígító folyadék, 8 ml
876400	Frissítő folyadék, 8 ml
GC Initial IQ Lustre Pastes NF tartozékok, 1 db	
877051	Ecset 00
877052	Ecset 2
877053	Keverőtálka
877054	Műanyag kupak
877055	Alumínium doboz

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Egyetlen készlet mely kompatibilis a teljes GC Initial családdal (HTE - 6,9-13,3 között)
- Használatra kész tégelyekben kapható a kényelmesebb applikálás érdekében
- Diluting vagy Refresh folyadékok segítségével megőrizheti az optimális konzisztenciát
- Kiváló paszták finomabb tixotróp tulajdonsággal, melynek köszönhetően könnyen és pontosan felvihető

HASZNÁLAT

Az Initial IQ koncepcióval együtt történő alkalmazás mellett használható minden Initial korona és híd szokásos festésének és fényesítésének alternatívájaként, valamint színkorrekcióra és a felszíni textúra korrekciójára egyaránt.

GC Initial IQ - Layering Concept

Layering-over-Metal és Layering-over-Zircon

A GC Initial IQ rétegezési koncepció kidolgozásával most olyan kompakt kerámiakészletet ajánlunk, mellyel a standard Vita színárnyalatok könnyen és gyorsan reprodukálhatók. A rendszer lehetővé teszi, hogy a technikusok a felépítésre koncentrálhassanak és a vitalitást, valamint a természetes megjelenést a GC Initial IQ Lazúrpasztával hozzák létre. A GC Initial IQ megközelítése időről időre következetesen minőségi és esztétikus eredményeket mutat kevesebb anyag felhasználásával.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- A Layering-over-Metal kompatibilis a standard porcelán ötvözetekkel
- A Layering-over-Zircon kompatibilis az összes cirkon alapú technológiával
- Az egy porral történő korona felépítés lehetővé teszi a formai kialakításra és funkcionalitásra történő összpontosítást
- A Lazúrpaszták és a „számok szerint történő festés” módszerének alkalmazásával a standard Vita színárnyalatok gyorsan reprodukálhatók
- Nincs szükség új beruházásokra (kályha, beágyazó)
- Használható az Initial kerámiarendszerrel való átállás első lépéseként is

GC Zr Fényvisztaérő linerek

A cirkon fényvisztaérő használatra kész linereket arra terveztek, hogy megbízhatóan elfedjék a különböző színű cirkon vázokat, miközben megőrzik az esztétikai szempontból lényeges fényhatásokat. Miután így kondicionálta a vázat, egy standard rétegezési technika kiváló eredményhez vezet majd. A GC Zr fényvisztaérő linerek a rétegezési koncepció részei, de alkalmazhatók hagyományos cirkon kerámiával is, többretegű technikával (pl.: GC Initial Zr-FS-sel), hogy ugyanazt a nagy előnyt érje el a váz kondicionálásával.

KISZERELÉSEK

GC Initial IQ Layering-over-Metal (L-O-M)	
877077	Layering-over-Metal készlet Tartalma: GC Initial IQ L-O-M készlet (5 x MC/ opak paszta 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/ L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), modelláló folyadék, üveglap, ecset, technikai útmutató)
GC Initial IQ Layering-over-Zircon (L-O-Z)	
877079	Layering-over-Zircon készlet Tartalma: Initial IQ L-O-Z készlet (7 x fényvisztaérő liner 3 g (1-6, BL), liner hígító, 5 x IQ/ L-O-Z Body 50 g (A, B, C, D, BL), modelláló folyadék, üveglap, ecset, technikai útmutató)
877080	Initial Zr, Light Reflective Liner készlet (7 x fényvisztaérő liner 3 g (1-6, BL), liner hígító), technikai útmutató

GC Initial IQ - Press Concept

Press-over-Metal and Press-over-Zircon

A GC Initial IQ új, mindent-egyben jellegű „Press-over-Metal” és „Press-over-Zircon” rendszerek földpát alapú préskerámiák, melyek felülmúlhatatlanul élethű megjelenéssel szolgálnak. Az előkevert íngotok (öntvények) és a GC Initial IQ Lazúrpaszták olyan minőségű opaleszcenciához vezetnek, mely utolérhetetlen vitalitásban és természetes fényben mutatkozik meg. Ez a rendszer kompakt és minden fogtechnikus által könnyen használható.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- A Press-over-Metal kompatibilis a standard porcelán ötvözetekkel (HTE tartomány 13.8 - 14.9)
- A Press-over-Zircon kompatibilis az összes Zr-alapú préselhető és CAD/CAM technológiával
- Poszterior és anterior fogművek préseléséhez is alkalmazható, további rétegezés nélkül
- Az esztétikum a „számok szerint történő festés” koncepcióját követve érhető el, a lazúrpaszták alkalmazásával
- Lehetővé teszi a standard Vita színek gyors reprodukcióját

KISZERELÉSEK

GC Initial IQ Press-Over-Metal (P-O-M)	
877074	Press-over-Metal készlet Tartalma: Fluo kristályok, IQ/effekt présellet: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/ effekt présellet fehéritett: AO-M,BO-M, BOOM, IQ/korrekciós por: A1-M, A2-M,B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/korrekciós por fehéritett: AO-M, BO-M, BOO-M, LF/ modelláló folyadék, közepes gyűrűrendszer (M), szilikongyűrű, dugattyú 2g-os pillethez
GC Initial IQ Press-Over-Zircon (P-O-Zr)	
877075	Press-over-Zircon készlet Tartalma: 4 x vázmodifikáló (PFM-1,PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x effekt présellet (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x fehéritett), 10 x korrekciós por (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x fehéritett), modelláló folyadék, közepes gyűrűrendszer (M) (200 g) + szilikongyűrű, 10 x dugattyú 2g-os pilletekhez

GC GRADIA®

Tökéletes esztétikai összhang

A GC GRADIA képviseli a nagy erősségű mikro-hibrid kompozitok jól megalapozott irányát, klinikailag bizonyított tartósságával, természetes opaleszcenciájával és kimagaslóan élethű megjelenésével. Az új fehérített színárnyalatok a csodálatos helyreállítások készítésének minden igényét kielégítik.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Hibrid MFR formula
- Magas mechanikai teherbírás
- Kiváló fizikai tulajdonságok, pl. sima felszín és kopásállóság
- Biokompatibilis és kimélő bármilyen antagonistával szemben
- Élethű fogszínek, természetes megjelenés
- Egyszerű, kerámiához hasonló felépítési technika
- Könnyedén polírozható
- Közvetlen, intraorális javíthatóság

INDIKÁCIÓK

- Fémvázak koronák és hidak
- Fémmentes koronák és hidak
- Héjak
- Inlay-k / onlay-k
- Implantációs felépítmények
- Részleges fogsorok

HASZNÁLAT

A GC GRADIA rendszerében található nem ragadós állagú paszták segítségével könnyen és kontrollálva fedhető mindenfajta felszín, valamint precízen applikálhatók például jacket koronák vagy szabad incizális szélek esetén is. A GC GRADIA fecskendők menetes kinyomó része egyszerűen az új utántöltőre tekerve újból alkalmazható - ezzel csökkenthető a hulladék mennyisége, a Flip-Top kupak pedig a kiadagolást segíti.

MEGJEGYZÉS

A készletek részletezett tartalma és az utántöltők megtalálhatók a szórólapokon és a terméklistákban, valamint honlapunkon: <http://www.gceurope.com>

KISZERELÉSEK

GC GRADIA	
001419	Master készlet, 10 Vita színhez szükséges összes anyagot tartalmazza: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, B4, C2, C3, D3 (összesen 57 fecskendő), tartozékok
001517	Standard készlet, 6 Vita színhez szükséges összes anyagot tartalmazza: A2, A3, A3.5, B2, B3, C2 (összesen 26 fecskendő), tartozékok
Utántöltők	Az összes fecskendő hozzáférhető utántöltőként (57 fecskendő)
GC GRADIA Bleach Shades	
Utántöltők	Az AO, BO fehérített színekhez szükséges összes fecskendő hozzáférhető utántöltőként
GC GRADIA Intensive Colours	
001529	Intensive Colour készlet (11 szín) Utántöltők A 11 intenzív szín hozzáférhető utántöltőként
GC Retention Beads II	
000512	Készlet (Retenciós gyöngyök II 15 g + Retenciós gyöngy adhezív 10 ml)

GC GRADIA gum shades



Fényre keményedő
műínyrendszer

A GC GRADIA gum shades műínyrendszer arra lett kifejlesztve, hogy képes legyen visszaadni a természetes íny látható színvilágát. Ezzel a fényre keményedő kompozittal a gingiva reprodukálható alap vagy akár összetett rétegezési technikával.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Az íny reprodukálásának határtalan lehetőségei
- A mikrotöltésű kompozitok kiváló mechanikai és fizikai tulajdonságai
- Könnyen polírozható és tisztítható
- Kerámiával kombinálva is alkalmazható

INDIKÁCIÓK

Az íny reprodukálása implantációs felépítményekhez, koronákhoz és hidakhoz, valamint részleges és teljes fogsorok karakterizálása.

KISZERELÉSEK

GC GRADIA gum shades	
001889	Kezdő csomag: 7 szín (2 gum opak, 4 gum test, 1 gum translucens), tartozékok

GC Optiglaze



Nanotöltésű, fényre keményedő
védőlakk

Védőlakk, mely leegyszerűsíti a finírozási eljárást, mivel esztétikus, fényes felszínt biztosít műanyag fogakon, kivehető fogsorokon és ideiglenes koronákon. A GC Optiglaze a megoldás az olyan nehezen polírozható felületekhez, mint például a posztterior indirekt kompozit restaurációk barázdái vagy az interproximális területek.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Egyenletes eloszlású nano-töltőanyag technológia
- Könnyen kezelhető, időtakarékos
- Nagyon vékony lakkréteg ((25-50 µm), mely nincs befolyással a helyreállítás színére
- Erősen ellenálló a kopással és elszíneződéssel szemben
- Nagyon tartós kötés hosszan tartó fény érdekében

HASZNÁLAT

Vigye fel a felszínre egy ecset segítségével, majd legalább 3 percig fénypolimerizálja a GC Labolight LV-III készülékben. Direkt intraorális alkalmazásra a GC G-Coat PLUS használatát javasoljuk.

KISZERELÉSEK

GC Optiglaze	
004838	15 ml üveg

GC Stick és StickNET

Üvegszálas megerősítés kompozitokhoz és akrilhoz

A GC Stick és GC StickNET erős, esztétikus és gazdaságos megoldást nyújtanak a kompozitok és akrilok megerősítésére. Polimer mátrixba ágyazott szilanzált E-üvegszálból készülnek. Ezek a megerősítések használhatók fényre keményedő, kémiaiag kötő és duál-kötésű rezin, valamint kompozit, továbbá por-folyadék akrilátokkal egyaránt. Az egyirányú GC Stick üvegszál rostok erős és keménységet adnak az anyagnak az üvegszálak irányában. A GC StickNET üvegszál háló két irányból ad erőt és tartást az anyagnak.



JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Indikációk széles körére kínál megoldást
- A legtöbb kompozittal és akrillal kompatibilis
- Egyedülálló szabadalmaztatott kötés
- Alacsony induló beruházás
- Egyszerű és időtakarékos elkészítési módszer
- Fém keménységű
- Fémmentes és esztétikus
- Könnyen javítható
- Átfogó kutatási adatok

INDIKÁCIÓK

A GC Stick elsősorban fogsorok estén ajánlott

- Új részleges vagy teljes kivehető fogsorok
- Fogsorok javítása

valamint

- Fogfelszínen rögzített hidak
- Inlay és onlay hidak
- Implantátumon rögzített hidak
- Hibrid hidak
- Ideiglenes hidak

A GC StickNET különösen ajánlott koronák és kivehető fogsorok vékony részeinek megerősítésére.

valamint

- Csappal megerősített csokra ragasztott koronák
- Héjak
- Kivehető fogsorok kapcsos részeihez

KISZERELÉSEK

GC Stick	
900839	4 x 15 cm utántöltő
GC StickNET	
900840	3 x 30 cm ² utántöltő
Tartozékok	
900842	StickRESIN, 5 ml adhezív/üveg
900843	StickREFIX L, 3 + 3 szilikon eszköz
900825	StickSTEPPER, 1 kéziműszer
900826	StickCARRIER, 1 kéziműszer

GC Metal Primer II



Adhezív fogászati akrilát és kompozit fémhez történő rögzítéséhez

Biztos, hézagmentes és tartós rögzítés a kompozitok és különböző a fémötvözetek között.

KISZERELÉSEK

GC Metal Primer II	
003461	5 ml folyadék, 1 db ecset

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Ecsettel könnyen felvihető, egyszerű és gyors alkalmazás
- Nincs szükség speciális felszerelésre
- Ellenáll a nedvességnek, megbízható rögzítést ad
- Minden fogászati ötvözethez használható

HASZNÁLAT

Segítségével a javítások kofferdám használata mellett akár szájbán is végezhető.

GC Composite Primer



Adhezív kompozit/kompozit rögzítésekhez

Létrehozza a kompozit és kompozit közötti oxigén-inhibíciós réteget, így biztos kötést ad.

KISZERELÉSEK

GC Composite Primer	
004865	3 ml folyadék

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Ecsettel könnyen felvihető
- Egyszerű és gyors alkalmazás
- Az oxigén-inhibíciós réteget hozza létre
- Biztos kompozit rögzítés

HASZNÁLAT

A GC Composite Primer műfogak vagy akrilát fogsorok karakterizálásához is alkalmazható, a GC GRADIA és a GC GRADIA gum shades színárnyalatait használva.

GC Ceramic Primer



Adhezív kompozit/kerámia rögzítésekhez

Használatával a laboratóriumi rezinek, akrilátok és kompozitok biztonságosan a kerámia felszínéhez rögzíthetők.

KISZERELÉSEK

GC Ceramic Primer	
004846	1-1 csomag: A 2 ml folyadék, B 2 ml folyadék

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Ecsettel könnyen felvihető
- Egyszerű és gyors alkalmazás
- Biztos rögzítés Használat

HASZNÁLAT

A GC Ceramic Primer és a GC Composite Primer biztosítják a GC GRADIA és a GC GRADIA gum shades megfelelő rögzítését a kerámia pótlásokhoz.

A rendelőben a kerámia pótlások szilárd rögzítését szolgálja a fog szerkezetéhez valamilyen rezin ragasztócement közreműködésével.

GC Labolight LV-III



A hatékony végpolimerizációhoz

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kiváló fénykezelő képesség, biztonságos polimerizáció, az opak rétegeket is beleértve
- Beépített ventilátor, optimális hőmérséklet-kontroll a polimerizáció során
- Kiváló kezelhetőség
- Tágas fénykezelési tér, bármilyen méretű munkához alkalmazható
- Kompakt tervezés
- Specifikációk: Hálózati feszültség AC 220V/230V 50/60Hz

KISZERELÉSEK

GC Labolight LV-III	
001553	GC Labolight LV-III, tartozékokkal (2 db forgótányér, 2 db állvány 8 csappal, 3 fluoreszcens égő)
001193	Fluoreszcens égő a GC Labolight LV-II/LV-III készülékhez, 1 db

GC Steplight SL-I



A biztonságos előpolimerizációhoz

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- Kifejezetten a Gradia biztonságos előpolimerizációjához lett kifejlesztve
- Ergonomikus tervezés, egyszerű használat
- Automatikus 10 másodperces időzítés
- Beépített hűtőventillátor
- Specifikációk: Hálózati feszültség AC 220/230V 50/60 Hz

KISZERELÉSEK

GC Steplight SL-I	
001537	GC Steplight SL-I
001557	Halogén tartalék égő, 1 db

ÚJ SZINT AZ OKTATÁSBAN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN

A GC mindig komolyan befektetett abba, hogy vevőinek a legjobbat nyújthassa oktatásban és továbbképzésben. A GC Europe Campus Meeting and Education Centre fontos szerepet játszik abban, hogy csúcsmínőségű oktató programokat kínálhassunk a teljes fogászati csapatnak.

A fogorvosok és technikusok közötti kommunikáció fejlesztése szintén régóta célunk, és a tudás terjesztése a fogászati szakemberek között vállalatunk alapelve.

Ez a kutatáshoz és folyamatos oktatáshoz való elkötelezettség volt a 'GC Europe Campus Meeting and Education Centre' alapja, amely központunkban található Leuvenben, Belgiumban. Az oktató központ 1600 négyzetméternyi hasznosított területet ölel fel. A földszinten nyitott előcsarnok, konferenciaterem és egy teljesen felszerelt moduláris tréning labor található, amely 12 ember befogadására képes hands-on gyakorlat megtartására, valamint egy elkülönített helyiség a gipszmunkának és polírozásnak, és egy harmadik helyiség beágyazásra és öntésre. Továbbá egy teljesen felszerelt fogászati rendelő panoráma röntgennel és sterilizáló szobával egészíti ki az oktató intézetünket.

Ez a modern környezet lehetővé teszi, hogy kicserélhessük tudásunkat a teljes világot átölelő fogorvosi hálózatunkkal és hands-on kurzusokat, prezentációkat és demonstrációkat tartsunk minden fő technológiánkkal és termékünkkel kapcsolatban világszerte elismert oktatóinkkal.

FOGÁSZATI TRÉNING KURZUSOK A GC EUROPE-NÁL

Személyre szabott fogászati tréningek fogorvosok és technikusok számára

Ezek a kurzusok figyelembe veszik minden csoport tanulási preferenciáját. A személyre szabott program a megfelelő mértékű kihívást és támogatást fogja nyújtani minden résztvevőnek. Különböző méretű csoportoknak tudunk kurzusokat szervezni 8-tól 100 főig. A kurzusok hossza lehet fél napos, vagy akár 3 napos. A személyre szabott kurzusokat kívánt helyszínen, vagy a GC bármely európai kirendeltségén megtartjuk.





TRÉNING KURZUSOK AZ ELŐRE MUTATÓ GONDOLKODÁSÚ FOGORVOSOKNAK

A GC kompozitok megértése és használata

Hogy anatómikusan funkcionális és esztétikailag kielégítő helyreállításokat készítsünk egyetlen mintát követhetünk: a természetes fogat. Miután elemeztük a természetes alkotóelemek felépítését, egyszerű lépésekben tudjuk felépíteni az eredeti tökéletes másolatát. Ez a kurzus különböző szinteken elérhető, melyek teljesítésével megismerkedik a GC G-ænial rétegezési technikával és legmagasabb szintre fejleszti szakértelmét.

Tekintszen az üvegonomer technológiára egy új szemszögből

A GC elkötelezettsége az üvegonomer kutatása és fejlesztése felé vezette a GC EQUIA kifejlesztését: egy egyedülálló helyreállító rendszert az esztétikus és gazdaságos, lenyűgöző erővel és tartóssággal rendelkező poszterior helyreállítások készítéséhez. Jelentkezzen erre a tréningre, amennyiben többet akar megtudni az üvegonomerek új generációjáról, és azok előnyeiről praxisában és páciensei szempontjából.

A kariesz ellátásának szemlélete

A minimál invazív ellátás (vagy MI) a modern orvosi megközelítés a kariesz ellátásában, alapelvei pedig nagyon egyszerűek:

- A kariesz potenciális rizikófaktorainak korai felismerése
- A kariesz kialakulásának megakadályozása a rizikófaktorok eliminálása vagy minimalizálása által
- A demineralizált zománc helyreállítása és védelme a további károsodással szemben
- A páciens rendszeres visszahívása a karieszre való hajlam függvényében

Ez a tréning modul információt és stratégiát kínál ennek használatára és mindennapi munkába való beépítésére egy jövedelmező praxis futtatása mellett.

Tökéletes lenyomatok minden körülmény között

A száj belsejében a környezet kiszámíthatatlan, azonban a GC mindig tud kínálni megoldást a precíz és részletgazdag reprodukcióra. Különböző anyagok és technikák trükkökkel és javaslatokkal kombinálva a tréning részeit képezik.

Üvegszálás megerősítés Stick és everStick termékekkel

Ez a kurzus végigvezet a különböző üvegszálás termékek használatának lehetőségein, trükkjein, a megfelelő eljárással, magában foglalva a következő indikációkat:

- Esztétikus retenció
- Gyökércsap és csont felépítmény
- Parodontális rögzítés
- Traumatizált fogak sínezése
- Koronák anterior és poszterior régióban



TRÉNING KURZUSOK AZ ELŐRE MUTATÓ GONDOLKODÁSÚ FOGTECHNIKUSOKNAK**Alkossa meg világát az Initial segítségével**

A GC Initial paradigmaváltást képvisel a kerámiarendszerek körében mivel hét kerámiát sűrít egy integrált termék és színcsaládba, melyekkel a fémkerámiától egészen a teljes kerámiáig készíthet helyreállításokat.

A résztvevők betekintést nyerhetnek a következőkbe:

- Az Initial rendszer filozófiájába
- A különböző kerámiák applikálásának alapvető eljárásaiba
- A különböző GC Initial rétegezési megközelítés alapelveibe
- A színrendszer és különböző porok magyarázatába
- Hasznos tippek és trükkök

A laboratóriumi kompozitok megértése és használata

A GRADIA egy egyedülálló fényre keményedő mikrokerámia kompozit rendszer koronákhoz, hidakhoz, inlay-khez és héjakhoz, amely a helyreállításoknak a természetes foghoz hasonló színt ad. A kurzus keretében szakembereink lépésről lépésre elmagyarázzák a különböző GRADIA és GRADIA gum shade helyreállítások készítésének módját. A kurzus gyakorlat központú tippekkel, trükkökkel és magyarázatokkal a kompozit helyreállítások technikai és klinikai nézőpontjából egyaránt.

Útmutatás a gipszek és beágyazók optimális alkalmazásához

A GC gipszei és beágyazói magas minőségű anyagok, melyek kifejezetten a folyamatosan pontos öntvények készítéséhez valamint a modern fogtechnikai laborok minden elvárásának megfelelően kerültek kifejlesztésre. Ez a kurzus részletesen bemutatja a GC Fujirock gipszeink és a GC Fujivest beágyazóink működését. Olyan hasznos információk birtokába juthat, melyek segítenek elkerülni az előforduló hibákat. Megismerhetik az alkalmazás optimális technikáit, és analizálják az előforduló problémákat, melyek a nem megfelelő használatból adódhatnak.



Jegyzetek

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kategóriamutató

MINIMÁLIS BEAVATKOZÁS		HELYREÁLLÍTÓ FOGÁSZAT		PROTETIKA A FOGORVOS SZÁMÁRA		PROTETIKA A FOGTECHNIKUS SZÁMÁRA	
Felismerés	12	Direkt helyreállítás	20	Ragasztás	46	Modellkészítés	70
Megelőzés	14	Csonkfelépítés	30	Ideiglenes koronák és hidak	50	Mintázás	72
Helyreállítás	17	Direkt helyreállítás	32	Ragasztás	51	Lenyomatvétel	72
Visszahívás	17	Alábélelés	40	Ortodonciai ragasztás	52	Beágyazás	73
		Direkt helyreállítás	41	Lenyomatvétel	56	Koronák és hidak	79
				Ideiglenes koronák és hidak	63		
				Harapásellenőrzés	65		
				Alábélelés és kondicionálás	66		

Termékmutató

A	GC Aroma Fine PLUS	59	GC Fuji ORTHO LC	53	GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD	72
	GC Bite Compound	62	GC Fuji PLUS (EWT)	49	GC Impression Techniques	57
B	GC Caviton	41	GC Fujirock EP	70	GC ISO Functional Sticks	62
	GC Cavity Conditioner	41	GC Fujirock OptiFlow	71	GC Kalore	25
	GC G-CEM Capsule	47	GC Fujirock OptiXscan	71	K GC Klinikai Alkalmazás	37
	GC G-CEM LinkAce	46	GC Fuji TEMP LT	50	L GC Labolight LV-III	94
	GC G-Cera ORBIT VEST	78	GC Fuji II LC (Improved)	39	GC Metal Primer II	93
C	GC Ceramic Primer	93	GC Fuji VIII GP	40	M GC MI Paste Plus	15
	GC Closed-Bite Trays	61	GC Fuji IX GP Extra	38	GC MultiPressVest	78
	GC Coe-Pak (AUTOMIX)	67	GC Fuji IX GP - FAST	39	GC New Casting Ring LINER	77
	GC Composite Primer	93	GC Fuji ORTHO LC PP Automix	52	N GC New Metal Strips	43
	GC Cosmotech VEST	78	GC Fuji TRIAGE	16	GC Optiglaze	91
	GC Dentin Conditioner	41	GC Fujivest Platinum II	74	O GC ORTHO Gel Conditioner	55
	GC Dentulous Trays	60	GC Fujivest Premium	75	GC Ostron	72
D	GC DiaPolisher Paste	42	GC Fujivest Super	76	P GC Pattern Resin LS	72
	GC Dry Mouth Gel	16	GC Fujivest II	76	GC Pliers	50
	GC Edentulous Trays	60	GC G-ænial Anterior	22	GC Ragasztási útmutató	51
	GC Epitex	43	GC G-ænial Bond	28	GC Reline	66
	GC EQUIA	36	GC G-ænial Flo	27	GC Reline Extra Soft	67
	GC everStick®C&B	32	GC G-ænial Posterior	23	R GC Reline Soft	67
	GC everStick®NET	34	GC G-ænial Universal Flo	24	GC Rendszer felépítése	73
	GC everStick®ORTHO	34	GC G-Bond	29	GC Restorative guide	23
	GC everStick®PERIO	34	G GC G-Coat PLUS	42	GC Revotek LC	64
E	GC everStick®POST	31	GC GRADIA®	90	GC Saliva-Check Buffer	13
	GC everX Posterior	20	GC GRADIA Core & Post	30	GC Saliva-Check Mutans	13
	GC Exajet	59	GC GRADIA Direct	26	GC Stellavest	77
	GC Exafast NDS	58	GC GRADIA Direct Flo	27	S GC STEPLIGHT SL-I	94
	GC EXA'lence	56	GC GRADIA Direct LoFlo	27	GC Stick & StickNET	92
	GC Exabite II NDS	65	GC GRADIA gum shades	91	GC StickCARRIER	35
	GC Examix/flex	58	GC Impression Separation Wafer	61	GC StickRESIN	35
	GC Fiber Post	31	GC Initial AL & ZR-FS	84	GC StickSTEPPER	35
	GC Fit Checker Advanced	65	GC Initial Connector Paste	83	GC Tissue Conditioner	66
	GC Fit Checker Advanced Blue	65	GC Initial Gum & Bleach	86	GC Tooth Mousse	14
	GC Freegenol	50	GC Initial INmetalbond	83	T GC Treclean	62
	GC Fuji I	49	GC Initial IQ Layering over Metal & Zircon	88	GC Tri Plaque ID Gel	12
F	GC FujiCEM 2	48	I GC Initial IQ Press over Metal & Zircon	89	GC Unifast III	63
	GC Fuji LINING LC Paste Pak	40	GC Initial IQ Lustre Pastes NF	87	U GC Unifast LC	64
	GC Fuji LINING LC	40	GC Initial MC	80	GC Unifast TRAD	63
	GC Fuji ORTHO	53	GC Initial PC & LF	85	V GC Vest-G	77
	GC Fuji ORTHO BAND LC PP	54	GC Initial Ti Bonder	83		
	GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak	55	GC Initial Ti & LF	82		

A katalógusban szereplő színek Vita® vagy GC színek.

A Vita® a Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, Germany bejegyzett védjegye.

A RECALDENT™ engedéllyel használt márkanév.

PRINTED BY ARTOOS

☒ ISO 14001

☒ 100% GREEN POWER

☒ CLIMATE NEUTRAL COMPANY

☒ SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY

certificate number: 53520-1301-1013

www.artoos.be



FSC

www.fsc.org

MIX

Paper from
responsible sources

FSC® C007370

GC EUROPE

**GC EUROPE N.V.**

Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
<http://www.gceurope.com>

GC EUROPE N.V.

GC EEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eeo.gceurope.com
<http://www.eeo.gceurope.com>

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Hungary
Fazekas u. 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.04.00
Fax. +36.1.224.04.01
hungary@eeo.gceurope.com
<http://www.eeo.gceurope.com>